




Rx Only


Veuillez lire l'intégralité de votre guide de l'utilisateur AirCurve™ 10 avant de l'utiliser.

Installation

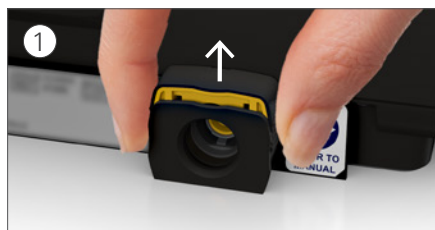

Une fois l'appareil posé sur une surface plane et stable, saisir l'attache de retenue située à l'arrière de l'appareil et la tirer vers le haut pour ouvrir.

Remarque : L'attache de retenue est présentée en position ouverte.

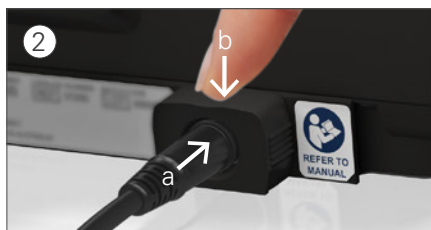

(a) Brancher le connecteur d'alimentation dans l'entrée d'alimentation électrique de l'appareil et (b) pousser l'attache de retenue vers le bas pour bien la fixer en place.

Brancher une extrémité du cordon d'alimentation dans le module d'alimentation et l'autre extrémité dans une prise de courant.




Raccorder fermement le circuit respiratoire à la sortie d'air située à l'arrière de l'appareil.



Ouvrir le réservoir d'eau et le remplir d'eau jusqu'au repère de niveau d'eau maximal.



Fermer le réservoir d'eau et l'insérer sur le côté de l'appareil.

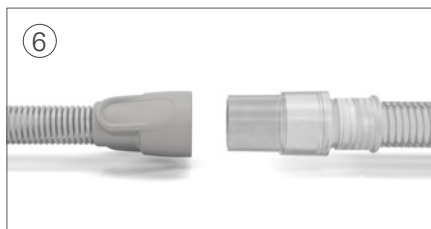

Raccorder fermement l'extrémité libre du circuit respiratoire au système de masque assemblé. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer le traitement.

Adaptation au traitement


Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous habituer au traitement. La plupart des patients ont besoin d'une à deux semaines pour s'adapter à la pression de l'air.

Surmonter les symptômes en modifiant les réglages de confort

Si vous éprouvez des difficultés à vous habituer au traitement, utilisez les fonctions de confort de l'appareil AirCurve 10 pour vous aider à améliorer votre sommeil.

- **Sécheresse nasale ou écoulement nasal**—Si votre nez devient sec ou se met à couler, ajuster le niveau d'humidité en l'augmentant.
- **Gouttelettes d'eau (condensation)**—Si des gouttelettes d'eau se forment sur votre nez, sur le masque ou dans le circuit respiratoire, ajuster le niveau d'humidité en l'abaissant.


Pour modifier la durée de rampe :

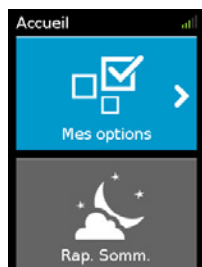

1. Appuyer sur la molette de réglage pour afficher l'écran Mes options.



2. Tourner la molette de réglage pour mettre la durée de rampe en surbrillance, puis appuyer sur la molette pour sélectionner le réglage.

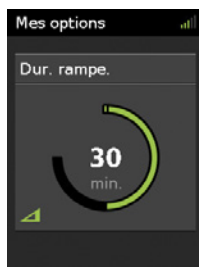

3. Tourner la molette de réglage pour ajuster les réglages selon vos préférences.



4. Appuyer sur la molette de réglage pour enregistrer les modifications.

Nettoyage

1. Nettoyer le réservoir d'eau et le circuit respiratoire avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne pas laver le circuit respiratoire dans un lave-vaisselle ou une laveuse.
2. Rincer soigneusement le réservoir d'eau et le circuit respiratoire et les laisser sécher à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
3. Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un linge sec.

Consulter le guide de l'utilisateur du masque pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage de votre masque.



Vérification et remplacement réguliers des composants

Il est important, pour votre confort et votre santé, de vérifier et de remplacer régulièrement les composants et les éléments de votre appareil. En remplaçant régulièrement les composants et les éléments de votre appareil, vous vous assurez de recevoir un traitement optimal et un confort durable.

Consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil AirCurve 10 pour obtenir des instructions détaillées sur la vérification de votre appareil. Communiquer avec votre fournisseur de soins pour obtenir des renseignements sur votre calendrier de remplacement.

Guide relatif au calendrier de remplacement :

| Tous les mois | Tous les 3 mois | Tous les 6 mois |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Coussinets et coussins du masque | Structure du masque (sans les attaches) | Attaches |
| Filtres à air | Circuit respiratoire | Réservoir d'eau |

S'inscrire aujourd'hui

myAir™ vous permet d'accéder aux données relatives à votre traitement et d'obtenir une assistance personnalisée.

Tout voyage débute par un premier pas. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site [ResMed.com/myAir](https://www.resmed.com/myAir)

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Numéro de série | Numéro de l'appareil |
| Type et taille du masque | Date de configuration |
| Commentaires | |



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie

Veuillez consulter le site [Resmed.com](https://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées des bureaux ResMed dans le monde. AirCurve, ClimateLine et HumidAir sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de la famille d'entreprises ResMed. Pour obtenir des renseignements concernant les brevets et toute autre propriété intellectuelle, consulter le site [Resmed.com/ip](https://www.resmed.com/ip). © 2025 ResMed. 288396/1 2025-02

