



ResMed

AirCurve™ 10 VAUTO

S



Hjem-knapp for å returnere til
hjemmeskjermen når som helst

Start-/stopknapp for å starte behandling

Innstillingshjul for navigering og endring av alternativer

Luftuttak for tilkobling av luftslange

Hurtigveiledning

Norsk

Les hele brukerveiledningen for AirCurve™ 10 før bruk.

Oppsett




Plasser apparatet på en stabil, jevn overflate.



Koble til strømkontakten bakpå apparatet. Koble en av endene på strømledningen i strømforsyningsenheten og den andre enden i strømmuttaket.



Koble luftslangen godt til luftuttaket plassert på apparatets bakre del.

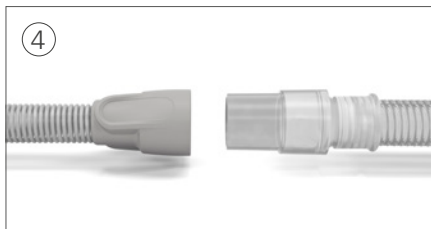

Den monterte masken kobles godt til den ledige enden av luftslangen. Trykk start/stopp for å begynne behandlingen.

AirCurve 10 med HumidAir

Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir™, fyller du fukteren slik:



Åpne fukteren og fyll med vann opptil merket for maksimalt vannivå.



Lukk fukteren og sett inn i siden på apparatet.

Oppvarmet fukting gir avlastning fra tørrhet og kongestion, og er utformet for å gjøre behandlingen mer behagelig. Hvis du ikke har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, bør du vurdere å kjøpe HumidAir og ClimateLineAir™ oppvarmet luftslange.

Venne deg til behandling


Hvis du er førstegangsbruker, trenger du kanskje litt tid til å bli vant til behandlingen. Dette er ikke uvanlig, da det tar de fleste pasienter mellom én og to uker å venne seg til lufttrykket.

Overkomme symptomer ved å endre komfortinnstillinger


Hvis du har problemer med å venne deg til behandlingen, bruker du komfortfunksjonene på AirCurve 10 for å hjelpe deg på veien mot bedre søvn.

- **Problemer med å sovne** – Hvis du har problemer med å sovne med høyt trykk, slår du på Rampe eller øker Rampetid.
- **Oppblåst følelse** – Hvis du opplever en litt oppblåst følelse av å ha svelget luft, slår du på Rampe eller øker Rampetid.
- **Følelse av å ikke få nok luft** – Hvis det kjennes som du ikke får nok luft, slår du Rampetid av.

Slik endrer du rampetiden:

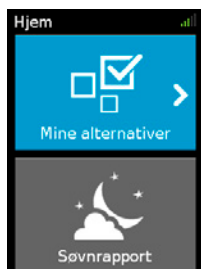


1. Trykk på innstillingshjulet for å gå til Mine alternativer.

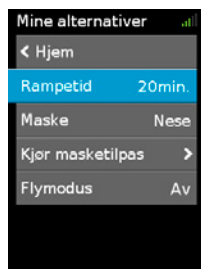

2. Drei innstillingshjulet for å utheve Rampetid, og trykk deretter for å velge den.



3. Drei innstillingshjulet for å justere til ønsket innstilling.

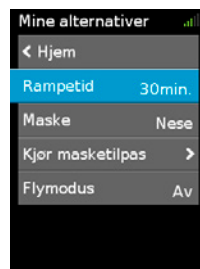

4. Trykk på innstillingshjulet for å lagre endringen.

Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, har du flere komfortfunksjoner tilgjengelige som hjelper med å gjøre behandlingen din mer komfortabel.

- **Tørr eller rennende nese** – Hvis du får tørr eller rennende nese, justerer du fuktighetsnivået ved å skru det opp.
- **Vanndråper (kondens)** – Hvis du får vanndråper på nesene, masken eller luftslangen, justerer du fuktighetsnivået ved å skru det ned.



ResMed

Rengjøring

1. Vask luftslangen i varmt vann med et mildt rengjøringsmiddel.
Skal ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
2. Skyll luftslangen grundig og heng opp til tørk unna direkte sollys og/eller varme.
3. Tørk av utsiden av apparatet med en tørr klut.

Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, rengjør du fukteren ifølge trinn 1 og 2.

Se brukerveiledningen for masken for detaljerte instruksjoner om rengjøring av masken.

Regelmessig kontroll og utskifting av deler

Det er viktig for din komfort og helse at du regelmessig kontrollerer og skifter ut deler og rekvisita. Jevnlig utskifting av deler og rekvisita hjelper med å sikre at du mottar optimal behandling og fortsatt komfort.

Se brukerveiledningen for AirCurve 10 for detaljerte instruksjoner om kontroll av apparatet. Ta kontakt med helsepersonellet for informasjon om utskiftingsplanen.

Serienummer	Apparatnummer
Masketype og størrelse	Dato for oppsett
Merknader	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUERES AV

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Se www.resmed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. For informasjon om patenter, se www.resmed.com/ip.
AirCurve, ClimateLine og HumidAir er varemerker for ResMed Ltd. ClimateLine er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office (USAs patent- og varemerkekontor).

© 2014 ResMed Ltd. 378362/2 2014-09

ResMed.com

CE
0123



378362