



**ResMed**

**AirCurve™ 10** VAUTO

S



Кнопка Дом для возврата к стартовому экрану в любой момент

Кнопка Пуск/Остановка для запуска терапии

Переключатель для переключения и изменения настроек

Воздухоотводное отверстие для присоединения дыхательной трубки

Краткое руководство пользователя

Русский

Перед применением полностью ознакомьтесь с руководством пользователя AirCurve™ 10.

## Установка прибора




1 Разместите прибор на устойчивой ровной поверхности.



2 Подключите разъем питания к задней панели прибора. Подключите один конец шнура питания к блоку питания, а другой конец включите в розетку питания.



3 Плотно присоедините дыхательную трубку к воздухоотводному отверстию, расположенному на задней панели прибора.

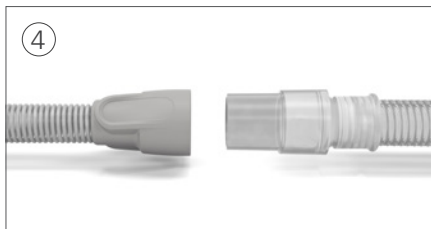

4 Плотно подсоедините свободный конец дыхательной трубки к собранной маске. Нажмите кнопку Пуск/Остановка, чтобы начать терапию.

## AirCurve 10 с HumidAir

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir™, заполните увлажнитель следующим образом:



1 Откройте увлажнитель и заполните его водой до отметки максимального уровня воды.



2 Закройте увлажнитель и вставьте его в боковую сторону прибора.

Увлажнение с подогревом позволяет устранить сухость в носу и насморк и предназначено для повышения комфортности терапии. Если у вас отсутствует прибор AirCurve 10 с HumidAir, рассмотрите возможность приобретения увлажнителя HumidAir и дыхательной трубки с подогревом ClimateLineAir™.

## Привыкание к терапии


Если вы пользуетесь прибором впервые, вам может понадобиться некоторое время для привыкания к терапии. Это неудивительно, так как большинству пациентов требуется от одной до двух недель, чтобы привыкнуть к подаче воздуха под давлением.

### Преодоление симптомов путем изменения функций комфорта


Если у вас возникли трудности с привыканием к терапии, используйте функции комфорта AirCurve 10, которые помогут вам наладить улучшенный сон.

- **Трудности при засыпании** — если высокое давление воздуха мешает вам заснуть, включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
- **Ощущение вздутия** — если у вас возникло ощущение несильного вздутия вследствие глотания воздуха, включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
- **Ощущение недостатка воздуха** — если, по вашим ощущениям, вы не получаете достаточное количество воздуха, установите Врем. Ramp в положение Выкл.


Настройка Врем. Ramp:

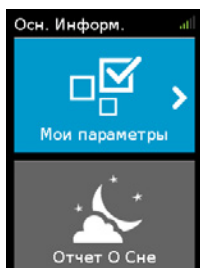


1. Нажмите на переключатель, чтобы войти в меню Мои параметры.

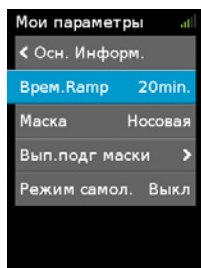

2. Поверните переключатель, чтобы выделить Врем. Ramp, а затем нажмите на переключатель, чтобы выбрать этот параметр.

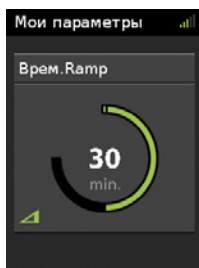

3. Поверните переключатель, чтобы установить нужное значение.

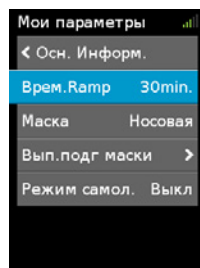

4. Нажмите на переключатель, чтобы сохранить измененное значение.

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir, он снабжен дополнительными функциями комфорта, способными еще более повысить комфортность вашей терапии.

- **Сухость в носу или насморк** — если у вас появилось ощущение сухости в носу или течет из носа, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону повышения.
- **Капли воды (конденсация)** — если на вашем носу, в маске или на трубке появляются капли воды, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону понижения.



# ResMed

## Чистка

1. Промывайте дыхательную трубку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.  
Не мойте в стиральной или посудомоечной машине.
2. Тщательно сполосните дыхательную трубку и дайте высохнуть, избегая попадания прямых солнечных лучей и/или тепла.
3. Протрите внешнюю поверхность прибора сухой тряпочкой.

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir, очистите увлажнитель согласно действиям 1 и 2.

См. руководство пользователя маски относительно подробных инструкций по чистке маски.

## Регулярная проверка и замена частей прибора

Для обеспечения вашего комфорта и здоровья вам необходимо регулярно проверять и заменять части и расходные материалы вашего прибора. Регулярная замена частей и расходных материалов вашего прибора поможет обеспечить оптимальную терапию и постоянный комфорт.

См. руководство пользователя AirCurve 10 относительно подробных инструкций по проверке вашего прибора. За расписанием замены вашего оборудования обращайтесь к вашей организации ухода на дому.

Серийный номер	Номер прибора
Тип и размер маски	Дата установки
Примечания	



ResMed Ltd  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

### РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Информацию о представительствах ResMed по всему миру см. на сайте [www.resmed.com](http://www.resmed.com). Сведения о патентах см. на сайте [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirCurve, ClimateLine и HumidAir являются товарными знаками компании ResMed Ltd. ClimateLine зарегистрирован в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. © 2014 ResMed Ltd. 378368/1 2014-11



ResMed.com



378368