



ResMed

AirCurve™ 10 VAUTO

S



Kezdőlap gomb a kezdő képernyőre való
bármikor visszatéréshez

Start/Stop gomb a kezelés indításához

Tárcsa a navigációhoz és a kiválasztott lehetőség módosításához

Levegőkimeneti nyílás az levegőcső csatlakoztatásához

Gyors indítási útmutató

Magyar

Használat előtt olvassa el az AirCurve™ 10 egész felhasználói útmutatóját.

Beállítás




Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.



A hálózati csatlakozót dugja be a készülék hátuljába. A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa a tápegységhez, a másik végét pedig a hálózati csatlakozóaljzatba.



A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a készülék hátulján lévő levegőkimeneti nyíláshoz.

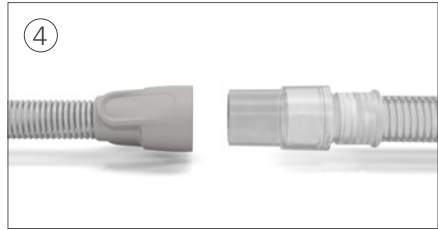

A levegőcső szabad végét szorosan csatlakoztassa az összeszerelt maszkhöz. A kezelés elindításához nyomja meg a Start/ Stop gombot.

AirCurve 10 -val/vel HumidAir

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir™ eszközzel, a következő módon töltsse fel a párástót:



Nyissa fel a párástót, és töltsse fel vízzel a maximális vízszint jelzéséig.



Csukja le a párástót, és helyezze be a készülék oldalába.

A fűtött párástó enyhíti a szárazságot és az orrdugulást, és arra szolgál, hogy kellemesebbé tegye a kezelést. Ha nem AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, fontolja meg a HumidAir készülék és a ClimateLineAir™ fűtött levegőcső vásárlását.

A kezeléshez való alkalmazkodás


Ha most használnál először ilyen készüléket, lehet, hogy egy kis időre lesz szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon a kezeléshez. Ez nem szokatlan dolog, mivel a legtöbb betegnek egy-két hétre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a levegő nyomásához.

A tünetek enyhítése a kényelmi beállítások módosításával


Ha nehézségei vannak a kezeléshez való alkalmazkodásban, használja az AirCurve 10 kényelmi funkcióit, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy egyre jobban tudjon aludni.

- **Nehezen megy az elalvás** — Ha nagy levegőnyomásnál nehezen tud elaludni, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Puffadt érzés** — Ha kissé puffadt érzése van a lenyelt levegőtől, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Légszomj** — Ha úgy érzi, mintha nem kapna elég levegőt, kapcsolja Off (Ki) állásba a Ramp Time (Felfutási idő) paramétert.


A Ramp Time (Felfutási idő) módosítása:

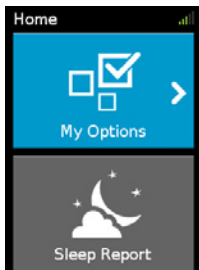


1. A My Options (Választási lehetőségek) képernyőre való belépéshez nyomja meg a tárcsát.

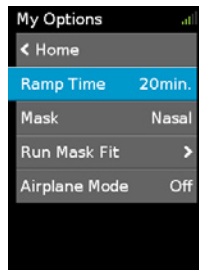

2. A tárcsát elfordítva emelje ki, majd a tárcsát lenyomva válassza ki a Ramp Time (Felfutási idő) lehetőséget.

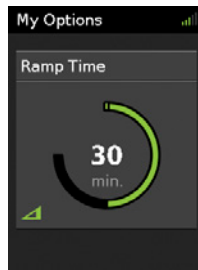

3. A tárcsát elfordítva állítsa be a legjobban kedvelt beállítást.

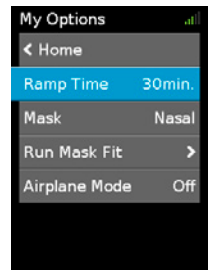

4. A módosítás elmentéséhez nyomja meg a tárcsát.

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, akkor több olyan kényelmi funkció is a rendelkezésére áll, amely kellemesebbé teszi a kezelést.

- **Nehezen megy az elalvás** — Ha nagy levegőnyomásnál nehezen tud elaludni, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Puffadt érzés** — Ha kissé puffadt érzése van a lenyelt levegőtől, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.



ResMed

Tisztítás

1. Meleg vízben, enyhe mosószerrel mossa el a levegőcsövet.
Tilos mosógépben vagy mosogatógépben mosni.
2. Alaposan öblítse ki a levegőcsövet, és hagyja megszáradni közvetlen napfénytől és/vagy hőszugárzástól védett helyen.
3. Tisztítsa meg a készülék külsejét száraz törlőkendővel.

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, tisztítsa a párástítót az 1. és 2. lépések leírása szerint.

A maszk tisztítására vonatkozó részletes utasításokat lásd a maszk felhasználói útmutatójában.

Az alkatrészek rendszeres ellenőrzése és cseréje

Kényelme és egészsége szempontjából fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze és cserélje az alkatrészeket és a készleteket. Az alkatrészek és készletek rendszeres cseréje segít annak biztosításában, hogy Ön optimális kezelést kapjon és folyamatos kényelme biztosítva legyen.

Az AirCurve 10 készülék ellenőrzésére vonatkozó részletes utasításokat lásd annak felhasználói útmutatójában. A cserék ütemezését tudakolja meg az ápolási szolgáltatótól.

Sorozatszám	Készülék száma
Maszk típusa és mérete	Telepítés dátuma
Megjegyzések	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Ausztrália

FORGALMAZÓ

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW
Egyesült Királyság

A világ többi részén található ResMed irodák a www.resmed.com weboldalon találhatóak. A szabadalmakra vonatkozó információt lásd a www.resmed.com/ip weboldalon. Az AirCurve, a ClimateLine és a HumidAir a ResMed Ltd. védjegyei. A ClimateLine be van jegyezve az U.S.A. Szabadalmi és Védjegy Hivatalában (U.S. Patent and Trademark Office). © 2014 ResMed Ltd. 378371/1 2014-11

ResMed.com



378371

CE
0123