



ResMed

AirCurve™ 10 CS PACEWAVE



Кнопка Дом для возврата к стартовому экрану в любой момент

Кнопка Пуск/Остановка для запуска терапии

Переключатель для переключения и изменения настроек

Воздухоотводное отверстие для присоединения дыхательной трубки

Краткое руководство пользователя

Русский

Перед применением полностью ознакомьтесь с руководством пользователя AirCurve™ 10.

Установка прибора




1 Разместите прибор на устойчивой ровной поверхности.



2 Подключите разъем питания к задней панели прибора. Подключите один конец шнура питания к блоку питания, а другой конец включите в розетку питания.



3 Плотно присоедините дыхательную трубку к воздухоотводному отверстию, расположенному на задней панели прибора.

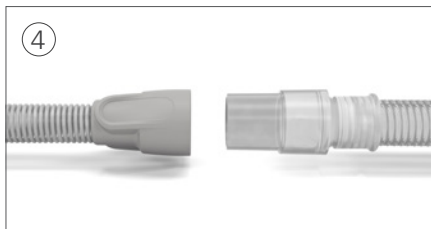

4 Плотно подсоедините свободный конец дыхательной трубки к собранной маске. Нажмите кнопку Пуск/Остановка, чтобы начать терапию.

AirCurve 10 с HumidAir

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir™, заполните увлажнитель следующим образом:



1 Откройте увлажнитель и заполните его водой до отметки максимального уровня воды.



2 Закройте увлажнитель и вставьте его в боковую сторону прибора.

Увлажнение с подогревом позволяет устранить сухость в носу и насморк и предназначено для повышения комфортности терапии. Если у вас отсутствует прибор AirCurve 10 с HumidAir, рассмотрите возможность приобретения увлажнителя HumidAir и дыхательной трубки с подогревом ClimateLineAir™.

Привыкание к терапии


Если вы пользуетесь прибором впервые, вам может понадобиться некоторое время для привыкания к терапии. Это неудивительно, так как большинству пациентов требуется от одной до двух недель, чтобы привыкнуть к подаче воздуха под давлением.

Преодоление симптомов путем изменения функций комфорта


Если у вас возникли трудности с привыканием к терапии, используйте функции комфорта AirCurve 10, которые помогут вам наладить улучшенный сон.

- **Трудности при засыпании** — если высокое давление воздуха мешает вам заснуть, включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
- **Ощущение вздутия** — если у вас возникло ощущение несильного вздутия вследствие глотания воздуха, включите функцию Ramp или увеличьте Врем. Ramp.
- **Ощущение недостатка воздуха** — если, по вашим ощущениям, вы не получаете достаточное количество воздуха, установите Врем. Ramp в положение Выкл.

Настройка Врем. Ramp:

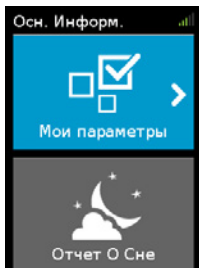


1. Нажмите на переключатель, чтобы войти в меню Мои параметры.

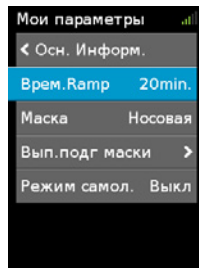

2. Поверните переключатель, чтобы выделить Врем. Ramp, а затем нажмите на переключатель, чтобы выбрать этот параметр.



3. Поверните переключатель, чтобы установить нужное значение.

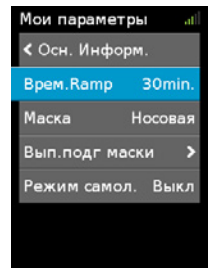

4. Нажмите на переключатель, чтобы сохранить измененное значение.

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir, он снабжен дополнительными функциями комфорта, способными еще более повысить комфортность вашей терапии.

- **Сухость в носу или насморк** — если у вас появилось ощущение сухости в носу или течет из носа, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону повышения.
- **Капли воды (конденсация)** — если на вашем носу, в маске или на трубке появляются капли воды, отрегулируйте Уров. Влажн. в сторону понижения.



ResMed

Чистка

1. Промывайте дыхательную трубку в теплой воде с использованием мягкого моющего средства.
Не мойте в стиральной или посудомоечной машине.
2. Тщательно сполосните дыхательную трубку и дайте высохнуть, избегая попадания прямых солнечных лучей и/или тепла.
3. Протрите внешнюю поверхность прибора сухой тряпочкой.

Если у вас имеется прибор AirCurve 10 с HumidAir, очистите увлажнитель согласно действиям 1 и 2.

См. руководство пользователя маски относительно подробных инструкций по чистке маски.

Регулярная проверка и замена частей прибора

Для обеспечения вашего комфорта и здоровья вам необходимо регулярно проверять и заменять части и расходные материалы вашего прибора. Регулярная замена частей и расходных материалов вашего прибора поможет обеспечить оптимальную терапию и постоянный комфорт.

См. руководство пользователя AirCurve 10 относительно подробных инструкций по проверке вашего прибора. За расписанием замены вашего оборудования обращайтесь к вашей организации ухода на дому.

Серийный номер	Номер прибора
Тип и размер маски	Дата установки
Примечания	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Информацию о представительствах ResMed по всему миру см. на сайте www.resmed.com. Сведения о патентах см. на сайте www.resmed.com/ip. AirSense, ClimateLine и HumidAir являются товарными знаками компании ResMed Ltd. ClimateLine зарегистрирован в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. © 2014 ResMed Ltd. 378390/1 2014-10



ResMed.com



378390