



**ResMed**

**AirCurve™ 10** CS PACEWAVE



Kezdőlap gomb a kezdő képernyőre való  
bármikor visszatéréshez

Start/Stop gomb a kezelés indításához

Tárcsa a navigációhoz és a kiválasztott lehetőség módosításához

Levegőkimeneti nyílás az levegőcső csatlakoztatásához

Gyors indítási útmutató

Magyar

Használat előtt olvassa el az AirCurve™ 10 egész felhasználói útmutatóját.

## Beállítás




Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.



A hálózati csatlakozót dugja be a készülék hátuljába. A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa a tápegységhez, a másik végét pedig a hálózati csatlakozóaljzatba.



A levegőcsövet szorosan csatlakoztassa a készülék hátulján lévő levegőkimeneti nyíláshoz.

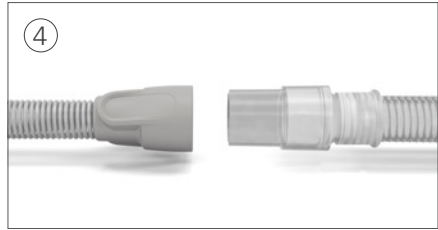

A levegőcső szabad végét szorosan csatlakoztassa az összeszerelt maszkhöz. A kezelés elindításához nyomja meg a Start/ Stop gombot.

## AirCurve 10 -val/vel HumidAir

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir™ eszközzel, a következő módon töltsse fel a párástót:



Nyissa fel a párástót, és töltsse fel vízzel a maximális vízszint jelzéséig.



Csukja le a párástót, és helyezze be a készülék oldalába.

A fűtött párástó enyhíti a szárazságot és az orrdugulást, és arra szolgál, hogy kellemesebbé tegye a kezelést. Ha nem AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, fontolja meg a HumidAir készülék és a ClimateLineAir™ fűtött levegőcső vásárlását.

# A kezeléshez való alkalmazkodás


Ha most használnál először ilyen készüléket, lehet, hogy egy kis időre lesz szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon a kezeléshez. Ez nem szokatlan dolog, mivel a legtöbb betegnek egy-két hétre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a levegő nyomásához.

## A tünetek enyhítése a kényelmi beállítások módosításával


Ha nehézségei vannak a kezeléshez való alkalmazkodásban, használja az AirCurve 10 kényelmi funkcióit, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy egyre jobban tudjon aludni.

- **Nehezen megy az elalvás** — Ha nagy levegőnyomásnál nehezen tud elaludni, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Puffadt érzés** — Ha kissé puffadt érzése van a lenyelt levegőtől, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Légszomj** — Ha úgy érzi, mintha nem kapna elég levegőt, kapcsolja Off (Ki) állásba a Ramp Time (Felfutási idő) paramétert.


A Ramp Time (Felfutási idő) módosítása:

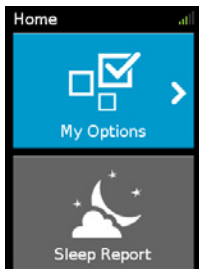


1. A My Options (Választási lehetőségek) képernyőre való belépéshez nyomja meg a tárcsát.

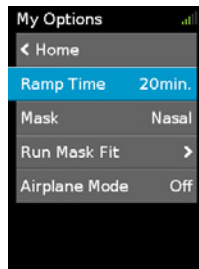

2. A tárcsát elfordítva emelje ki, majd a tárcsát lenyomva válassza ki a Ramp Time (Felfutási idő) lehetőséget.

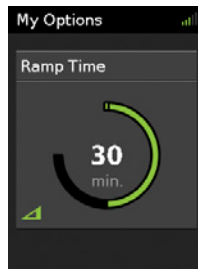

3. A tárcsát elfordítva állítsa be a legjobban kedvelt beállítást.

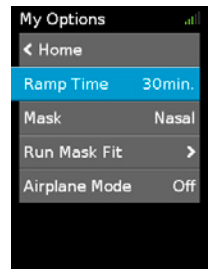

4. A módosítás elmentéséhez nyomja meg a tárcsát.

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, akkor több olyan kényelmi funkció is a rendelkezésére áll, amely kellemesebbé teszi a kezelést.

- **Nehezen megy az elalvás** — Ha nagy levegőnyomásnál nehezen tud elaludni, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.
- **Puffadt érzés** — Ha kissé puffadt érzése van a lenyelt levegőtől, kapcsolja be a Ramp (Felfutás) funkciót, vagy növelje a Ramp Time (Felfutási idő) értékét.



# ResMed

## Tisztítás

1. Meleg vízben, enyhe mosószerrel mossa el a levegőcsövet.  
Tilos mosógépben vagy mosogatógépben mosni.
2. Alaposan öblítse ki a levegőcsövet, és hagyja megszáradni közvetlen napfénytől és/vagy hőszugárzástól védett helyen.
3. Tisztítsa meg a készülék külsejét száraz törlőkendővel.

Ha AirCurve 10 készüléke van HumidAir eszközzel, tisztítsa a párástítót az 1. és 2. lépések leírása szerint.

A maszk tisztítására vonatkozó részletes utasításokat lásd a maszk felhasználói útmutatójában.

## Az alkatrészek rendszeres ellenőrzése és cseréje

Kényelme és egészsége szempontjából fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze és cserélje az alkatrészeket és a készleteket. Az alkatrészek és készletek rendszeres cseréje segít annak biztosításában, hogy Ön optimális kezelést kapjon és folyamatos kényelme biztosítva legyen.

Az AirCurve 10 készülék ellenőrzésére vonatkozó részletes utasításokat lásd annak felhasználói útmutatójában. A cserék ütemezését tudakolja meg az ápolási szolgáltatótól.

Sorozatszám	Készülék száma
Maszk típusa és mérete	Telepítés dátuma
Megjegyzések	



ResMed Ltd  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Ausztrália

### FORGALMAZÓ

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW  
Egyesült Királyság

A világ többi részén található ResMed irodák a [www.resmed.com](http://www.resmed.com) weboldalon találhatóak. A szabadalmakra vonatkozó információt lásd a [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip) weboldalon. Az AirSense, a ClimateLine és a HumidAir a ResMed Ltd. védjegyei. A ClimateLine be van jegyezve az U.S.A. Szabadalmi és Védjegy Hivatalában (U.S. Patent and Trademark Office). © 2014 ResMed Ltd. 378393/1 2014-10



ResMed.com



378393