



ResMed

AirSense™ 10 **AUTOSET**

ELITE



Herhangi bir zamanda Anasayfa ekranına
dönmek için Anasayfa düğmesi

Tedaviyi başlatmak için Başlat/Durdur düğmesi

Navigasyon ve seçenekleri değiştirmek için kadran

Hava tüpünü bağlamak için hava çıkışı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Türkçe

Kullanmadan önce tüm AirSense™ 10 Kullanıcı Kılavuzunu okuyun.

Kurulum




Cihazı stabil düz bir yüzeye koyun.



Güç konektörünü cihazın arkasına takın. Güç kablosunun bir ucunu güç kaynağı ünitesine ve diğer ucunu güç çıkışına takın.



Hava tüpünü cihazın arkasında bulunan hava çıkışına sıkıca takın.

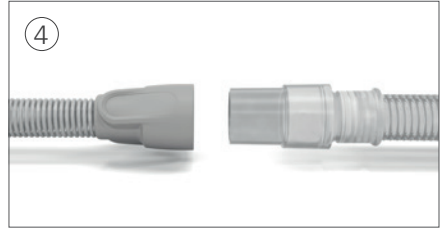

Hava tüpünün serbest ucunu kurulu maskeye sıkıca takın. Tedaviyi başlatmak için Başlat/Durdur kısmına basın.

AirSense 10 ile HumidAir

HumidAir™ ile AirSense 10 cihazınız varsa nemlendiriciyi aşağıdaki gibi doldurun:



Nemlendiriciyi açın ve maksimum su seviyesi işaretine kadar suyla doldurun.



Nemlendiriciyi kapatın ve cihazın yan tarafına yerleştirin.

Isıtmalı nemlendirme kuruluk ve tıkanıklıkla ilgili rahatlama sağlar ve tedaviyi daha rahat hale getirmek için tasarlanmıştır. HumidAir ile AirSense 10 cihazınız yoksa HumidAir ve ClimateLineAir™ ısıtılmalı hava tüpünü satın almayı düşünün.

Tedaviye uyum sağlama


Eğer ilk defa kullanıyorsanız, tedaviye alışmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Çoğu hastanın hava basıncına alışması bir ile iki hafta arasında sürdüğü için bu durum sıradışı değildir.

Rahatlama ayarlarını değiştirerek belirtilerle başa çıkmak

Eğer tedaviye alışmakta zorluklar yaşıyorsanız daha iyi uykuya giden yolda size yardımcı olması için AirSense 10 rahatlama özelliklerini kullanın.

- **Uykuya dalmakta zorluk**—Yüksek basınçla uykuya dalmakta zorluk yaşıyorsanız, Auto Rampayı açın veya Rampa Zmn artırın.
- **Şişkinlik hissi**—Eğer hava yutma nedeniyle hafif şişkinlik hissi yaşıyorsanız, Auto Rampayı açın veya Rampa Zmn artırın.
- **Yeterli hava alamama hissi**—Eğer yeterince hava alamıyor gibi hissediyorsanız, Rampa Zmn Kplı duruma çevirin.

Rampa Zmn değiştirmek için:

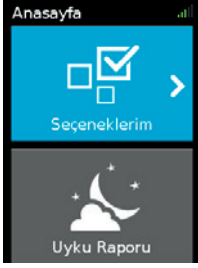


1. Seçeneklerim kısmına girmek için kadrana basın.



2. Kadranı Rampa Zmn vurgulamak üzere çevirin ve ardından seçmek için basın.



3. Tercih ettiğiniz ayarı ayarlamak için kadranı çevirin.

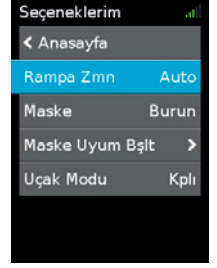

4. Değişikliği kaydetmek için kadrana basın.

HumidAir ile AirSense 10 cihazınız varsa tedavinizi daha rahat hale getirmeye yardımcı daha fazla rahatlama özelliğine sahipsiniz.

- **Burun kuruluğu veya akıntısı**—Eğer burnunuz kuruyor veya akıyorsa Nemlilik Düzeyini artırarak ayarlayın.
- **Su damlacıkları (yoğuşma)**—Burnunuz, maskeniz veya hava tüpünüzde su damlacıkları oluşuyorsa Nemlilik Düzeyini azaltarak ayarlayın.



Temizleme

1. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
Çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkamayın.
2. Hava tüpünü iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığından ve/veya ısıdan uzakta kurumaya bırakın.
3. Cihazın dışını kuru bir bezle silin.

HumidAir ile AirSense 10 cihazınız varsa nemlendiriciyi adım 1 ve 2'deki gibi temizleyin.

Maskenizi temizlemek hakkında ayrıntılı talimat için maske Kullanıcı Kılavuzunuza başvurun.

Parçalarınızı düzenli olarak kontrol etmek ve değiştirmek

Parçalarınızı ve malzemenizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve değiştirmeniz rahatınız ve sağlığınız için önemlidir. Parçalarınızı ve malzemenizi düzenli olarak değiştirmeniz optimum tedavi ve devam eden bir rahatlık elde etmenizi sağlamaya yardım edecektir.

Cihazınızı kontrol etmek hakkında ayrıntılı talimat için AirSense 10 Kullanıcı Kılavuzunuza başvurun. Değiştirme çizelgenizle ilgili bilgi için bakım sağlayıcınızla irtibat kurun.

Seri numarası	Cihaz numarası
Maske tipi ve büyüklüğü	Kurulum tarihi
Notlar	

 **ResMed Pty Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Avustralya

DİSTRİBÜTÖR
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 ABD
EC REP ResMed (İngiltere) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire
OX14 4RW İngiltere

Tüm dünyadaki diğer merkezler için www.resmed.com sitesine bakın. Patent bilgisi için www.resmed.com/ip adresine bakınız.
AirSense, ClimateLine ve HumidAir, ResMed. ticari markalardır. ClimateLine ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescillidir.
© 2014 ResMed. 378334/1 2014-09

ResMed.com

CE
0123



378334