



**ResMed**

**AirSense™ 10** AUTOSSET

ELITE



ปุ่ม Home (หน้าหลัก) ใช้สำหรับ  
กลับไปหน้าจอหลักได้ทุกเมื่อ

ปุ่ม Start/Stop (เริ่ม/หยุด)  
สำหรับเริ่มการบำบัด

ปุ่มหมุนสำหรับเลื่อนดู  
และเปลี่ยนตัวเลือก

ช่องทางออกของอากาศใช้  
สำหรับเชื่อมต่อท่ออากาศ

**คู่มือแนะนำการใช้งานฉบับย่อ**

ภาษาไทย

อ่านคู่มือการใช้งาน AirSense™ 10 ทั้งหมดก่อนใช้งาน

## การติดตั้ง




วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง



เสียบขั้วต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของอุปกรณ์  
เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับชุด  
พาวเวอร์สวิตช์พลาซ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งกับ  
เต้าปลั๊กไฟ



ต่อท่ออากาศกับช่องทางออกของอากาศที่อยู่  
บริเวณด้านหลังของอุปกรณ์ให้แน่นสนิท

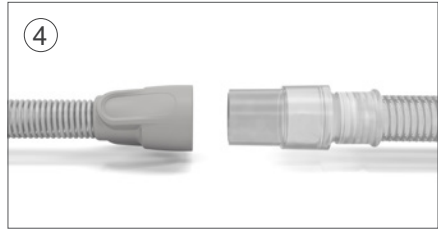

ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่ออากาศกับหน้ากากที่  
ประกอบเสร็จแล้วให้แน่นสนิท กดปุ่ม Start/Stop  
(เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มการบำบัด

## AirSense 10 กับ HumidAir

หากคุณมี AirSense 10 อุปกรณ์ที่มี HumidAir™ ให้เติมน้ำลงในเครื่องทำความชื้นตามวิธีต่อไปนี้



เปิดเครื่องทำความชื้นและเติมน้ำให้ถึงเส้นบอกระดับน้ำสูงสุด



ปิดเครื่องทำความชื้นและเสียบเครื่องเข้าที่ด้านข้าง  
ของอุปกรณ์

การทำความชื้นที่อุ่นร้อนจะช่วยบรรเทาความแห้งและอาการคัดจมูก และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดรู้สึกสบายมากขึ้น หากคุณไม่มี AirSense 10 อุปกรณ์ที่มี HumidAir ให้พิจารณาซื้อ HumidAir และ ClimateLineAir™ ท่ออากาศแบบทำความร้อนด้วยขดลวด

## การปรับตัวให้เข้ากับการบำบัด


หากคุณไม่เคยใช้หน้ากากมาก่อน คุณอาจต้องการเวลาในการสร้างความคุ้นเคยกับการบำบัด ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ในการปรับตัวให้เข้ากับระดับความดันอากาศ

### เอาชนะอาการต่างๆ ด้วยการปรับการตั้งค่าที่ให้ความรู้สึกสบาย


หากคุณรู้สึกว่าปรับตัวเข้ากับการบำบัดได้ยาก ให้ใช้ AirSense 10 การตั้งค่าที่ให้ความรู้สึกสบายเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเพื่อการนอนหลับที่ดียิ่งขึ้น

- **มีปัญหาในการนอนหลับ**—หากคุณมีปัญหาในการนอนหลับเมื่อใช้ความดันอากาศในระดับสูง ให้เปิดฟังก์ชัน Auto Ramp (ปรับความดันอัตโนมัติ) หรือเพิ่ม Ramp Time (เวลาที่ใช้ในการเพิ่มความดัน)
- **รู้สึกท้องอิด**—หากคุณรู้สึกท้องอิดเล็กน้อยเนื่องจากกลิ่นอากาศเข้าไป ให้เปิดฟังก์ชัน Auto Ramp (ปรับความดันอัตโนมัติ) หรือเพิ่ม Ramp Time (เวลาที่ใช้ในการเพิ่มความดัน)
- **รู้สึกว่าได้รับอากาศไม่เพียงพอ**—หากคุณรู้สึกว่าได้รับอากาศไม่เพียงพอ ให้ปิดฟังก์ชัน Ramp Time (เวลาที่ใช้ในการปรับเพิ่มความดัน)

วิธีเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความดัน:

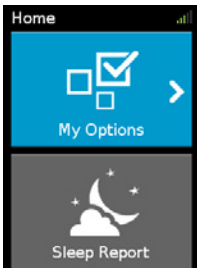


1. กดปุ่มหมุนเพื่อเข้าไปยัง My Options

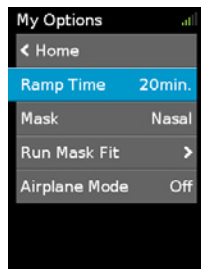

2. หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือก Ramp Time (เวลาที่ใช้ในการปรับเพิ่มความดัน) แล้วกดเพื่อเลือก



3. หมุนปุ่มหมุนเพื่อปรับไปที่การตั้งค่าที่คุณต้องการ

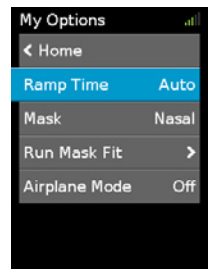

4. กดปุ่มหมุนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากคุณมี AirSense 10 อุปกรณ์ที่มี HumidAir คุณจะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายให้ใช้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณการบำบัดของคุณมีความสบายมากขึ้น

- **จุกแห้งหรือน้ำมูกไหล**—หากคุณมีอาการจุกแห้งหรือน้ำมูกไหล ให้ปรับระดับความชื้นโดยเลื่อนขึ้น
- **มีหยดน้ำ (น้ำควบแน่น)**—หากมีน้ำหยดลงบนจุก หน้ากาก หรือท่ออากาศของคุณ ให้ปรับระดับความชื้นโดยเลื่อนลง



# ResMed

## การทำความสะอาด

1. ล้างท่ออากาศในน้ำอุ่นและใช้น้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยนห้ามล้างในเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า
2. ล้างท่ออากาศด้วยน้ำให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้งโดยอย่าให้ถูกแสงแดดและ/หรือความร้อนโดยตรง
3. เช็ดส่วนด้านนอกของอุปกรณ์ด้วยผ้าแห้ง

หากคุณมี AirSense 10 อุปกรณ์ที่มี HumidAir ให้ทำความสะอาดเครื่องทำความชื้นตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 โปรดดูคู่มือการใช้งานหน้ากากสำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดหน้ากากอย่างละเอียด

## การตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสบายและสุขภาพของคุณ การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของคุณเป็นประจำจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับการบำบัดที่เหมาะสมที่สุดและได้รับความสบายอย่างต่อเนื่อง

โปรดดู AirSense 10 คู่มือการใช้งานสำหรับคำแนะนำในการตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณอย่างละเอียด ติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเปลี่ยนชิ้นส่วนของคุณ

หมายเลขผลิตภัณฑ์	หมายเลขอุปกรณ์
ประเภทและขนาดของหน้ากาก	วันที่ติดตั้ง
หมายเหตุ	

 ResMed Pty Ltd  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

เข้าไปที่ ResMed.com เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของ ResMed ทั่วโลก AirSense, ClimateLine และ HumidAir เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท ResMed สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โปรดดูที่ ResMed.com/ip

© 2021 ResMed. 378985/1 2021-06

ResMed.com



378985