



AirSense 10™

AUTOSET

ELITE



صارفی گائیڈ

اردو

خوش آمدید

AirSense™ 10 AutoSet اور AirSense 10 AutoSet for Her ResMed کی پریمیم آٹو ایڈجسٹنگ پریشر ڈیوائسز ہیں۔
AirSense 10 Elite اور AirSense 10 CPAP ResMed کی Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) ڈیوائسز ہیں۔

انتباہ

- ڈیوائس استعمال کرنے سے پہلے یہ پوری گائیڈ پڑھیں۔
- اس گائیڈ میں فراہم کردہ مطلوبہ استعمال کے مطابق ڈیوائس کا استعمال کریں۔
- اس گائیڈ میں فراہم کردہ معلومات سے قبل آپ کے دوا تجویز کرنے والے ڈاکٹر کی طرف سے فراہم کردہ مشورے پر عمل کیا جانا چاہیے۔
- یہ ڈیوائس وینٹی لیٹر پر انحصار کرنے والے مریضوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔

استعمال کے لیے تجاویز

AirSense 10 AutoSet

30 کلوگرام سے زیادہ وزن والے مریضوں میں اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا (OSA) کے علاج کے لیے AirSense 10 AutoSet سیلف ایڈجسٹنگ ڈیوائس کی تجویز کی جاتی ہے۔ یہ گھر اور ہسپتال میں استعمال کے لیے ہے۔
بیومیٹیفائر گھریلو ماحول میں ایک مریض کے استعمال اور ہسپتال/ادارہ جاتی ماحول میں دوبارہ استعمال کے لیے ہے۔

AirSense 10 AutoSet for Her

30 کلوگرام سے زیادہ وزن والی خواتین مریضوں میں اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا (OSA) کے علاج کے لیے AirSense 10 AutoSet for Her سیلف ایڈجسٹنگ ڈیوائس کی تجویز کی جاتی ہے۔ یہ گھر اور ہسپتال میں استعمال کے لیے ہے۔
بیومیٹیفائر گھریلو ماحول میں ایک مریض کے استعمال اور ہسپتال/ادارہ جاتی ماحول میں دوبارہ استعمال کے لیے ہے۔

AirSense 10 Elite

30 کلوگرام سے زیادہ وزن والے مریضوں میں اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا (OSA) کے علاج کے لیے AirSense 10 Elite ڈیوائس کی تجویز کی جاتی ہے۔ یہ گھر اور ہسپتال میں استعمال کے لیے ہے۔
بیومیٹیفائر گھریلو ماحول میں ایک مریض کے استعمال اور ہسپتال/ادارہ جاتی ماحول میں دوبارہ استعمال کے لیے ہے۔

ہائپوایلر جینک فلٹر

ہائپوایلر جینک فلٹر PAP (ہوا کے راستے کے مثبت دباؤ) تھراپی کے دوران ہوا کی فلٹریشن فراہم کرتا ہے۔

طبی فوائد

PAP تھراپی کا طبی فائدہ ایپنوس، ہائپوینیا اور نیند میں کمی کے ساتھ ساتھ زندگی کا بہتر معیار ہے۔
رطوبت کا طبی فائدہ ہوا کے راستے کے مثبت دباؤ سے متعلق ضمنی اثرات میں کمی ہے۔

تضادات

مندرجہ ذیل پہلے سے موجود کیفیات کے حامل کچھ مریضوں میں مثبت ایئر وے پریشر تھراپی متضاد ہوسکتی ہے:

- پھیپھڑوں کی شدید بیماری
- نیوموتھوریکس
- پیٹھولوجیکل طور پر کم بلڈ پریشر
- پانی کی کمی
- دماغی اسپائنل سیال کا رسنا، حالیہ کریینیل سرجری، یا صدمہ۔

منفی اثرات

آپ کو سنبھالنے میں غیر معمولی درد، شدید سر درد، یا سانس کی تکلیف میں اضافے کی اطلاع اپنے دوا تجویز کرنے والے معالج کو دینی چاہیے۔ اوپری سانس کی نالی کے شدید انفیکشن کے لیے علاج کو عارضی طور پر بند کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈیوائس کے ساتھ تھراپی کے دوران درج ذیل ضمنی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں:

- ناک، منہ یا گلے کا خشک ہونا
- ناک بہنا
- اپہارہ
- کان یا ہڈیوں کی تکلیف
- آنکھوں کی جلن
- جلد کے دھبے۔

عمومی جائزہ

⚠ انتباہ

صرف تجویز کردہ ResMed ماسکس اور لوازمات یا دیگر وینٹڈ ماسکس استعمال کریں جیسا کہ اس ڈیوائس کے ساتھ تجویز کرنے والے ڈاکٹر کی تجویز ہے۔ ان اجزاء کا استعمال عمومی طور پر سانس لینے کی اجازت دیتا ہے اور ممکنہ دم گھٹنے سے روکتا ہے۔


AirSense 10 میں درج ذیل شامل ہیں:

- ڈیوائس
- HumidAir™ ہیومیڈیفائر (اگر سیلانی کیا گیا ہے)
- اینٹر ٹیوبنگ
- پاور سیلانی یونٹ
- سفری بیگ
- SD کارڈ (تمام ڈیوائسز میں دستیاب نہیں ہے)۔
- ڈیوائس کے ساتھ استعمال کے لیے دستیاب لوازمات کی ایک رینج کے لیے اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں بشمول:
- اینٹر ٹیوبنگ (گرم اور غیر گرم): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir™, کسی، معیاری
- پانی کا ٹب: معیاری پانی کا ٹب، قابل صفائی ہیومیڈیفائر ٹب (جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے)
- ہیومیڈیفائر کے بغیر استعمال کے لیے سائیڈ کور
- فلٹر: ہائیپو آلرژک فلٹر، اسٹینڈرڈ فلٹر
- Air10™ DC/DC کنورٹر
- Air10 آکسی میٹر ایڈاپٹر
- Air10 USB ایڈاپٹر
- ResMed پاور اسٹیشن II-V2
- Air10 ٹیوبنگ ایبلو۔

نوٹس:

- تمام قسم کے ٹبز تمام علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ دستیابی کے لیے اپنے مقامی ResMed نمائندے سے رابطہ کریں۔
- یقینی بنائیں کہ ڈیوائس کے ساتھ استعمال ہونے والے تمام پرزے اور لوازمات ہم آہنگ ہیں۔ مطابقت کی معلومات کے لیے www.resmed.com سے رجوع کریں۔

آپ کی ڈیوائس کے بارے میں

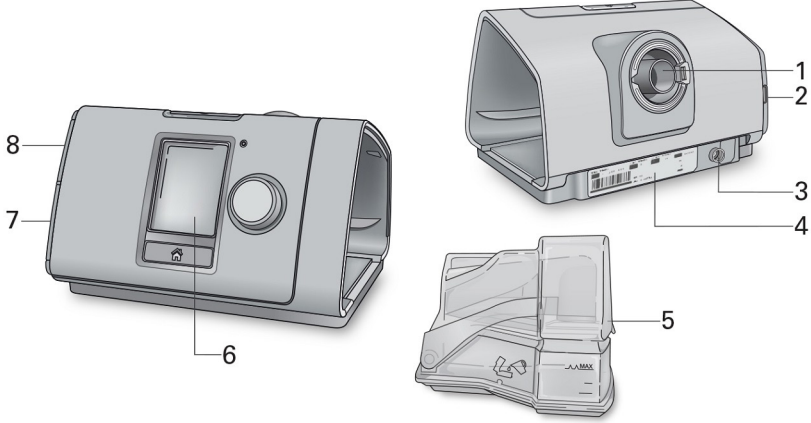

5 HumidAir 5 ہیومیڈیفائر

6 سکرین

7 واٹر ٹین

8 SD کارڈ

1 اینٹر آؤٹ لیٹ

2 اینٹر فلٹر کور

3 پاور انلیٹ

4 سیریل نمبر اور ڈیوائس نمبر

کنٹرول پینل کے بارے میں

اسٹارٹ/اسٹاپ بٹن

ڈانل

ہوم بٹن

تھراپی شروع کرنے/روکنے کے لیے دبائیں۔
پاور سیو موڈ میں داخل ہونے کے لیے تین سیکنڈ تک دبا کر رکھیں۔
مینو کو نیویگیٹ کرنے کے لیے موڑیں اور آپشن کو منتخب کرنے کے لیے دبائیں۔
منتخب کردہ آپشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے موڑیں اور اپنی تبدیلی کو محفوظ کرنے کے لیے دبائیں۔

ہوم اسکرین پر واپس جانے کے لیے دبائیں۔

اسکرین پر مختلف انیکونز مختلف اوقات میں ظاہر ہو سکتے ہیں بشمول:

وائرلیس سگنل کی طاقت (سیز)




ریمپ ٹائم



وائرلیس ٹرانسمیٹر فعال نہیں ہے (گرے)



ریمپ ٹائم آؤ

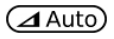

کوئی وائرلیس کنکشن نہیں ہے



نمی



ہوائی جہاز کا موڈ









ہیومیڈیفائر وارمنگ



ہیومیڈیفائر کولنگ



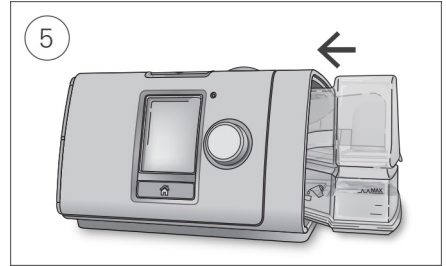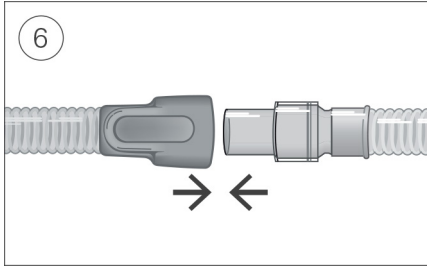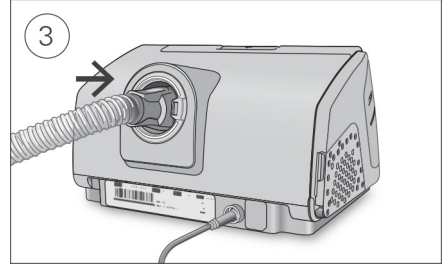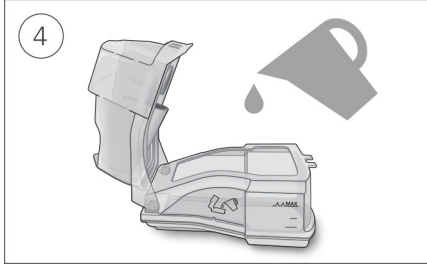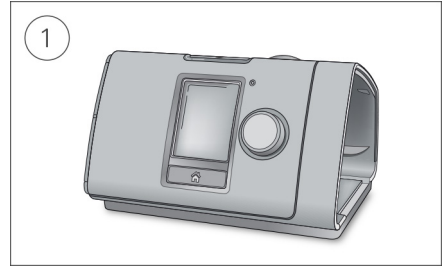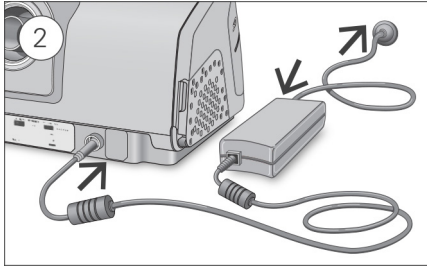

احتیاط ⚠️

ہیومیڈیفائر کو زیادہ نہ بھریں کیونکہ پانی ڈیوائس اور اینر ٹیوبنگ میں داخل ہو سکتا ہے۔

1. ڈیوائس کو مستحکم لیول کی سطح پر رکھیں۔
 2. پاور کنیکٹر کو ڈیوائس کے عقبی حصے میں لگائیں۔ پاور کورڈ کے ایک سرے کو پاور سپلائی یونٹ اور دوسرے سرے کو پاور آؤٹ لیٹ سے جوڑیں۔
 3. ڈیوائس کے عقب میں واقع اینر آؤٹ لیٹ سے اینر ٹیوبنگ مضبوطی سے جوڑیں۔
 4. ہیومیڈیفائر کو کھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کے نشان تک پانی سے بھریں۔
 5. ہیومیڈیفائر کو بند کریں اور اسے ڈیوائس کے پہلو میں داخل کریں۔
 6. اینر ٹیوبنگ کے آزاد سرے کو اسمبل شدہ ماسک پر مضبوطی سے جوڑیں۔
- تفصیلی معلومات کے لیے ماسک کی صارفی گائیڈ دیکھیں۔
تجویز کردہ ماسکس www.resmed.com پر دستیاب ہیں۔

تھراپی شروع کرنا

1. اپنا ماسک لگائیں۔
 2. اگر SmartStart™ فعال ہو تو اسٹارٹ/اسٹاپ دبائیں یا عام طور پر سانس لیں۔
- آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تھراپی آن ہے جب نیند کی رپورٹ اسکرین ظاہر ہوتی ہے۔
- موجودہ علاج کا دباؤ سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے۔
- ریمپ ٹائم کے دوران دباؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور آپ کو ایک گھومتا ہوا دائرہ نظر آنے گا۔ ایک بار تجویز کردہ علاج کے دباؤ تک پہنچنے کے بعد، پورا دائرہ سبز ہو جائے گا۔



مختصر وقت کے بعد اسکرین خود بخود سیاہ ہو جائے گی۔ آپ اسے دوبارہ آن کرنے کے لیے بوم یا ڈائل کو دبا سکتے ہیں۔ اگر تھراپی کے دوران بجلی میں خلل پڑتا ہے، تو بجلی بحال ہونے پر ڈیوائس خود بخود تھراپی دوبارہ شروع کر دے گی۔

AirSense 10 ڈیوائس میں لائٹ سینسر ہے جو کمرے میں روشنی کی بنیاد پر اسکرین کی چمک کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔

تھراپی ختم کرنا

1. اپنا ماسک ہٹا دیں۔
 2. اسٹارٹ/اسٹاپ کو دبائیں یا اگر اسمارٹ اسٹارٹ فعال ہے، تو تھراپی چند سیکنڈ کے بعد خود بخود بند ہو جائے گی۔
- نیند کی رپورٹ اب آپ کو آپ کے تھراپی سیشن کا خلاصہ فراہم کرتی ہے۔
- استعمال کے اوقات۔ یہ پچھلے سیشن میں آپ کو ملنے والے تھراپی کے گھنٹوں کی تعداد بتاتا ہے۔
- ماسک مہر۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ماسک کتنی اچھی طرح سے سیل کیا گیا ہے:



😊 اچھی ماسک مہر۔

☹️ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ماسک فٹ دیکھیں۔

بیومیٹیفائر۔ یہ بتاتا ہے کہ آیا آپ کا بیومیٹیفائر ٹھیک سے کام کر رہا ہے:

😊 بیومیٹیفائر کام کر رہا ہے۔

☹️ بیومیٹیفائر ناقص ہو سکتا ہے، اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

اگر آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ ترتیب دیا گیا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے:

ایونٹس فی گھنٹہ۔ فی گھنٹہ تجربہ ہونے والے ایپنیا اور ہیپوپنیا کی تعداد کی نشاندہی کرتا ہے۔

مزید معلومات۔ مزید تفصیلی استعمال کا ڈیٹا دیکھنے کی خاطر نیچے سکروول کرنے کے لیے ڈائل کو موڑیں۔

پاور سیو موڈ

آپ کی AirSense 10 ڈیوائس آپ کے تھراپی ڈیٹا کو ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کو ڈیٹا منتقل کرنے کی اجازت دینے کے لیے، آپ کو ڈیوائس کو ان پلگ نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم، آپ بجلی بچانے کے لیے اسے پاور سیو موڈ میں ڈال سکتے ہیں۔

پاور سیو موڈ میں داخل ہونے کے لیے:

- تین سیکنڈ کے لیے اسٹارٹ/اسٹاپ کو دبا کر رکھیں۔
- اسکرین سیاہ ہوجاتی ہے۔


پاور سیو موڈ سے نکلنے کے لیے:

- ایک بار اسٹارٹ/اسٹاپ دبائیں۔
- ہوم اسکرین ظاہر ہوتی ہے۔

میرے اختیارات

آپ کی AirSense 10 ڈیوائس آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ آپ کی ضروریات کے لیے ترتیب دی گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تھراپی کو مزید آرام دہ بنانے کے لیے چھوٹی ایڈجسٹمنٹس کرنا چاہتے ہوں۔

اپنی موجودہ ترتیبات کو دیکھنے کے لیے **میرے اختیارات** کو نمایاں کریں اور ڈائل کو دبائیں۔ یہاں سے، آپ اپنے اختیارات کو حسب منشا بنا سکتے ہیں۔

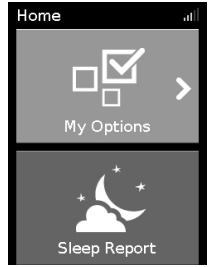

ریمپ ٹائم

تھراپی کے آغاز کو زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ریمپ ٹائم وہ مدت ہے جس کے دوران دباؤ کم آغاز کے دباؤ سے تجویز کردہ علاج کے دباؤ تک بڑھ جاتا ہے۔

آپ اپنا ریمپ ٹائم اف، 5 سے 45 منٹ کے درمیان یا خودکار پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ریمپ ٹائم خودکار پر سیٹ کیا جاتا ہے، تو ڈیوائس اس بات کا پتہ لگائے گی کہ آپ کب سو گئے ہیں اور پھر خود بخود تجویز کردہ علاج کے دباؤ پر بڑھ جائے گی۔

ریمپ ٹائم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے:

1. **میرے اختیارات** میں، **ریمپ ٹائم** کو نمایاں کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور پھر ڈائل کو دبائیں۔

2. ریمپ ٹائم کو اپنی ترجیحی ترتیب میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور تبدیلی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈائل کو دبائیں۔



نمی کی سطح

ہیومیڈیفائر ہوا میں نمی لاتا ہے اور اسے تھراپی کو زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا ناک یا منہ خشک ہو رہا ہے تو نمی کو بڑھا دیں۔ اگر آپ کو اپنے ماسک میں نمی مل رہی ہے تو نمی کو کم کر دیں۔

آپ نمی کی سطح کو اف یا 1 اور 8 کے درمیان سیٹ کر سکتے ہیں، جہاں 1 سب سے کم نمی کی ترتیب ہے اور 8 سب سے زیادہ نمی کی ترتیب ہے۔

نمی کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے:

1. میرے اختیارات میں، نمی کے لیول کو نمایاں کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور پھر ڈائل کو دبائیں۔
2. نمی کے لیول کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور تبدیلی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈائل کو دبائیں۔



اگر آپ کی ناک یا منہ خشک ہی رہتا ہے، یا آپ کے ماسک میں نمی رہتی ہے، تو ClimateLineAir ہیٹیڈ ایئر نلیاں استعمال کرنے پر غور کریں۔ ClimateLineAir کلانیٹ کنٹرول کے ساتھ مل کر زیادہ آرام دہ علاج فراہم کرتی ہے۔

ماسک فٹ

ماسک فٹ کو آپ کے ماسک کے ارد گرد ممکنہ ہوا کے رساو کا اندازہ لگانے اور اس کی نشاندہی کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

ماسک فٹ چیک کرنے کے لیے:

1. ماسک کو فٹ کریں جیسا کہ ماسک صارف گائیڈ میں بیان کیا گیا ہے۔
2. میرے اختیارات میں، ماسک فٹ چلائیں کو نمایاں کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور پھر ڈائل کو دبائیں۔ ڈیوائس میں ہوا نکلنے لگتی ہے۔
3. ماسک، ماسک کشن اور ہیڈ گیئر کو اس وقت تک ایڈجسٹ کریں جب تک کہ آپ کو اچھا نتیجہ نہ ملے۔



ماسک فٹ کو روکنے کے لیے، ڈائل دبائیں یا اسٹارٹ/اسٹاپ کریں۔ اگر آپ اچھی ماسک مہر حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو اپنے نگہداشت فراہم کرنے والے سے بات کریں۔

مزید اختیارات

آپ کی ڈیوائس پر کچھ اور اختیارات ہیں جنہیں آپ حسب منشا بنا سکتے ہیں۔

ماسک یہ آپشن آپ کے ماسک کی قسم کی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ قسم کے ماسک استعمال کرتے ہیں، تو ماسک کے درمیان سوئچ کرتے وقت اس ترتیب کو ایڈجسٹ کریں۔

یہ آپشن آپ کو تھراپی شروع کرنے سے پہلے پانی کو پہلے سے گرم کرنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ تھراپی کے آغاز میں ہوا ٹھنڈی یا خشک نہ ہو۔

ClimateLineAir یا ClimateLineAir اکسی ٹیوب استعمال نہ کرنے پر یہ آپشن آپ کی ٹیوب کی قسم کی ترتیب کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ قسم کی ٹیوب استعمال کرتے ہیں، تو ٹیوبز کے درمیان سوئچ کرتے وقت اس ترتیب کو ایڈجسٹ کریں۔

جب موسمیاتی کنٹرول کو دستی پر سیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ ہیومیڈیفائر نمی کی سطح کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جب موسمیاتی کنٹرول آٹو پر سیٹ ہو جائے گا تو نمی کی سطح خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گی۔

ClimateLineAir یا ClimateLineAir اکسی ٹیوب استعمال کرنے پر یہ آپشن آپ کی ٹیوب کے درجہ حرارت کی ترتیب کو دکھاتا ہے۔

پریشر ریلیف فعال ہونے پر، آپ کو سانس باہر نکالنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کو تھراپی کی عادت ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔

SmartStart فعال ہونے پر، جب آپ اپنے ماسک میں سانس لیتے ہیں تو تھراپی خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنا ماسک ہٹاتے ہیں، تو یہ چند سیکنڈ کے بعد خود بخود رک جاتا ہے۔

پریشر ریلیف*

SmartStart*

* جب آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ فعال کیا جائے۔


آپ کی ڈیوائس کی دیکھ بھال

یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی AirSense 10 ڈیوائس کو باقاعدگی سے صاف کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو بہترین تھراپی مل رہی ہے۔ درج ذیل حصے آپ کی ڈیوائس کو علیحدہ کرنے، صفائی کرنے، چیک کرنے اور دوبارہ جوڑنے میں مدد کریں گے۔

⚠️ انتباہ

زیادہ سے زیادہ تھراپی حاصل کرنے اور آپ کی صحت پر منفی اثر ڈالنے والے جراثیم کی افزائش کو روکنے کے لیے اپنی ڈیوائس اسمبلی، ہیومیڈیفائر اور ماسک کو باقاعدگی سے صاف کریں۔

علیحدہ کرنا

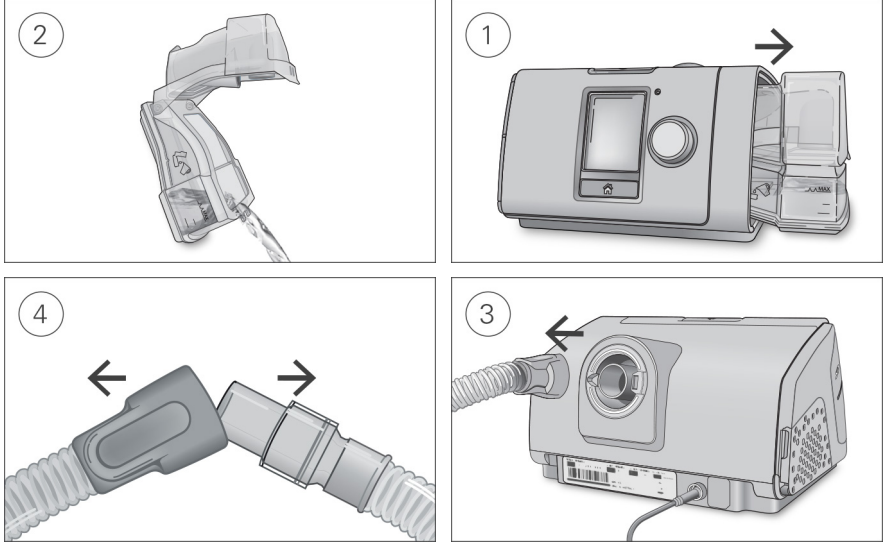

1. ہیومیڈیفائر کو اوپر اور نیچے سے تھامیں، اسے آہستہ سے دبائیں اور اسے ڈیوائس سے دور کھینچیں۔
2. ہیومیڈیفائر کھولیں اور باقی بچے پانی کو ضائع کر دیں۔
3. اینئر ٹیوبنگ کے کف کو تھامیں اور اسے آہستہ سے ڈیوائس سے دور کھینچیں۔
4. اینئر ٹیوبنگ کے کف اور ماسک کے کنڈے دونوں کو پکڑیں، پھر آہستہ سے الگ کریں۔

صفائی

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے آپ کو ہفتہ وار ڈیوائس کو صاف کرنا چاہیے۔ اپنے ماسک کو صاف کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات کے لیے ماسک کی صارفی گائیڈ سے رجوع کریں۔ گھر میں صفائی کے لیے درج ذیل ہدایات ہیں۔ متعدد مریضوں کے دوبارہ استعمال کے لیے بنائی گئی ڈیوائسز کی دوبارہ پروسیسنگ کے لیے ہدایات کلینگل گائیڈ میں مل سکتی ہیں، جو ResMed.com پر دستیاب ہے۔

1. ہلکے صابن کا استعمال کرتے ہوئے ہیومیڈیفائر اور اینئر ٹیوبنگ/Air10 ٹیوبنگ ایلو کو گرم پانی میں دھوئیں۔
2. ہیومیڈیفائر اور اینئر ٹیوبنگ/Air10 ٹیوبنگ ایلو کو اچھی طرح سے دھوئیں اور براہ راست سورج کی روشنی اور/یا گرمی سے خشک ہونے دیں۔
3. ڈیوائس کے بیرونی حصے کو خشک کپڑے سے صاف کریں۔

نوٹس:



- ہیومیڈیفائر کو ڈش واشر میں نازک یا شیشے کے برتن کے چکر پر دھویا جا سکتا ہے (صرف اوپر کی شیلف)۔ اسے 65°C سے زیادہ درجہ حرارت پر نہیں دھونا چاہیے۔
- ڈش واشر یا واشنگ مشین میں اینر ٹیوبنگ/Air10 ٹیوبنگ ایلو کو نہ دھویں۔
- ہیومیڈیفائر کو روزانہ خالی کریں اور اسے صاف، ڈسپوزیبل کپڑے سے اچھی طرح صاف کریں۔ براہ راست سورج کی روشنی اور/یا گرمی سے خشک ہونے دیں۔

چیک کرنا

کسی بھی نقصان کے لیے آپ کو ہیومیڈیفائر، اینر ٹیوبنگ اور اینر فلٹر کو باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیے۔

1. ہیومیڈیفائر چیک کریں:
 - اگر یہ لیک ہو رہا ہو یا پھٹا ہو، گرد آلود ہو یا اس میں گڑھا ہو گیا ہو تو اسے بدل دیں۔
 - اگر مہر ٹوٹ جائے یا پھٹی ہو تو اسے تبدیل کریں۔
 - کسی بھی سفید پاؤڈر کی باقیات کو ایک حصہ گھریلو سرکہ کو 10 حصوں کے پانی میں ملا کر بننے والے محلول کا استعمال کرتے ہوئے ہٹا دیں۔
2. اینر ٹیوبنگ چیک کریں اور اگر کوئی سوراخ، شگاف یا دراڑیں ہیں تو اسے تبدیل کریں۔
3. اینر فلٹر کو چیک کریں اور اسے کم از کم ہر چھ ماہ بعد تبدیل کریں۔ اگر گندگی یا دھول سے کوئی سوراخ یا رکاوٹیں ہیں تو زیادہ کثرت سے تبدیل کریں۔

اینر فلٹر کو تبدیل کرنے کے لیے:

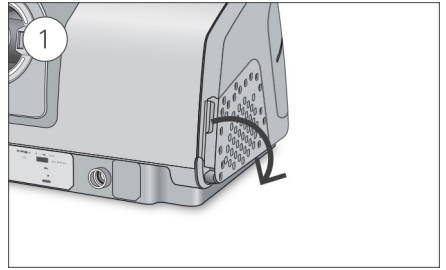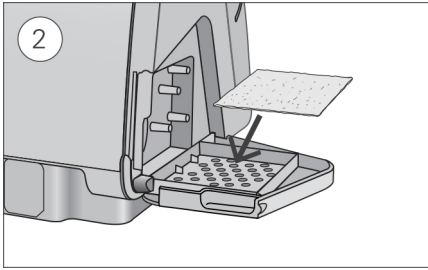

1. اینر فلٹر کو کھولیں اور پرانے اینر فلٹر کو ہٹا دیں۔
2. اینر فلٹر دھونے یا دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔
3. اینر فلٹر کو ہر ایک نیا اینر فلٹر لگائیں اور پھر اسے بند کریں۔
4. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈیوائس میں پانی اور دھول کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اینر فلٹر ہر وقت نصب ہو۔

حصوں کو دوبارہ جوڑنا

- جب ہیومیڈیفائر اور اینر ٹیوبنگ خشک ہو جائیں تو آپ پرزوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔
1. ڈیوائس کے عقب میں واقع اینر آؤٹ لیٹ سے اینر ٹیوبنگ مضبوطی سے جوڑیں۔
 2. ہیومیڈیفائر کو کھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کے نشان تک کمرے کے درجہ حرارت والے پانی سے بھریں۔
 3. ہیومیڈیفائر کو بند کریں اور اسے ڈیوائس کے پہلو میں داخل کریں۔
 4. اینر ٹیوبنگ کے آزاد سرے کو اسمبل شدہ ماسک پر مضبوطی سے جوڑیں۔

تھراپی کا ڈیٹا

آپ کی AirSense 10 ڈیوائس آپ اور آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کے لیے آپ کے تھراپی کا ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر آپ کی تھراپی کو دیکھ اور تبدیلیاں کر سکیں۔ ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کو وائرلیس طور پر منتقل کیا جاتا ہے، اگر کوئی وائرلیس نیٹ ورک دستیاب ہو، یا SD کارڈ کے ذریعے۔

ڈیٹا ٹرانسمیشن

آپ کی AirSense 10 ڈیوائس میں وائرلیس کمیونیکیشن کی صلاحیت ہے تاکہ آپ کے علاج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے علاج کا ڈیٹا آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کو منتقل کیا جا سکے۔ یہ ایک اختیاری خصوصیت ہے جو صرف اس صورت میں دستیاب ہوگی جب آپ اس سے فائدہ اٹھانے کا انتخاب کریں اور اگر وائرلیس نیٹ ورک دستیاب ہو۔ یہ آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کو آپ کی تھراپی کی ترتیبات کو زیادہ بروقت اپ ڈیٹ کرنے یا آپ کی ڈیوائس کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو بہترین ممکنہ علاج میسر ہے۔

ڈیٹا عام طور پر تھراپی بند ہونے کے بعد منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا ڈیٹا منتقل ہو گیا ہے، اپنی ڈیوائس کو ہر وقت میز پاور سے منسلک رہنے دیں اور یقینی بنائیں کہ یہ ہوائی جہاز کے موڈ میں نہیں ہے۔

نوٹس:


- اگر آپ اسے ملک یا خریداری کے علاقے سے باہر استعمال کرتے ہیں تو علاج کا ڈیٹا منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔
- وائرلیس مواصلات نیٹ ورک کی دستیابی پر منحصر ہے۔
- ہو سکتا ہے کہ وائرلیس مواصلات والی ڈیوائسز تمام خطوں میں دستیاب نہ ہوں۔

SD کارڈ

آپ کے علاج کے ڈیٹا کو آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کو منتقل کرنے کا ایک متبادل طریقہ SD کارڈ کے ذریعے ہے۔ آپ کا نگہداشت فراہم کنندہ آپ سے SD کارڈ بذریعہ ڈاک بھیجنے یا اسے لانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جب آپ کے نگہداشت فراہم کنندہ کی طرف سے ہدایت کی جائے تو، SD کارڈ کو ہٹا دیں۔

جب SD لائٹ چمک رہی ہو تو ڈیوائس سے SD کارڈ نہ ہٹائیں، کیونکہ کارڈ پر ڈیٹا لکھا جا رہا ہے۔

SD کارڈ کو ہٹانے کے لیے:

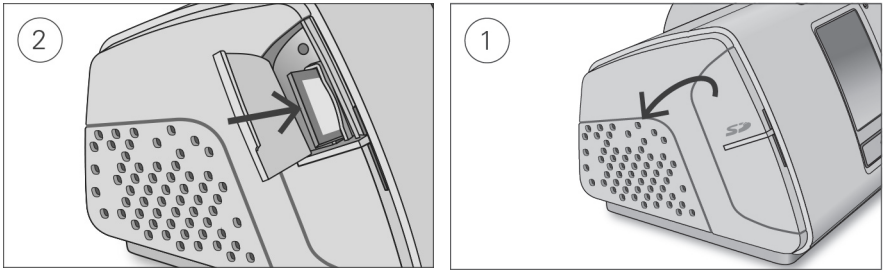

1. SD کارڈ کا کوور کھولیں۔

2. نکالنے کے لیے SD کارڈ کو اندر دبائیں۔ ڈیوائس سے SD کارڈ کو ہٹا دیں۔
SD کارڈ کو حفاظتی فولڈر میں رکھیں اور اسے اپنے نگہداشت فراہم کنندہ کو واپس بھیجیں۔

SD کارڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ کی ڈیوائس کے ساتھ فراہم کردہ SD کارڈ حفاظتی فولڈر سے رجوع کریں۔

نوٹ: SD کارڈ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔

سفر کرنا

آپ جہاں کہیں بھی جائیں اپنی AirSense 10 ڈیوائس اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ بس درج ذیل کو ذہن میں رکھیں:

- ڈیوائس کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے فراہم کردہ ٹریول بیگ کا استعمال کریں۔
- ہیومیڈیفائر کو خالی کریں اور اسے ٹریول بیگ میں الگ سے پیک کریں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جس علاقے میں سفر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس مناسب پاور کورڈ ہے۔ خریداری کے بارے میں معلومات کے لیے، اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- اگر آپ بیرونی بیٹری استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی بیٹری کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہیومیڈیفائر کو بند کر دینا چاہیے۔ **نمی کی سطح** کو آف کر کے ایسا کریں۔

ہوائی جہاز سے سفر کرنا

آپ کی AirSense 10 ڈیوائس کو جہاز میں لے جانے والے سامان کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ طبی آلات آپ کے ساتھ لے جانے والے سامان کی حد میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔


آپ اپنی AirSense 10 ڈیوائس کو ہوائی جہاز میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ ہوائی سفر کے تعین کے خطوط www.resmed.com سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔

ہوائی جہاز پر ڈیوائس استعمال کرتے وقت:

- یقینی بنائیں کہ ہیومیڈیفائر مکمل طور پر خالی ہے اور آپ کی ڈیوائس سے منسلک ہے۔ ہیومیڈیفائر ڈالے بغیر ڈیوائس کام نہیں کرے گی۔
- ہوائی جہاز موڈ آن کریں۔

ہوائی جہاز موڈ آن کرنے کے لیے:

1. میرے اختیارات میں، ہوائی جہاز موڈ کو نمایاں کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور پھر ڈائل کو دبائیں۔
 2. آن کو منتخب کرنے کے لیے ڈائل کو موڑ دیں اور تبدیلی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈائل کو دبائیں۔
- ہوائی جہاز موڈ آنیکن ✈ اسکرین کے بالائی دائیں طرف ظاہر ہوتا ہے۔

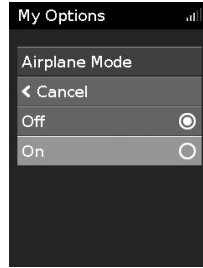

احتیاط

ٹریولرس کے دوران پانی کے سانس میں جانے کے خطرے کی وجہ سے جہاز میں ہیومیڈیفائر میں پانی کے ساتھ ڈیوائس کا استعمال نہ کریں۔

ٹریل شوٹنگ

اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو مندرجہ ذیل ٹریل شوٹنگ کے عنوانات پر ایک نظر ڈالیں۔ اگر آپ مسئلہ حل کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے نگہداشت فراہم کنندہ یا ResMed سے رابطہ کریں۔ ڈیوائس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔

عمومی ٹریل شوٹنگ

مسئلہ/ممکنہ وجہ	حل
میرے ماسک کے ارد گرد سے ہوا نکل رہی ہے	بقینی بنائیں کہ آپ کا ماسک صحیح طریقے سے لگایا گیا ہے۔ فٹنگ کی ہدایات کے لیے اپنی ماسک صارفی گائیڈ کو دیکھیں یا اپنے ماسک کے فٹ اور سیل کو چیک کرنے کے لیے ماسک فٹ فنکشن کا استعمال کریں۔
ہو سکتا ہے ماسک غلط طریقے سے لگایا گیا ہو۔	
میری ناک خشک یا بند ہو رہی ہے	نمی کی سطح بہت کم ہو سکتی ہے۔
نمی کی سطح بہت کم ہو سکتی ہے۔	اگر آپ کے پاس ClimateLineAir ہیٹیڈ اینر ٹیوبنگ ہیں، تو ClimateLineAir صارفی گائیڈ دیکھیں۔
مجھے اپنی ناک پر، ماسک اور اینر ٹیوبنگ میں پانی کی بوندیں مل رہی ہیں	نمی کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
نمی کی سطح بہت زیادہ پر سیٹ ہو سکتی ہے۔	اگر آپ کے پاس ClimateLineAir ہیٹیڈ اینر ٹیوبنگ ہیں، تو ClimateLineAir صارفی گائیڈ دیکھیں۔
میرا منہ بہت خشک اور غیر آرام دہ ہے	نمی کی سطح میں اضافہ کریں۔
ہو سکتا ہے آپ کے منہ کے ذریعے ہوا نکل رہی ہو۔	آپ کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے تھوڑی کا پٹا یا پورے چہرے کے ماسک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
میرے ماسک میں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ لگتا ہے (ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہوا مل رہی ہے)	ریمپ بند ہو سکتا ہے۔
ریمپ بند ہو سکتا ہے۔	ریمپ ٹائم آپشن استعمال کریں۔
میرے ماسک میں ہوا کا دباؤ بہت کم لگتا ہے (ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت مناسب ہوا نہیں مل رہی)	ریمپ پیشرفت میں ہو سکتا ہے۔
ریمپ پیشرفت میں ہو سکتا ہے۔	بوا کا دباؤ بڑھنے کا انتظار کریں یا ریمپ ٹائم آف کر دیں۔
میری سکرین سیاہ ہے	اسکرین پر بیک لائٹ بند ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود بند ہو جاتی ہے۔
پاور منسلک نہیں ہو سکتی ہے۔	پاور سیلائز کو جوڑیں اور بقینی بنائیں کہ پلگ مکمل طور پر داخل ہے۔
میں نے تھراپی بند کر دی ہے، لیکن ڈیوائس اب بھی ہوا پھینک رہی ہے	ڈیوائس ہوا کی ٹیوبنگ میں گاڑھے پن سے بچنے کے لیے تھوڑی مقدار میں ہوا پھینکتی ہے۔ یہ 30 منٹ کے بعد خود بخود بند ہو جائے گی۔

مسئلہ/ممکنہ وجہ	حل
میرا بیومیڈیٹائر لیک ہو رہا ہے ہو سکتا ہے بیومیڈیٹائر صحیح طریقے سے جوڑا نہیں گیا ہو۔ بیومیڈیٹائر نقصان پہنچا یا ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرا تھراپی کا ڈیٹا میرے دیکھ بھال فراہم کنندہ کو نہیں بھیجا گیا ہے وائرلیس کوریج ناقص ہو سکتی ہے۔ بغیر وائرلیس کنکشن کا آئیکن  اسکرین کے بالائی دائیں طرف ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی وائرلیس نیٹ ورک دستیاب نہیں ہے۔ ڈیوائس ہوائی جہاز کے موڈ میں ہو سکتی ہے۔ آپ کی ڈیوائس کے لیے ڈیٹا کی منتقلی فعال نہیں ہے۔ میری اسکرین اور بٹن چمک رہے ہیں سافٹ ویئر آپ گریڈ جاری ہے۔	نقصان کی جانچ کریں اور بیومیڈیٹائر کو صحیح طریقے سے دوبارہ جوڑیں۔ متبادل کے لیے اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈیوائس کو وہیں رکھا گیا ہے جہاں کوریج ہے (یعنی، آپ کے پلنگ کی میز پر، دراز یا فرش پر نہیں)۔ وائرلیس سگنل کی طاقت کا آئیکن  تمام بارز کے ڈسپلے ہونے پر اچھی کوریج کی نشاندہی کرتا ہے، اور جب کم بارز دکھائے جاتے ہیں تو خراب کوریج کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈیوائس کو وہیں رکھا گیا ہے جہاں کوریج ہے (یعنی، آپ کے پلنگ کی میز پر، دراز یا فرش پر نہیں)۔ اگر ایسا کرنے کی ہدایت دی جائے تو، SD کارڈ اپنے نگہداشت فراہم کنندہ کو بھیجیں۔ SD کارڈ میں آپ کے علاج کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز کے موڈ کو بند کریں، جہاز کے ذریعے سفر دیکھیں۔ اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے اپنی ترتیبات کے بارے میں بات کریں۔ سافٹ ویئر آپ گریڈ مکمل ہونے میں تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں۔
ڈیوائس کے پیغامات	حل
ڈیوائس کا پیغام/ممکنہ وجہ ہائی لیک کا پتہ چلا، اپنے پانی کے ٹب، ٹب سیل یا سانیٹ کور کو چیک کریں ہو سکتا ہے بیومیڈیٹائر صحیح طریقے سے داخل نہ ہو۔ ہو سکتا ہے بیومیڈیٹائر سیل صحیح طریقے سے داخل نہ ہو۔ ہائی لیک کا پتہ چلا، اپنی ٹیوبنگ جوڑیں ہو سکتا ہے کہ اینر ٹیوبنگ مناسب طریقے سے منسلک نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ماسک غلط طریقے سے لگایا گیا ہو۔ ٹیوبنگ مسدود ہیں، اپنی ٹیوبنگ چیک کریں اینر ٹیوبنگ چیک کریں اور کسی بھی رکاوٹوں کو دور کریں۔ پیغام کو صاف کرنے کے لیے ڈائل کو دبائیں اور پھر ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسٹارٹ/اسٹاپ کو دبائیں۔	یقینی بنائیں کہ humidifier صحیح طریقے سے داخل کیا گیا ہے۔ بیومیڈیٹائر کو کھولیں اور یقینی بنائیں کہ سیل صحیح طریقے سے داخل کی گئی ہے۔ یقینی بنائیں کہ اینر ٹیوبنگ دونوں سروں پر مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا ماسک صحیح طریقے سے لگایا گیا ہے۔ فٹنگ کی ہدایات کے لیے اپنی ماسک صارفی گائیڈ کو دیکھیں یا اپنے ماسک کے فٹ اور سیل کو چیک کرنے کے لیے ماسک فٹ فنکشن کا استعمال کریں۔

SD کارڈ کی خرابی، اپنا کارڈ ہٹائیں اور تھراپی شروع کرنے کے لیے اسٹارٹ دبائیں

ہو سکتا ہے SD کارڈ صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو۔ SD کارڈ کو ہٹائیں اور دوبارہ داخل کریں۔

صرف پڑھنے کا کارڈ، براہ کرم SD کارڈ کو ہٹائیں، انلاک کریں اور دوبارہ داخل کریں

SD کارڈ سوئچ لاک (صرف پڑھنے کے لیے) پوزیشن میں ہو سکتا SD کارڈ پر سوئچ کو لاک پوزیشن سے  انلاک پوزیشن پر لے جائیں  اور پھر اسے دوبارہ داخل کریں۔

سسٹم کی خرابی، صارفی گائیڈ سے رجوع کریں، نقص 004

ہو سکتا ہے ڈیوائس کو گرم ماحول میں چھوڑ دیا گیا ہو۔

دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے ٹھنڈا ہونے دیں۔ بجلی کی فراہمی منقطع کریں اور پھر ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے دوبارہ جوڑیں۔

اینٹر فلٹر ہلاک ہو سکتا ہے۔ اینٹر فلٹر کو چیک کریں اور اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اسے تبدیل کریں۔ بجلی کی فراہمی منقطع کریں اور پھر ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے دوبارہ جوڑیں۔

اینٹر ٹیوبنگ چیک کریں اور کسی بھی رکاوٹوں کو دور کریں۔ پیغام کو صاف کرنے کے لیے ڈائل کو دبائیں اور پھر ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسٹارٹ/اسٹاپ کو دبائیں۔

اینٹر ٹیوبنگ سے پانی کو خالی کریں۔ بجلی کی فراہمی منقطع کریں اور پھر ڈیوائس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسے دوبارہ جوڑیں۔

اینٹر ٹیوبنگ ہلاک ہو سکتی ہیں۔

اینٹر ٹیوبنگ میں پانی ہو سکتا ہے۔



دیگر تمام نقص کے پیغامات، مثال کے طور پر، سسٹم کی خرابی، صارفی گائیڈ، نقص 0XX سے رجوع کریں

ڈیوائس پر ایک درست نہ ہونے کے قابل خرابی پیش آگئی ہے۔ اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔ ڈیوائس کو نہ کھولیں۔

حصوں کو دوبارہ جوڑنا

آپ کی ڈیوائس کے کچھ حصوں کو آسانی سے اتارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ پرزوں یا ڈیوائس کو پہنچنے والے نقصان سے بچا جا سکے۔ آپ ان کو آسانی سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔



بیومیڈیٹائلر مہر داخل کرنے کے لئے:

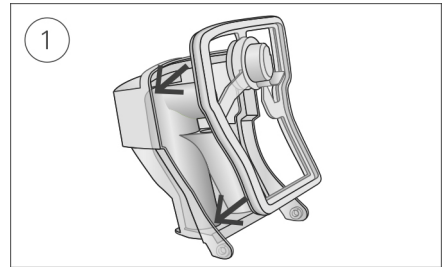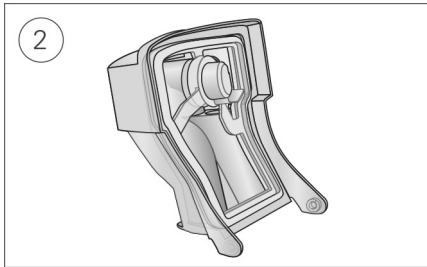

1. مہر کو ڈھکن میں رکھیں۔

2. مہر کو تمام کناروں کے ساتھ نیچے دبائیں جب تک کہ یہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر نہ بیٹھ جائے۔

بیومیڈیفائر کے ڈھکن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے:

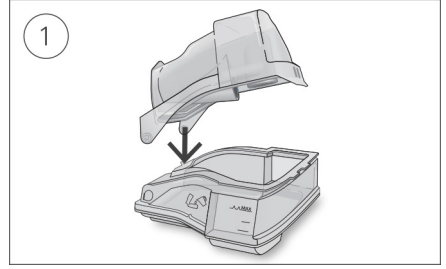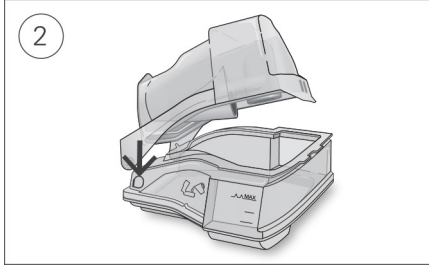

1. ڈھکن کے ایک طرف کو بیس کے محور سوراخ میں داخل کریں۔
2. دوسری طرف کو نیچے کی طرف سلائیڈ کریں جب تک کہ یہ جگہ پر کلک نہ کرے۔

⚠️ انتباہ

- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اینر ٹیوبنگ کا بندوبست کریں تاکہ یہ سر یا گردن کے گرد نہ لپٹ جائے۔
- نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کی علامات کے لیے بجلی کی تاروں، کیبلز اور بجلی کی فراہمی کا باقاعدگی سے معائنہ کریں۔ اگر خراب ہو جائے تو استعمال بند کریں اور تبدیل کریں۔
- بجلی کی تار کو گرم سطحوں سے دور رکھیں۔
- اگر آپ کو ڈیوائس کی کارکردگی میں کوئی غیر واضح تبدیلی نظر آتی ہے، اگر یہ غیر معمولی آوازیں نکال رہی ہے، اگر ڈیوائس یا بجلی کی سپلائی گر گئی ہے یا غلط طریقے سے چلی گئی ہے، یا اگر انکلوژر ٹوٹ گیا ہے، تو استعمال بند کر دیں اور اپنے نگہداشت فراہم کنندہ یا اپنے ResMed سروس سینٹر سے رابطہ کریں۔
- ڈیوائس کو نہ کھولیں نہ ہی اس میں ترمیم کریں۔ اندر کوئی صارف کی جانب سے سروس کیے جانے والے حصے نہیں ہیں۔ مرمت اور سروسنگ صرف ایک مجاز ResMed سروس ایجنٹ کے ذریعہ کی جانی چاہیے۔
- بجلی کے جھٹکے سے ہوشیار رہیں۔ ڈیوائس، پاور سپلائی یا پاور کورڈ کو پانی میں نہ ڈیوائس۔ اگر ڈیوائس کے اندر یا اس پر مانعات پھیل جاتی ہیں، تو ڈیوائس کو ان پلگ کریں اور حصوں کو خشک ہونے دیں۔ ڈیوائس کو صاف کرنے سے پہلے ہمیشہ ان پلگ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے دوبارہ پلگ لگاتے سے پہلے تمام پرزے خشک ہوں۔
- تمباکو نوشی کے دوران یا کھلے شعلے کی موجودگی میں اضافی آکسیجن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
- ہمیشہ یقینی بنائیں کہ آکسیجن کی سپلائی آن ہونے سے پہلے ڈیوائس آن ہے اور ہوا کا بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیوائس کو بند کرنے سے پہلے آکسیجن کی سپلائی کو ہمیشہ بند کر دیں، تاکہ غیر استعمال شدہ آکسیجن ڈیوائس کے انکلوژر میں جمع نہ ہو اور آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو۔
- جب ڈیوائس چل رہی ہو تو مرمت کا کوئی کام نہ کریں۔
- دیگر آلات کے ساتھ متصل یا بہت قریب رکھ کر اس ڈیوائس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر متصل یا بہت قریب رکھ کر استعمال ضروری ہو، تو اس ڈیوائس کو اس کنفیگریشن میں نارمل آپریشن کی تصدیق کرنے کے لیے دیکھا جانا چاہیے جس میں اسے استعمال کیا جائے گا۔
- ڈیوائس کے لیے مخصوص کردہ اشیاء کے علاوہ دیگر لوازمات کا استعمال تجویز نہیں کیا جاتا۔ ان کے نتیجے میں اخراج میں اضافہ ہو سکتا ہے یا ڈیوائس کی مدافعت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
- نمی یا دیگر آلودگیوں کی علامات کے لیے بیکنریل/وائرل فلٹر کو باقاعدگی سے چیک کریں، خاص طور پر نمی کے دوران۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں سانس لینے کے نظام میں مزاحمت بڑھ سکتی ہے۔
- ڈیوائس کو اس کی منظور شدہ آپریٹنگ شرائط کے علاوہ استعمال نہ کریں۔ 2,591m (8500ft) کی اونچائی سے اوپر اور/یا 5°C-35°C کے درجہ حرارت کی حد سے باہر ڈیوائس کا استعمال، علاج کی تاثیر کو کم کر سکتا ہے اور/یا ڈیوائس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

⚠️ احتیاط

- ڈیوائس کے ساتھ صرف ResMed پرزے اور لوازمات استعمال کریں۔ غیر ResMed پرزے علاج کی تاثیر کو کم کر سکتے ہیں اور/یا ڈیوائس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- اس ڈیوائس کے ساتھ صرف ResMed یا تجویز کرنے والے ڈاکٹر کی جانب سے تجویز کردہ وینٹڈ ماسکس استعمال کریں۔ ہوا پھینکنے والی ڈیوائس کے بغیر ماسک کو فٹ کرنے کے نتیجے میں سانس سے خارج ہونے والی ہوا دوبارہ سانس لینے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ماسک میں تازہ ہوا کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے ماسک کے سوراخوں کو صاف اور غیر مسدود رکھا گیا ہے۔

- ہوشیار رہیں کہ ڈیوائس کو ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں اس سے ٹکرایا جا سکتا ہو یا جہاں کسی کے بجلی کی تار سے ٹکرانے کا امکان ہو۔
 - آپریشن کے دوران ڈیوائس کی اینر ٹیوینگ اور/یا اینر انلیٹ کو مسدود کرنے سے ڈیوائس زیادہ گرم ہو سکتی ہے۔
 - ڈیوائس کے ارد گرد کے علاقے کو خشک، صاف اور کسی بھی چیز سے صاف رکھیں (مثلاً، کپڑے یا بستر کی چادریں) جو ہوا کے داخلے کو روک سکتی ہے یا بجلی کی فراہمی کے یونٹ کو ڈھانپ سکتی ہے۔
 - ڈیوائس کو اس کی سائیڈ کی جانب سے مت رکھیں کیونکہ پانی ڈیوائس میں داخل ہو سکتا ہے۔
 - غلط سسٹم سیٹ اپ کے نتیجے میں ماسک پریشر کی غلط ریڈنگ ہو سکتی ہے۔ یقینی بنائیں کہ نظام درست طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔
 - بیومیڈیفائر ٹب میں کوئی اضافی چیزیں استعمال نہ کریں (جیسے خوشبو دار تیل یا پرفیوم)۔ ڈیوائس، پانی کے ٹب یا اینر ٹیوینگ کو صاف کرنے کے لیے بلیچ، کلورین، الکحل، یا خوشبو پر مبنی محلول، مونسچرانژنگ یا اینٹی بیکٹیریل صابن یا خوشبو والے تیل کا استعمال نہ کریں۔ یہ محلول نقصان پہنچا سکتے ہیں یا بیومیڈیفائر کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں اور مصنوعات کی زندگی کو کم کر سکتے ہیں۔ سگریٹ، سگار یا پائپ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ اوزون یا دیگر گیسوں سمیت دھوئیں کی زد میں آنا ڈیوائس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مندرجہ بالا میں سے کسی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو ResMed کی محدود وارنٹی سے پورا نہیں کیا جائے گا۔
 - اگر آپ بیومیڈیفائر استعمال کرتے ہیں، تو ڈیوائس کو ہمیشہ اپنے سر سے نیچے کی سطح پر رکھیں تاکہ ماسک اور اینر ٹیوینگ کو پانی سے بھرنے سے روکا جا سکے۔
 - پانی کو ٹھنڈا ہونے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بیومیڈیفائر چھونے پر زیادہ گرم نہ ہو بیومیڈیفائر کو استعمال سے پہلے دس منٹ ٹھنڈا ہونے دیں۔
 - ڈیوائس کو منتقل کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیومیڈیفائر خالی ہے۔
- اس ڈیوائس کے سلسلے میں پیش آنے والے کسی بھی سنگین واقعات کے لیے، ان کی اطلاع ResMed اور آپ کے ملک میں مجاز اتھارٹی کو دی جانی چاہیے۔

تکنیکی وضاحتیں

اکائیوں کا اظہار cmH₂O اور hPa میں ہوتا ہے۔ 1 cmH₂O برابر ہے 0.98 hPa۔

90W پاور سپلائی یونٹ

AC ان پٹ رینج:

II کلاس II 1.5A-1.0 60Hz-50، 240V-100
115V، 1.5A، 400Hz II (ہوائی جہاز کے استعمال کے لیے
برائے نام)

24V = 3.75A

53W (57VA)

104W (108VA)

DC آؤٹ پٹ:

عام بجلی کی کھپت:

سب سے زیادہ بجلی کی کھپت:

ماحولیاتی حالات

آپریٹنگ درجہ حرارت:

+5°C سے +35°C

نوٹ: اس تھراپی ڈیوائس کے ذریعہ تیار کردہ سانس لینے کے لئے
ہوا کا ہواؤ کمرے کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ انتہائی
محیطی درجہ حرارت کے حالات (40°C) میں ڈیوائس محفوظ
رہتی ہے۔

10 سے 95% متعلقہ نمی، غیر گاڑھا ہونا

سطح سمندر سے 8,500' (2,591 m): ہوا کے دباؤ کی حد

1013 hPa سے 738 hPa

-20°C سے +60°C

5 سے 95% متعلقہ نمی، غیر گاڑھا ہونا

اسٹوریج اور نقل و حمل کا درجہ حرارت:

اسٹوریج اور نقل و حمل کی نمی:

برقی مقناطیسی مطابقت

IEC 60601-1-2:2014 کے لیے AirSense 10 رہائشی، تجارتی اور ہلکی صنعت کے ماحول کے لیے
کے مطابق تمام قابل اطلاق برقی مقناطیسی مطابقت کی ضروریات (EMC) کی تعمیل کرتی ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ موبائل
مواصلاتی ڈیوائسز کو ڈیوائس سے کم از کم 1 میٹر دور رکھا جائے۔

اس ResMed ڈیوائس کے برقی مقناطیسی اخراج اور استثنائی سے متعلق معلومات www.resmed.com/downloads/devices
پر مل سکتی ہیں۔

درجہ بندی: EN 60601-1:2006/A1:2013

کلاس II (ڈبل موصلیت)، قسم BF، اندراج تحفظ IP22۔

سینسر

پریشر سینسر:

اندرونی طور پر ڈیوائس آؤٹ لیٹ پر واقع ہے، اینالاگ گیج پریشر
کی قسم، 0 سے 40 cmH₂O (0 سے 40 hPa)

اندرونی طور پر ڈیوائس انلیٹ پر واقع ہے، ڈیجیٹل ماس فلو کی
قسم، -70 سے +180 mL/منٹ

ہواؤ کا سینسر:

زیادہ سے زیادہ واحد غلطی مستحکم دباؤ

ایک ہی خرابی کی موجودگی میں ڈیوائس بند ہو جائے گی اگر مستحکم اسٹیٹ دباؤ سے زیادہ ہو جائے:
30 cmH₂O (30 hPa) 6 سیکنڈ سے زیادہ یا 1 40 cmH₂O (40 hPa) 40 سیکنڈ سے زیادہ کے لیے۔

آواز

ISO 4871:1996 کے مطابق دوبارے نمبر کے شور کے اخراج کی قدروں کا اعلان

ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق پیمائش کردہ سلم لائن/اسٹینڈرڈ اینر ٹیوننگ اور سائیڈ کور کے ساتھ ڈیوائس:

25 dBA کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ

33 dBA کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ

ISO 80601-2-74:2021 اور ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق پیمائش کردہ سلم لائن/اسٹینڈرڈ اینر ٹیوننگ اور بیومیٹیفیکیشن کے ساتھ
ڈیوائس:

27 dBA کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ

35 dBA کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ

صوتی دباؤ کی سطح

آواز کی طاقت کی سطح

جسمانی - آلہ اور بیومیٹیفیکیشن

116 mm x 255 mm x 150 mm

22 mm

طول و عرض (H x W x D):

اینر آؤٹ لیٹ (ISO 5356-1:2015) کی تعمیل کرتا ہے:

وزن (ڈیوائس اور قابل صفائی ہیومیڈیفائر):

مکمل جسمانی بناوٹ:

پانی کی گنجائش:

صاف کرنے کے قابل ہیومیڈیفائر - مٹیریل:

ہیومیڈیفائر ٹب کے ہر ریفل کے درمیان وقت:

1248 گرام

شعلے کی روک تھام کی انجینئرنگ تھرمو پلاسٹک

زیادہ سے زیادہ فل لائن 380 ملی لیٹر تک

انجکشن مولڈ پلاسٹک، سٹینلیس سٹیل اور سلیکون مہر

کم سے کم 8 گھنٹے ± 0.5 (23°C ± 2 °C) پر تجربہ کیا گیا

درجہ حرارت

زیادہ سے زیادہ ہیٹر پلیٹ:

کٹ آؤٹ:

گیس کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت:

68°C

74°C

$\leq 41^\circ\text{C}$

اینر فلٹر

معیاری:

مواد: پالیسٹر غیر بننے ہوئے فائبر

اوسط اریسٹس: <75% جب EN779 پر ٹیسٹ کیا گیا۔

مواد: پولی پروپیلین کیرنر میں ملاوٹ شدہ مصنوعی ریشے

کارکردگی: <80% (اوسط) جب EN13274-7 پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

نوٹ: ResMed سے منظور شدہ ہائپوآلرجنک فلٹر کے استعمال کے

نتیجے میں ہائی لیکس پر ڈیلیور شدہ پریشر کی درستگی میں تھوڑی

سی کمی واقع ہوگی۔

ہوائی جہاز کا استعمال

ResMed تصدیق کرتا ہے کہ ڈیوائس ہوائی سفر کے تمام مراحل کے لیے فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کے تقاضوں

(RTCA/DO-160، سیکشن 21، زمرہ M) کو پورا کرتا ہے۔

وائرلیس ماڈیول

استعمال شدہ ٹیکنالوجی:

4G+ 3G+ 2G

یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپریشن کے دوران ڈیوائس جسم سے کم از کم 2 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھی جائے۔ ماسکس، ٹیوب یا لوازمات

پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی تمام علاقوں میں دستیاب نہ ہو۔

CE

مطابقت کا اعلان (ریڈیو آلات کی ہدایت کے لیے DoC)

ResMed اعلان کرتا ہے کہ AirSense 10 ڈیوائس (ماڈل 370xx یا 371xx) ڈائریکٹو 371xx/53/2014 EU (RED) کے درکار اہم تقاضوں اور دیگر

متعلقہ دفعات کے مطابق ہے۔ ڈیکلریشن آف کنفارمیٹی (DoC) کی ایک کاپی ResMed.com/productsupport پر مل سکتی ہے۔

2G ریڈیو آلہ درج ذیل فریکوئنسی بینڈز اور زیادہ سے زیادہ ریڈیو فریکوئنسی پاور کے ساتھ کام کرتا ہے:

35dBm: GSM 850/900

32dBm: GSM 1800/1900

4G ڈیوائس کو تمام یورپی ممالک میں بغیر کسی پابندی کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

تمام ResMed ڈیوائسز کو میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن کے تحت طبی آلات کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ پروٹیکٹ اور پرنٹ شدہ مواد

کی کوئی بھی لیبلائنگ جس میں 0123 CE دکھایا گیا ہو، میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن 2017/745 (EU) سے متعلق ہے۔

آپریٹنگ پریشر کی حد

:AutoSet, AutoSet For Her, CPAP

4 سے 20 cmH₂O (4 سے 20 hPa)


اضافی آکسیجن

زیادہ سے زیادہ بہاؤ:

4 L/min

نیومیٹک بہاؤ کا راستہ

1. بہاؤ کا سینسر
2. بلور
3. پریشر سینسر
4. ماسک
5. اینر ٹیوبنگ
6. ہیومیڈیفائر
7. ڈیوائس
8. انلیٹ فلٹر

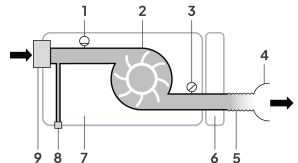

ڈیزائن کی لائف

ڈیوائس، پاور سپلائی یونٹ:

5 سال

صاف کرنے کے قابل ہیومیڈیفائر:

2.5 سال

اینر ٹیوبنگ:

6 ماہ

عمومی

مریض ایک مطلوبہ آپریٹر ہے۔

ہیومیڈیفائر کی کارکردگی

سالم لائن / معیاری ٹیوبنگ

ماسک پریشر cmH ₂ O (hPa)	برائے نام RH آؤٹ پٹ % 17°C محیطی درجہ حرارت پر	برائے نام RH آؤٹ پٹ % 22°C محیطی درجہ حرارت پر	برائے نام سسٹم آؤٹ پٹ mg/L AH ¹ , BTPS ²
ترتیب 4 (پہلے سے طے شدہ ترتیب)	ترتیب 8 (زیادہ سے زیادہ ترتیب)	ترتیب 4 (پہلے سے طے شدہ ترتیب)	ترتیب 8 ³ (زیادہ سے زیادہ ترتیب)
4	85	100	>10
10	85	100	>10
20	85	90	>10

موسمیاتی کنٹرول آؤٹ - ClimateLineAir

ماسک پریشر cmH ₂ O (hPa)	برائے نام RH آؤٹ پٹ % 22°C محیطی درجہ حرارت پر	برائے نام سسٹم آؤٹ پٹ mg/L AH ¹ , BTPS ²
4	85	>10
10	85	>10
20	85	>10

¹ mg/L - AH میں مطلق نمی

² BTPS - جسمانی درجہ حرارت کا دباؤ سیجورینٹ

³ ہیومیڈیفائر کی کارکردگی ISO 80601-2-74:2021 کارکردگی پر پورا اترتی ہے <10 mg/L BTPS 15°C سے 35°C پر ٹیسٹ کیا گیا

اینر ٹیوبنگ

اینر ٹیوبنگ	مواد	لمبائی	اندرونی قطر
ClimateLineAir	لچکدار پلاسٹک اور برقی اجزاء	2 m	15 mm
ClimateLineAir آکسی	لچکدار پلاسٹک اور برقی اجزاء	1.9 m	19 mm
SlimLine	لچکدار پلاسٹک	1.8 m	15 mm
معیاری	لچکدار پلاسٹک	2 m	19 mm

گرم اینر ٹیوبنگ کا درجہ حرارت کٹ آؤٹ: ≤ 41°C

نوٹس:

- میٹوفیکچرر بغیر اطلاع کے ان وضاحتوں کو تبدیل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- گرم اینر ٹیوبنگ کا الیکٹرک کنیکٹر اینڈ صرف ڈیوائس کے آخر میں اینر آؤٹ لیٹ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور اسے ماسک پر نہیں لگایا جانا چاہیے۔
- بجلی سے چلنے والی یا اینٹی سٹیٹک اینر ٹیوبنگ استعمال نہ کریں۔
- دکھانے والے درجہ حرارت اور نسبتاً نمی کی ترتیبات ناپی گئی قدریں نہیں ہیں۔

ڈسپلے شدہ قدریں

قدر	رینج	ڈسپلے ریزولوشن
اینر آؤٹ لیٹ پر پریشر سینسر:		
ماسک کا دباؤ	4–20 cmH ₂ O (4–20 hPa)	0.1 cmH ₂ O (0.1 hPa)
بہاؤ کی اخذ کردہ اقدار:		
لیک	0–120 L/min	1 L/min

درستگی

دباؤ کی پیمائش¹:

$$\pm 0.5 \text{ cmH}_2\text{O} (0.5 \text{ hPa}) + \text{ماپی گئی قدر کا } 4\%$$

ماسک کا دباؤ²

بہاؤ اور بہاؤ کی اخذ کردہ قدریں¹:

±6 L/min یا ریڈنگ کا 10%، جو بھی زیادہ ہو، 0 سے 150 L/min مثبت بہاؤ پر

بہاؤ

¹ نتائج کا اظہار بطور STPD (معیاری درجہ حرارت اور دباؤ، خشک)۔ STPD دباؤ کی ترتیب کو BTPS (جسمانی درجہ حرارت اور دباؤ، سیچوریشن) دباؤ میں تبدیل کرنے کے لیے درج ذیل ٹیبل کا استعمال کریں۔

² لیکن کی موجودگی، اضافی آکسیجن، سمندری حجم کے > 100 mL یا منٹ وینٹیلیشن > 3 L/min ہونے پر درستگی کم ہو سکتی ہے۔

³ EN ISO 10651-6:2009 کے مطابق بوم کینز وینٹیلیٹری سپورٹ ٹیوانسنز (شکل 101 اور ٹیبل 101) کے لیے برائے نام ResMed ماسک وینٹ فلو کا استعمال کرتے ہوئے پیمائش کی درستگی کی تصدیق کی گئی۔

STPD سے BTPS کی تبدیلی

اونچائی (m)	محیطی دباؤ (hPa)	STPD سے BTPS کی تبدیلی کا عنصر
0	1013.25	1.12
500	956.53	1.19
1000	902.41	1.27
1500	850.80	1.36
2000	801.60	1.45
2500	754.73	1.54
3000	710.11	1.65

دباؤ کی درستگی - CPAP موڈ

ISO 80601-2-70:2020 اور ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق 10 cmH₂O (10 hPa) پر زیادہ سے زیادہ جامد دباؤ کی تبدیلی

±0.5 cmH₂O (±0.5 hPa)

HumidAir ٹب / سائیڈ کور اور اینر ٹیوبنگ والی ٹیوانسن:

ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق زیادہ سے زیادہ متحرک دباؤ کی تبدیلی

HumidAir ٹب / سائیڈ کور اور اینر ٹیوبنگ والی ٹیوانسن:

سانس کی شرح

20 BPM

15 BPM

10 BPM

0.8

0.5

0.5

متحرک دباؤ کی تبدیلی (cmH₂O [hPa])

ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق زیادہ سے زیادہ متحرک دباؤ کی تبدیلی

بیومیٹیفائر ٹب / سائیڈ کور اور اینر ٹیوبنگ والی ٹیوانسن:

سیٹ پریشر سے زیادہ سے زیادہ نقص (cmH₂O [hPa]): ±1

نوٹ: پیمائش کے نظام کی غیر یقینی صورتحال کے ٹیبل سے متعلقہ پیمائش کی غیر یقینی صورتحال کا حوالہ دیں۔

پیمائش کے نظام کی غیر یقینی صورتحال

ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق مینوفیکچرر کے ٹیسٹ کے آلات کی پیمائش کی غیر یقینی صورتحال یہ ہیں:

± 3.9 L/min

دباؤ کی پیمائش کے لیے:

± 5 mL یا 6% ریڈنگ (جو بھی زیادہ ہو)

حجم کی پیمائش کے لیے (<100 mL):

± 20 mL یا 3% ریڈنگ (جو بھی زیادہ ہو)

حجم کی پیمائش کے لیے (≥100 mL):

± 0.15 cmH₂O (hPa)

جامد/متحرک دباؤ کے اقدامات کے لیے:

± 10 ms

وقت کی پیمائش کے لیے:

ISO 80601-2-74:2021 کے مطابق مینوفیکچرر کے ٹیسٹ آلات کی پیمائش کی غیر یقینی صورتحال یہ ہیں:

± 0.5 mg/L BTPS

بیومیٹیفیکیشن اوٹ پٹ کے اقدامات کے لئے

مقررہ دباؤ پر دباؤ (زیادہ سے زیادہ)

درج ذیل کو ISO 80601-2-70:2020 کے مطابق ملایا جاتا ہے:

دباؤ	AirSense 10 اور معیاری	AirSense 10 بیومیٹیفیکیشن اور معیاری	AirSense 10 SlimLine اور	AirSense 10 ClimateLineAir اور
cmH ₂ O (hPa)	L/min	L/min	L/min	L/min
4	180	143	162	151
8	168	135	151	142
12	157	136	140	135
16	144	134	128	121
20	131	123	117	109

دباؤ کے خلاف مزاحمت

ٹیبل اینر ٹیوبنگ کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کی وضاحت کرتا ہے:

ایئر ٹیوبنگ	بہاؤ پر 20 cmH ₂ O (L/min) کے دباؤ کے ساتھ	بہاؤ کے خلاف مزاحمت (cmH ₂ O/L/min)	ایئر ٹیوبنگ
معیاری	30	0.006	0.005
	15	0.005	0.004
SlimLine	30	0.008	0.007
	15	0.006	0.006
ClimateLineAir	30	-	0.011
	15	-	0.008
ClimateLineAir کسی	30	-	0.004
	15	-	0.002

تعمیل

ٹیبل ایئر ٹیوبنگ کی تعمیل کی وضاحت کرتا ہے:

ایئر ٹیوبنگ	تعمیل 60 cmH ₂ O (cmH ₂ O/L/min) کے دباؤ کے ساتھ	ایئر ٹیوبنگ
معیاری	1.074	1.056
SlimLine	0.467	0.454
ClimateLineAir	-	0.482
ClimateLineAir کسی	-	0.729

علامتیں

مندرجہ ذیل علامتیں پروڈکٹ یا پیکجنگ پر ظاہر ہو سکتی ہیں۔



استعمال سے پہلے ہدایات پڑھیں۔ ایک انتباہ یا احتیاط کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ استعمال سے پہلے ہدایات کی پیروی کریں۔

تیار کنندہ۔ یورپین مجاز نمائندہ۔ بیچ کوڈ۔ کیٹلاگ نمبر۔ سیریل نمبر۔ ڈیوائس نمبر۔

نمبر۔ ان / افد۔ ڈیوائس کا وزن۔ IP22 مخصوص رخ بندی سے 15 ڈگری تک جھکنے پر انگلیوں کے سائز کی اشیاء اور

ٹپکنے والے پانی سے محفوظ۔ براہ راست کرنٹ۔ کی اطلاق شدہ پرزے کی قسم۔ کلاس II کا سامان۔

نمی کی حد۔ درجہ حرارت کی حد۔ غیر آئنائزنگ تابکاری۔ چین کا آلودگی کنٹرول لوگو 1۔ چین کا آلودگی

کنٹرول لوگو 2۔ صرف نسخہ جاتی (امریکہ میں، وفاقی قانون ان آلات کو ڈاکٹر کے ذریعہ یا اس کے حکم پر فروخت

کرنے کی پابندی لگاتا ہے)۔ پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح۔ صرف ڈسٹل واٹر استعمال کریں۔ آپریٹنگ

اونچائی۔ ماحول کے دباؤ کی حد۔ سیگشن 21، زمہ M کی تعمیل کرتا ہے۔ تیاری کی تاریخ۔

الارم روکنا۔ طبی ڈیوائس۔ منفرد ڈیوائس شناخت کنندہ

درآمد کنندہ۔ طبی ڈیوائس۔ منفرد ڈیوائس شناخت کنندہ

سونس کا مجاز نمائندہ۔ سونس کا مجاز نمائندہ۔

ResMed.com/symbols پر علامتوں کی لغت دیکھیں۔



ماحولیاتی معلومات

اس ڈیوائس کو الگ سے ٹھکانے لگانا چاہیے، نہ کہ غیر ترتیب شدہ میونسپل فضلہ کے طور پر۔ اپنی ڈیوائس کو ٹھکانے لگانے کے لیے، آپ کو اپنے علاقے میں دستیاب مناسب کلیکشن، دوبارہ استعمال اور ری سائیکلنگ کے نظام کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان کلیکشن، دوبارہ استعمال کرنے اور ری سائیکلنگ کے نظام کا استعمال قدرتی وسائل پر دباؤ کو کم کرنے اور ماحول کو نقصان پہنچانے والے خطرناک مادوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

اگر آپ کو ان ڈسپوزل سسٹمز کے بارے میں معلومات درکار ہوں، تو براہ کرم اپنی مقامی فضلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ کراسڈ بن کی علامت آپ کو ان ڈسپوزل سسٹمز کو استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے ResMed ڈیوائس کی کلیکشن اور تلف کاری کے بارے میں معلومات درکار ہیں، تو براہ کرم اپنے ResMed آفس، مقامی ڈسٹری بیوٹر سے رابطہ کریں یا [ResMed.com/environment](https://www.resmed.com/environment) پر جائیں۔

سروسنگ

10 AirSense ڈیوائس کا مقصد محفوظ اور قابل بھروسہ آپریشن فراہم کرنا ہے جب ResMed کی فراہم کردہ ہدایات کے مطابق چلایا جائے۔ ResMed تجویز کرتا ہے کہ 10 AirSense ڈیوائس کا معائنہ کیا جائے اور ایک مجاز ResMed سروس سینٹر کے ذریعے سروس کی جائے اگر ڈیوائس کے فنکشن کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ یا پریشانی کی کوئی علامت ہو۔ دوسری صورت میں، پروڈکشن کی خدمت اور معائنہ کی عام طور پر ان کے ڈیزائن کی زندگی کے دوران ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔

محدود وارنٹی

ResMed Pty Ltd (اس کے بعد 'ResMed') اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کی ResMed پروڈکٹ نیچے دی گئی مدت کے لیے خریداری کی تاریخ سے مواد اور کاریگری میں نقصان سے پاک ہوگی۔

وارنٹی مدت

پروڈکٹ

90 دن	ماسک سسٹمز (بشمول ماسک فریم، کشن، ہیڈ گیئر اور ٹیوبنگ) — ایک بار کے استعمال کی
	ڈیوائسز کو چھوڑ کر
	لوازمات—ایک بار کے استعمال کی ڈیوائسز کو چھوڑ کر
	فلیکس قسم کی انگلی کی نبض کے سینسر
	بیومیڈیفائر معیاری پانی کے ٹب
6 ماہ	ResMed اندرونی اور بیرونی بیٹری سسٹمز میں استعمال کے لیے بیٹریاں
1 سال	کاپ قسم کی انگلی کی نبض کے سینسر
	CPAP اور ہائے لیول ڈیوائس ڈیٹا ماڈیولز
	آکسی میٹر اور CPAP اور ہائے لیول ڈیوائس آکسی میٹر اڈاپٹر
	بیومیڈیفائرز اور بیومیڈیفائر قابل صفائی پانی کے ٹبز
	ٹائٹریشن کنٹرول ڈیوائسز
2 سال	CPAP، ہائے لیول، اور وینٹیلیشن ڈیوائسز (بشمول بیرونی پاور سپلائی یونٹس)
	بیٹری کے لوازمات
	پورٹ ایبل تشخیصی/اسکریننگ ڈیوائسز

یہ وارنٹی صرف ابتدائی صارف کے لیے دستیاب ہے۔ یہ قابل منتقلی نہیں ہے۔

وارنٹی مدت کے دوران، اگر پروڈکٹ عام استعمال کے حالات میں ناکام ہو جاتی ہے، تو ResMed اپنے اختیار پر، خراب پروڈکٹ یا اس کے کسی بھی اجزاء کی مرمت یا بدل دے گا۔

یہ محدود وارنٹی ذیل کا احاطہ نہیں کرتی: (a) پروڈکٹ کے نامناسب استعمال، غلط استعمال، ترمیم یا تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والا کوئی نقصان؛ (b) کسی بھی سروس آرگنائزیشن کے ذریعے کی جانے والی مرمت جس کو ایسی مرمت کرنے کے لیے ResMed کے ذریعے واضح طور پر اختیار نہیں دیا گیا ہے؛ (c) سگریٹ، پائپ، سگار یا دیگر دھوئیں کی وجہ سے کوئی نقصان یا آلودگی؛ (d) آوزون، فعال آکسیجن یا دیگر گیسوں کی وجہ سے ہونے والا کوئی نقصان؛ اور (e) کسی الیکٹرانک ڈیوائس پر یا اس میں پانی گرنے سے ہونے والا کوئی نقصان۔

اصل خریداری کے علاقے سے باہر فروخت یا دوبارہ فروخت ہونے والی پروڈکٹ پر وارنٹی کالعدم ہے۔ یورپی یونین ("EU") یا یورپی فری ٹریڈ ایسوسی ایشن ("EFTA") کے کسی ملک میں خریدی گئی پروڈکٹ کے لیے، "علاقہ" کا مطلب EU اور EFTA ہے۔

ناقص پروڈکٹ پر وارنٹی کے دعوے ابتدائی صارف کی طرف سے خریداری کے موقع پر کیے جائے چاہئیں۔

یہ وارنٹی دیگر تمام ظاہر شدہ یا مضمر وارنٹیوں کی جگہ لے لیتی ہے، بشمول کسی خاص مقصد کے لیے تجارتی قابلیت یا فٹنس کی کوئی مضمر وارنٹی۔ کچھ علاقے یا ریاستیں اس بات کی حدود کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ ایک مضمر وارنٹی کتنی دیر تک چلتی ہے، اس لیے اوپر کی پابندی آپ پر لاگو نہیں ہو سکتی۔

ResMed کسی بھی حادثاتی یا نتیجہ خیز نقصانات کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی ResMed پروڈکٹ کی فروخت، تنصیب یا استعمال کے نتیجے میں ہوا ہے۔ کچھ علاقے یا ریاستیں حادثاتی یا نتیجہ خیز نقصانات کو خارج کرنے یا محدود کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اوپر کی پابندی آپ پر لاگو نہیں ہو سکتی۔

یہ وارنٹی آپ کو مخصوص قانونی حقوق دیتی ہے، اور آپ کو دوسرے حقوق بھی حاصل ہو سکتے ہیں جو خطے سے دوسرے علاقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے وارنٹی حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اپنے مقامی ResMed ڈیلر یا ResMed آفس سے رابطہ کریں۔

ResMed کی محدود وارنٹی کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے ResMed.com ملاحظہ کریں۔

مزید معلومات

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا ڈیوائس کو استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں اضافی معلومات درکار ہیں، تو اپنے نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔



ResMed Pty Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia



دنیا بھر میں ResMed کے دیگر مقامات کے لیے ResMed.com دیکھیں۔ Air10، AirSense، AutoSet، ClimateLineAir، SlimLine، HumidAir اور SmartStart ٹریڈ مارکس اور/یا ResMed فیملی آف کمپنیز کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں۔ پینٹ اور دیگر دانشورانہ املاک کی معلومات کے لیے، ResMed.com/ip دیکھیں
2026-07 3781143/1 © 2026 ResMed۔ ٹریڈ مارک ہے۔ SD-3C، LLC SD Logo



3781143

CE 0123

ResMed.com