

ResMed

AirFit™ P10

Nasal pillows mask


Maski AirFit P10 paigaldamisjuhend




- Hoidke sõõrmemaski nina juures, veendudes, et sõõrmepeadakeste suuruse indikaator paikneb alumises servas ning te näete vasakul (L) ja paremal (R) suunamärgist.



- Venitage alumine rihm üle pea.
- Ülemine rihm peab jääma mugavalt teie pealaele.

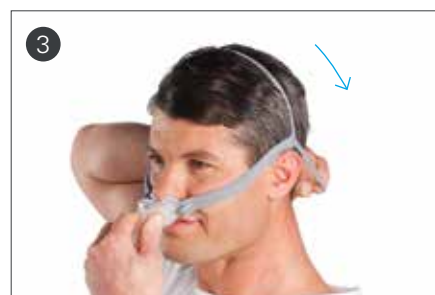

- Tõmmake pearihm üle pea, hoides alumist rihma paigal.

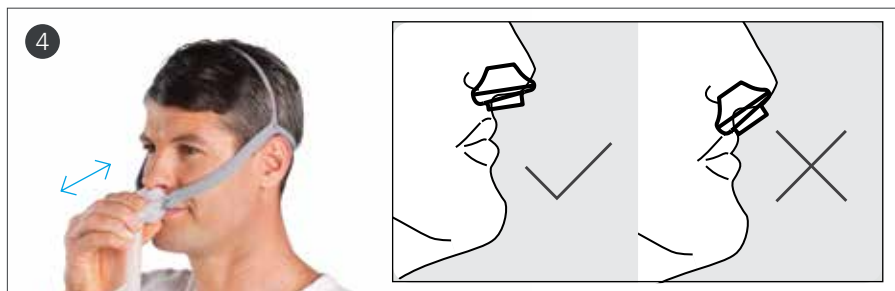

- Tõmmake mask näost eemale ja asetage uuesti tagasi.
- Veenduge, et sõõrmepeadjad paiknevad kindlalt ninasõõrmetes ja mõlemad sõõrmepeadakesed asetsevad sirgelt.



- Lõpuks ühendage maski voolikuots oma seadme õhuvoolikuga ja lülitage seade sisse.
- Teie mask on nüüd kasutusvalmis.



- Pearihma mugavamaks sobitamiseks reguleerige lihtsalt ülemist ja alumist rihma. Pearihma järele andmiseks tõmmake neid laiali ja pearihma pingutamiseks tõmmake rihmasid rohkem kokku.

Märkus: Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt AirFit P10 kasutusjuhendist.

1 ResMedi kliiniline uuring FECS3. ResMedi andmed (rõhk, leke, keskmine kasutusae päevas, AHI) on kogitud 21 osalejaga valimi alusel.

2 ResMedi kliiniline uuring FECS3. 90% osalejatest paigaldas maski mugavalt vähem kui 30 sekundiga.


3 Deklareeritud kahenumbriksed müraväärtused (3 dBA täpsusega) kooskõlas ISO 4871 standardiga.

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive,
Bella Vista, NSW 2153 Austraalia

EDASIMÜÜJA
ECTREP ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue,
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RW
Ühendkuningriigid

AirFit, QuickFit, QuietAir ja Swift on ettevõtte ResMed Ltd kaubamärgid. Swift on registreeritud Ameerika Ühendriikide patente ja kaubamärke ametis. Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
© 2013 ResMed Ltd. 1016924/3 2014-03

CE
0123

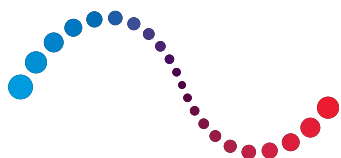

ResMed

AirFit™ P10

Nasal pillows mask



reddot award 2014
winner



AirFit P10...vaiksem mask, mis sobib teie patsientidele

ResMedi sõõrmemask AirFit™ P10 on üks ResMedi AirFit-tooteseeria maskidest, mis on sobiva suurusega teie patsientidele. See on meie vaiksem mask, mis pakub sõõrmemaski Swift™ FX usaldusväarsust ja toimivust disainis ja mask, mis on 50% vaiksem ning umbes 50% kergem.

Vaiksem

Võrkpunutisega ventiil QuietAir on sosinvaikne (helivaljus 21,4 dBA³), segades patsienti ja tema partnerit minimaalselt.

Kergem

Meeldivamaks magamiseks on välja töötatud mask mis on 50% kergem kui meie kõige populaarsem sõõrmemask.

Lihtne paigaldus

Elastne pearihm QuickFit kohandub iga patsiendi peaga automaatselt. Selle saab paigaldada vähem kui 30 sekundiga.²

Rohkem kui 40 minutit kauem magada ...

Hiljutises ResMedi kliinilises uuringus¹, milles osales 21 praegust CPAP-maski kasutajat Austraalias, leidsime, et võrreldes sõõrmemaski Swift FX kasutajatega said maski AirFit P10 kasutajad öösel keskmiselt 40 minutit kauem magada.

Lisateabe saamiseks uuringu kohta vt: ResMed.com/AirFitP10
Whitepaper 'Assessment of a new nasal pillows mask in patients receiving CPAP'.



Maski AirFit P10 omadused ja eelised

Vetruvad, painduvad

padjakesed, mis võimaldavad erisuunalist liikumist, tagades tihenduse.

Topeltseina funktsiooniga

sõõrmpadjakesed võimaldavad ninaseinaga tiheda kontakti. Õhuvool jaguneb ühtlaselt ninasõõrmetesse. Saadaval on erineva suurusega sõõrmpadjad.

Kolmeosaline lihtsus

Mask AirFit P10 koosneb ainult kolmest osast, tagades kiire ja lihtsa kokkupaneku.

Kerge integreeritud


elastne voolik venib ja paindub, tagades stabiilsuse erinevates magamisasendites.

Võrkpunistisega õhu äravoolu ventiil

QuietAir suunab väljuvat õhku sujuvalt, nii et patsient ja tema partner peaaegu ei märkagi seda. AirFit P10 on ResMedi vaikseim mask, kõigest 21,4 dBA² helivaljusega.

Automaatselt reguleeritav

pearihm QuickFit on konstrueeritud kahepunktilise jõu- ja vektorkontrolliga, nii et kummipael stabiliseerib maski sujuvalt ja tõmbab padjakesed oma kohtadele. Saadaval standardsuuruses ja väiksemas suuruses maskiga AirFit™ P10 for Her.

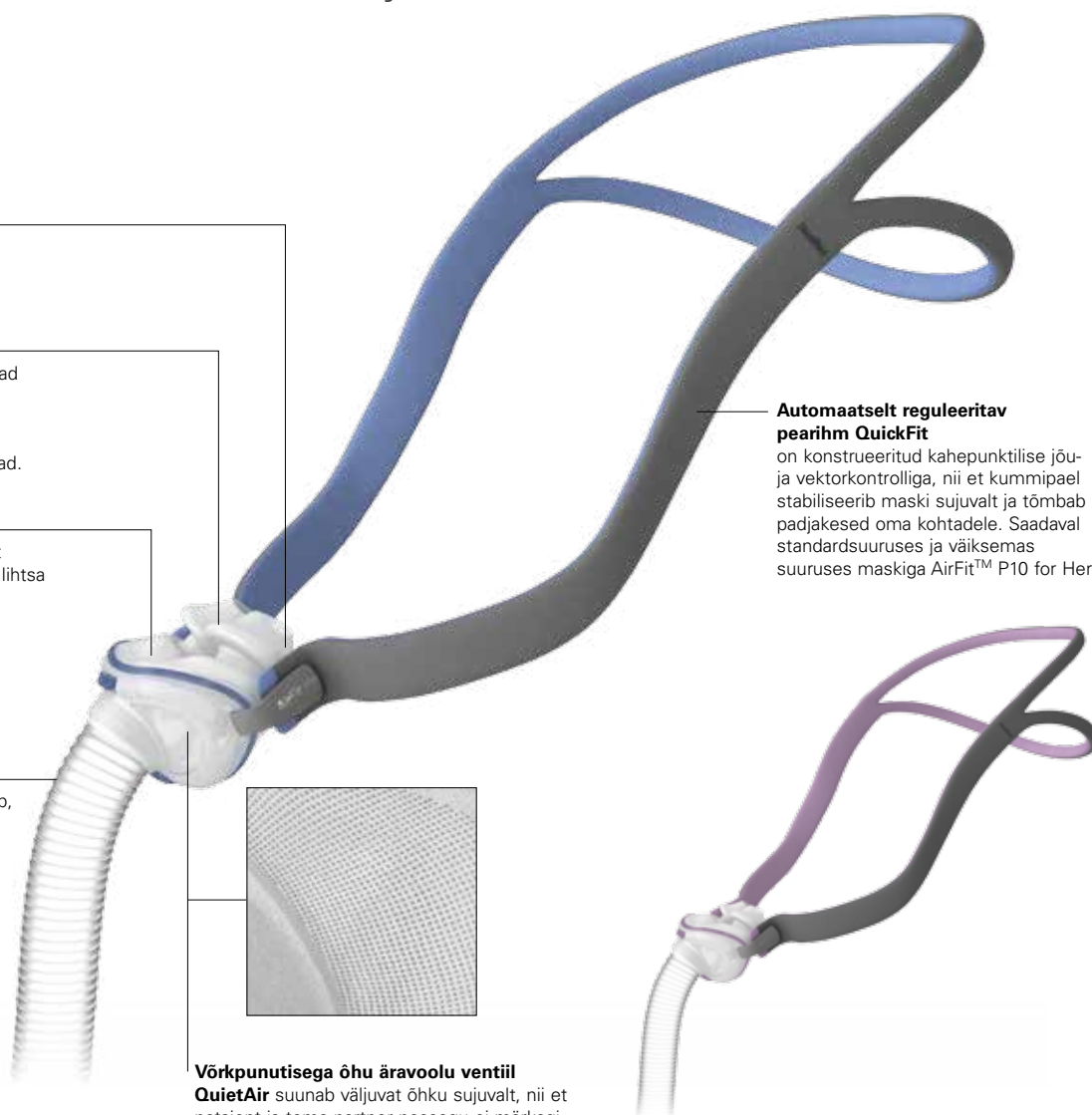

Maski AirFit P10 komponentidekaart




AirFit P10
paralleelsete rihmadega
peamask


62935

AirFit P10 for Her
paralleelsete rihmadega
peamask

62936 (väiksem suurus)

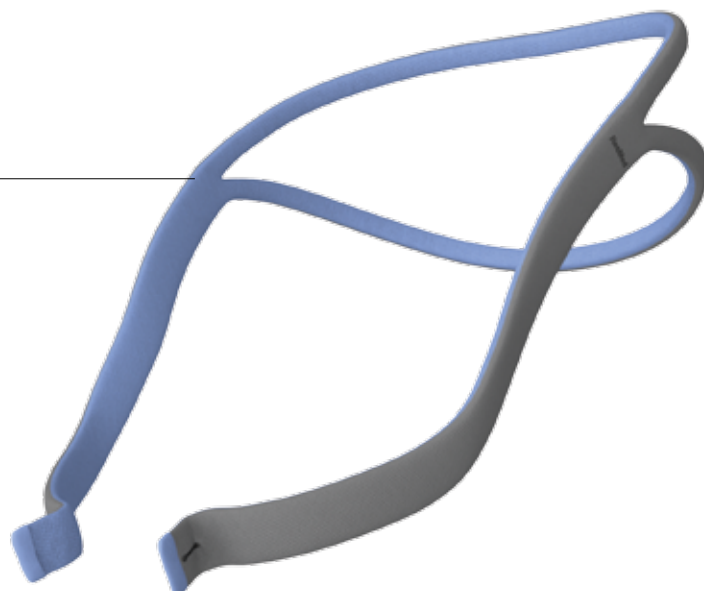

Ainult korpus
62938

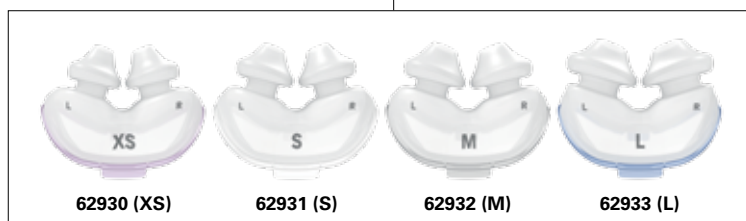

62930 (XS)

62931 (S)

62932 (M)

62933 (L)

Söõrmpadjakesed

XS Väga väike
S Väike
M Keskmine
L Suur

Tootekoodid

	Euroopa 1	Euroopa 2	Euroopa 3
AirFit P10 – täielik süsteem*	62901	62902	62903
AirFit P10 for Her – täielik süsteem**	62911	62912	62913

Euroopa 1: inglise (ÜK), prantsuse, saksa ja itaalia keeles (Šveits)

Euroopa 2: inglise, taani, soome, eesti, norra ja rootsi keeles

Euroopa 3: inglise, tšehhi, hollandi (Belgia), prantsuse (Belgia), saksa (Belgia), kreeka, ungari, itaalia, poola, LMSXS portugali, vene, slovaki, hispaania ja türgi keeles

Märkus. Üksikasjalikku teavet vt AirFit P10 kasutusjuhendist.

* S, M ja L suuruses padjakesed on maskiga kaasas.

** XS, S ja M suuruses padjakesed on maskiga kaasas.

AirFit™ P10

Nasal pillows mask