

# Leiðbeiningar um sótthreinsun

Aðeins til klínískrar notkunar


Þessar leiðbeiningar eiga við þegar margir sjúklingar nota AirFit F30 heilgrímur í svefnrannsóknnum, á læknaostofum eða sjúkrahúsum. Frekari upplýsingar um notkun grímunnar hjá stökum notendum í heimahúsum er að finna í notendahandbókinni í leiðbeiningum um hreinsun. Þessar leiðbeiningar lýsa ráðlögðum og samþykktum verklagsreglum ResMed fyrir hreinsun og sótthreinsun grímunnar í samræmi við ISO 17664.

| Íhlutur AirFit F30 grímu <sup>1</sup> | Hreinsun - Alconox                                      |   | Hreinsun - Neodisher MediClean forte   | Samþykktur lotufjöldi <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
|                                       | Sótthreinsun með hita - handþvottur<br>90 °C í 1 mínútu | Sótthreinsun með hita - handþvottur<br>93 °C í 10 mínútur | Sótthreinsun með hita -<br>þvotta-/sótthreinsunartæki<br>90–93 °C í 5–10 mínútur |                                    |
| • Púði                                | ✓   | –   | ✓  | 30                                 |
| • Hefðbundinn stútur                  | ✓   | –   | ✓  | 30                                 |
| • QuietAir stútur <sup>3</sup>        | –   | –   | –  | –                                  |
| • Umgjörð                             | ✓   | –   | ✓  | 30                                 |
| • Höfuðbúnaður                        | –   | ✓   | ✓  | 30                                 |

<sup>1</sup>Þessi gríma er hugsanlega ekki fánleg í öllum löndum. Ítarlegar leiðbeiningar um rétta notkun á grímunni er að finna í sérstakri notendahandbók. Hægt er að nálgast lista yfir tiltæka íhluti fyrir hvert grímukerfi fyrir sig í leiðarvísi vörunnar á ResMed.com.

<sup>2</sup>Ef heilbrigðisstofnun gerir kröfur um aukasótthreinsunarlotu eftir endursamsetningu grímunnar verður að fækka samþykktum lotufjölda um helming.

<sup>3</sup>Skiptið um þessa íhluti milli sjúklinga.

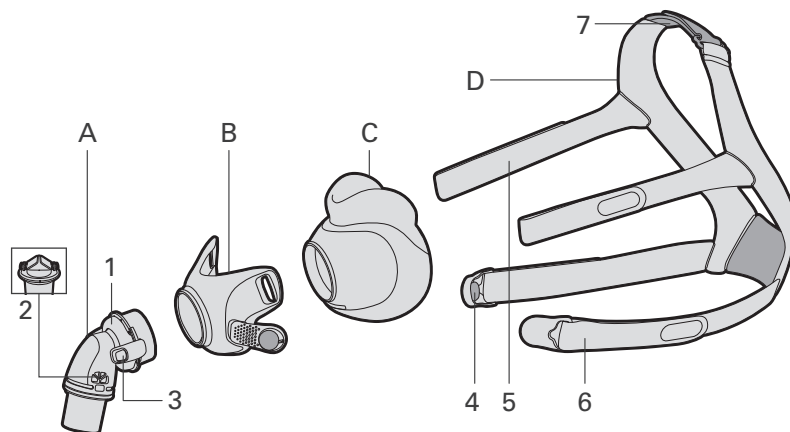

- A Stútur
- B Umgjörð
- C Púði
- D Höfuðbúnaður
- 1 Loftop
- 2 Kófnunarvarnarloki
- 3 Hnappar á hliðum
- 4 Smellur með seglum
- 5 Efri ól á höfuðbúnaði
- 6 Neðri ól á höfuðbúnaði
- 7 Efsta ól á höfuðbúnaði

# Aðferð við sótthreinsun með hita

|                                       |  |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|--------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------|----------|---|----------------|--------------------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|---|--------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------|----------|---|-----------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------|----------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------|--|
| 1. Sundurhlutun                       | Takið grímuna í sundur eins og lýst er í notendahandbókinni.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 2. Hreinsun                           | <p><b>Púði / umgjörð / höfuðbúnaður / hefðbundinn stútur (handþvottur):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skolið umgjörðina og hefðbundna stútin undir rennandi vatni<sup>1</sup> með eftirfarandi hætti. <table border="1" data-bbox="432 261 1178 321"> <tr> <td>• Umgjörð</td> <td>20–25 °C</td> <td>Skulun í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Hefðbundinn stútur</td> <td>15–25 °C</td> <td>Skulun í 1 mínútu.</td> </tr> </table> </li> <li>Látið íhluti grímunnar liggja í bleyti eins og lýst er hér á eftir. Gætið þess að engar loftbólur myndist. <table border="1" data-bbox="432 354 1766 475"> <tr> <td>• Púði</td> <td>1–2% Alconox-lausn</td> <td>20–25 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Umgjörð</td> <td>1–2% Alconox-lausn</td> <td>35–40 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 5 mínútur til viðbótar.</td> </tr> <tr> <td>• Höfuðbúnaður</td> <td>1–2% Alconox-lausn</td> <td>20–30 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 3 mínútur.</td> </tr> <tr> <td>• Hefðbundinn stútur</td> <td>1,5–2% Alconox-lausn</td> <td>40–50 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 3 mínútur til viðbótar.</td> </tr> </table> </li> <li>Þegar fyrrgreindum tíma er lokið skal hafa íhlutina áfram í bleyti í lausninni og þrifa þá að innan og utan með mjúkum bursta eins og lýst er hér á eftir. Gætið sérstaklega að rifum og opum. <table border="1" data-bbox="432 508 1268 630"> <tr> <td>• Púði</td> <td>Hreinsun í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Umgjörð</td> <td>Hreinsun í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Höfuðbúnaður</td> <td>Hreinsun í 2 mínútur. Kreistið síðan til að fjarlægja allt vatn.</td> </tr> <tr> <td>• Hefðbundinn stútur</td> <td>Hreinsun í 1 mínútu.</td> </tr> </table> </li> <li>Skolið íhlutina í vatni<sup>1</sup> með eftirfarandi hætti. <table border="1" data-bbox="432 662 1734 751"> <tr> <td>• Púði</td> <td>5 lítrar</td> <td>13–18 °C</td> <td>Hristið kröftuglega í 1 mínútu og endurtakið í eitt skipti.</td> </tr> <tr> <td>• Umgjörð</td> <td>5 lítrar</td> <td>15–20 °C</td> <td>Hristið kröftuglega í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Hefðbundinn stútur</td> <td>5 lítrar</td> <td>15–25 °C</td> <td>Hristið kröftuglega í 1 mínútu.</td> </tr> </table> </li> <li>Skolið af íhlutunum undir rennandi vatni<sup>1</sup> með eftirfarandi hætti. <table border="1" data-bbox="432 784 1463 873"> <tr> <td>• Umgjörð</td> <td>20–25 °C</td> <td>Skulun í 1 mínútu.</td> </tr> <tr> <td>• Höfuðbúnaður</td> <td>20–25 °C</td> <td>Kreistið endurtekið í 90 sekúndur.</td> </tr> <tr> <td>• Hefðbundinn stútur</td> <td>15–25 °C</td> <td>Skulun í 1 mínútu. Hristið á eftir til að fjarlægja allt vatn.</td> </tr> </table> </li> </ol> <p><b>Hefðbundinn stútur (úthljóðsbað):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hreinsið og skolið íhlutinn undir rennandi vatni með mjúkum bursta<sup>1</sup> við 20–30 °C í 1 mínútu. Gætið sérstaklega að öllum rifum og opum og snúið hreyfanlegum hlutum.</li> <li>Fyllið úthljóðshreinsitæki upp að 2/3 hlutum með 1% Alconox-lausn við 20–30 °C og látið íhlutinn liggja í hljóðbaðinu í 20 mínútur. Gætið þess að íhluturinn sé alveg ofan í lausninni. Notið körfu/bakka til að koma í veg fyrir að íhluturinn snerti vegg tækisins.</li> <li>Skolið af íhlutnum með því að hrista hann kröftuglega í 5 lítrum af vatni<sup>1</sup> við 20–30 °C í 1 mínútu. Endurtakið einu sinni.</li> </ol> | • Umgjörð  | 20–25 °C  | Skulun í 1 mínútu.       | • Hefðbundinn stútur | 15–25 °C | Skulun í 1 mínútu.         | • Púði | 1–2% Alconox-lausn | 20–25 °C | Lagt í bleyti í 1 mínútu. | • Umgjörð | 1–2% Alconox-lausn | 35–40 °C | Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 5 mínútur til viðbótar. | • Höfuðbúnaður | 1–2% Alconox-lausn | 20–30 °C | Lagt í bleyti í 3 mínútur. | • Hefðbundinn stútur | 1,5–2% Alconox-lausn | 40–50 °C | Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 3 mínútur til viðbótar. | • Púði | Hreinsun í 1 mínútu. | • Umgjörð | Hreinsun í 1 mínútu. | • Höfuðbúnaður | Hreinsun í 2 mínútur. Kreistið síðan til að fjarlægja allt vatn. | • Hefðbundinn stútur | Hreinsun í 1 mínútu. | • Púði | 5 lítrar | 13–18 °C | Hristið kröftuglega í 1 mínútu og endurtakið í eitt skipti. | • Umgjörð | 5 lítrar | 15–20 °C | Hristið kröftuglega í 1 mínútu. | • Hefðbundinn stútur | 5 lítrar | 15–25 °C | Hristið kröftuglega í 1 mínútu. | • Umgjörð | 20–25 °C | Skulun í 1 mínútu. | • Höfuðbúnaður | 20–25 °C | Kreistið endurtekið í 90 sekúndur. | • Hefðbundinn stútur | 15–25 °C | Skulun í 1 mínútu. Hristið á eftir til að fjarlægja allt vatn. |
| • Umgjörð                             | 20–25 °C   | Skulun í 1 mínútu.   |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Hefðbundinn stútur                  | 15–25 °C   | Skulun í 1 mínútu.   |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Púði                                | 1–2% Alconox-lausn   | 20–25 °C   | Lagt í bleyti í 1 mínútu.   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Umgjörð                             | 1–2% Alconox-lausn   | 35–40 °C   | Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 5 mínútur til viðbótar. |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Höfuðbúnaður                        | 1–2% Alconox-lausn   | 20–30 °C   | Lagt í bleyti í 3 mínútur.  |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Hefðbundinn stútur                  | 1,5–2% Alconox-lausn   | 40–50 °C   | Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 3 mínútur til viðbótar. |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Púði                                | Hreinsun í 1 mínútu.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Umgjörð                             | Hreinsun í 1 mínútu.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Höfuðbúnaður                        | Hreinsun í 2 mínútur. Kreistið síðan til að fjarlægja allt vatn.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Hefðbundinn stútur                  | Hreinsun í 1 mínútu.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Púði                                | 5 lítrar   | 13–18 °C   | Hristið kröftuglega í 1 mínútu og endurtakið í eitt skipti.                         |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Umgjörð                             | 5 lítrar   | 15–20 °C   | Hristið kröftuglega í 1 mínútu.   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Hefðbundinn stútur                  | 5 lítrar   | 15–25 °C   | Hristið kröftuglega í 1 mínútu.   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Umgjörð                             | 20–25 °C   | Skulun í 1 mínútu.   |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Höfuðbúnaður                        | 20–25 °C   | Kreistið endurtekið í 90 sekúndur.                             |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Hefðbundinn stútur                  | 15–25 °C   | Skulun í 1 mínútu. Hristið á eftir til að fjarlægja allt vatn. |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 3. Skoðun og þurrkun                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Skotið sjónrænt hvort íhlutimir séu hreindir og hreinsið þá á ný ef þess þarf.<sup>2</sup></li> <li>Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.</li> <li>Látið íhluti grímunnar þorna fjarri beinu sólarljósi.<sup>3</sup></li> </ol>  |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 4. Sótthreinsun og þurrkun            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Látið íhluti grímunnar liggja í heitu vatnsbaði<sup>1</sup> og notið eftirfarandi samsetningar á hitastigi og tíma: Gætið þess að engar loftbólur myndist. <table border="1" data-bbox="432 1149 1192 1209"> <tr> <td>• Púði / umgjörð / hefðbundinn stútur</td> <td>90 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 1 mínútu</td> </tr> <tr> <td>• Höfuðbúnaður</td> <td>93 °C</td> <td>Lagt í bleyti í 10 mínútur</td> </tr> </table> </li> <li>Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.</li> <li>Látið íhluti grímunnar þorna fjarri beinu sólarljósi.</li> </ol>   | • Púði / umgjörð / hefðbundinn stútur                          | 90 °C   | Lagt í bleyti í 1 mínútu | • Höfuðbúnaður       | 93 °C    | Lagt í bleyti í 10 mínútur |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Púði / umgjörð / hefðbundinn stútur | 90 °C  | Lagt í bleyti í 1 mínútu                                       |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| • Höfuðbúnaður                        | 93 °C  | Lagt í bleyti í 10 mínútur                                     |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 5. Skoðun                             | Skotið sjónrænt hvern einasta íhlut grímunnar. Þegar augljósar skemmdir eru á einhverjum íhlut grímunnar (sprungur, rifur, svörfun o.s.frv.) skal farga og skipta um íhlut grímunnar sem um ræðir. Smávægileg mislitun getur orðið á íhlutum úr sílíkóni og slíkt er ásætlanlegt.  |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 6. Samsetning                         | Setjið grímuna saman eins og lýst er í notendahandbókinni.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |
| 7. Þökkun og geymsla                  | Geymið á þurrum ryklausum stað, fjarri beinu sólarljósi. <b>Geymsluhitastig:</b> -20 °C til 60 °C.   |  |   |                          |                      |          |                            |        |                    |          |                           |           |                    |          |   |                |                    |          |                            |                      |                      |          |   |        |                      |           |                      |                |  |                      |                      |        |          |          |   |           |          |          |                                 |                      |          |          |                                 |           |          |                    |                |          |                                    |                      |          |  |

<sup>1</sup> Notið drykkjarhæft vatn við öll þrif, alla skulun og alla sótthreinsun.

<sup>2</sup> Séu íhlutir grímunnar ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum er hugsanlegt að sótthreinsunin verði ekki fullnægjandi.

<sup>3</sup> Þurrkun er ekki áskilin ef sótthreinsun með hita á sér stað strax í kjölfarið.

## Aðferð við sótthreinsun með hita - þvottavéla- og sótthreinsibúnaður

| <b>1. Sundurhlutun</b>                                  | Takið grímuna í sundur eins og lýst er í notendahandbókinni.  |               |  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
|---|---|---------------|--|---------------|-------------|------------|---|------|---|---------|----|-------|--|-------------|---|-------|---------------------------------|------------|---|-------|---|-----------------------|------|-------|---|
| <b>2. Þvottavéla- og sótthreinsibúnaður<sup>1</sup></b> | <p>1. Leggið íhluti grímunnar í 5 lítra skolunarbað með köldu kranavatni<sup>1</sup> í 1 mínútu. Gangið úr skugga um að engar loftbólur myndist á íhlutunum.</p> <p>2. Skolið íhlutina undir köldu, rennandi kranavatni<sup>1</sup> í 30 sekúndur.</p> <p>3. Komið íhlutunum fyrir í þvottavéla- og sótthreinsibúnaði sem uppfyllir ISO 15883 staðalinn.</p> <p>4. Stillið þvottavéla- og sótthreinsibúnaðinn á eftirfarandi hátt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasi/stig</th> <th>Hringrásartími (í mínútum)</th> <th>Hitastig (°C)</th> <th>Hreinsiefni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forþvottur</td> <td>4</td> <td>Kalt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Þvottur</td> <td>10</td> <td>43–60</td> <td>2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher MediClean forte</td> </tr> <tr> <td>Hlutleysing</td> <td>6</td> <td>43–60</td> <td>1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z</td> </tr> <tr> <td>Lokaskolun</td> <td>3</td> <td>43–60</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sótthreinsun með hita</td> <td>5–10</td> <td>90–93</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Fasi/stig     | Hringrásartími (í mínútum)                   | Hitastig (°C) | Hreinsiefni | Forþvottur | 4 | Kalt | - | Þvottur | 10 | 43–60 | 2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher MediClean forte | Hlutleysing | 6 | 43–60 | 1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z | Lokaskolun | 3 | 43–60 | - | Sótthreinsun með hita | 5–10 | 90–93 | - |
| Fasi/stig   | Hringrásartími (í mínútum)  | Hitastig (°C) | Hreinsiefni                                  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| Forþvottur  | 4   | Kalt          | -  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| Þvottur   | 10  | 43–60         | 2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher MediClean forte |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| Hlutleysing   | 6   | 43–60         | 1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z              |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| Lokaskolun  | 3   | 43–60         | -  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| Sótthreinsun með hita                                   | 5–10  | 90–93         | -  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| <b>3. Skoðun / þurrkun</b>                              | <p>1. Skoðið og endurtakið 2. hluta [þvottavéla- og sótthreinsibúnaður] ef þörf krefur. Eða þar til hægt er að staðfesta sjónrænt að íhlutirnir séu hreinir.<sup>2</sup></p> <p>2. Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.</p> <p>3. Látið íhlutina þorna fjarri beinu sólarljósi.</p>   |               |  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| <b>4. Skoðun</b>  | Skoðið sjónrænt hvern einasta íhlut grímunnar. Þegar augljósar skemmdir eru á einhverjum íhlut grímunnar (sprungur, rifur, svörfun o.s.frv.) skal farga og skipta um íhlut grímunnar sem um ræðir. Smávægileg mislitun getur orðið á íhlutum úr sílíkóni og slíkt er ásættanlegt.   |               |  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| <b>5. Samsetning</b>                                    | Setjið grímuna saman eins og lýst er í notendahandbókinni.  |               |  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |
| <b>6. Þökkun og geymsla</b>                             | Geymið á þurrum ryklausum stað, fjarri beinu sólarljósi. <b>Geymsluhitastig:</b> -20 °C til 60 °C.  |               |  |               |             |            |   |      |   |         |    |       |  |             |   |       |                                 |            |   |       |   |                       |      |       |   |

<sup>1</sup> Notið drykkjarhæft vatn við alla hreinsun, skolun og sótthreinsun. Fylgja skal gildandi kröfum um vatnsgæði fyrir endurvinnslu á lækningatækjum, ef gildandi reglur kveða á um slíkt.

<sup>2</sup> Séu íhlutir grímunnar ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum er hugsanlegt að sótthreinsunin verði ekki fullnægjandi.



## ALMENNAR VIÐVARANIR OG VARÚÐARREGLUR

- ResMed getur ekki veitt neina tryggingu fyrir því að hvers kyns frávik frá aðferðunum í þessum leiðbeiningum (t.d. ef farið er yfir fjölda vinnslulota) hafi ásættanleg áhrif á afköst eða öryggi vörunnar.
- Ekki má sæfa íhluti grímunnar með gufu eða etýlenoxíði.
- Fylgið ávallt leiðbeiningum framleiðandans við notkun á hreinsiefnum eða sótthreinsiefnum. Þessar leiðbeiningar hafa forgang ef ósamræmi kemur upp.
- Notið ekki straujárn á höfuðbúnaðinn þar sem hann þolir ekki hita og mun því skemmast.