

# Руководство по дезинфекции

Только для клинического применения


Данное руководство предназначено для многократного использования ротовой маски AirFit F30 несколькими пациентами в сомнологической лаборатории, клинике или больнице. При использовании маски одним пациентом в домашних условиях см. инструкции по очистке в руководстве пользователя. В данном руководстве описаны рекомендованные и утвержденные компанией ResMed процедуры очистки и дезинфекции маски в соответствии с ISO 17664.

| Компонент маски AirFit F30 <sup>1</sup>  | Очистка — Alconox  |  | Очистка — Neodisher MediClean forte  | Разрешенное количество циклов <sup>2</sup> |
|--|--|--|--|--|
|  | Тепловая дезинфекция — вручную<br>90 °C в течение 1 минуты | Тепловая дезинфекция — вручную<br>93 °C в течение 10 минут | Тепловая дезинфекция — моечно-дезинфицирующее устройство (WD)<br>90–93 °C в течение 5–10 минут |  |
| • Прослойка                              | ✓  | –  | ✓  | 30   |
| • Стандартный патрубок                   | ✓  | –  | ✓  | 30   |
| • Угловой патрубок QuietAir <sup>3</sup> | –  | –  | –  | –  |
| • Корпус                                 | ✓  | –  | ✓  | 30   |
| • Головное крепление                     | –  | ✓  | ✓  | 30   |

<sup>1</sup> В некоторых регионах данная маска может быть недоступна. Для получения полной информации о надлежащем использовании данной маски см. конкретное руководство пользователя. Полный перечень запасных частей для каждой системы маски доступен на сайте ResMed.com в руководстве по устройству.

<sup>2</sup> Если требования лечебно-профилактического учреждения предусматривают выполнение дополнительного цикла дезинфекции после повторной сборки, количество разрешенных циклов следует сократить в 2 раза.

<sup>3</sup> Заменяйте эти части на новые после каждого пациента.

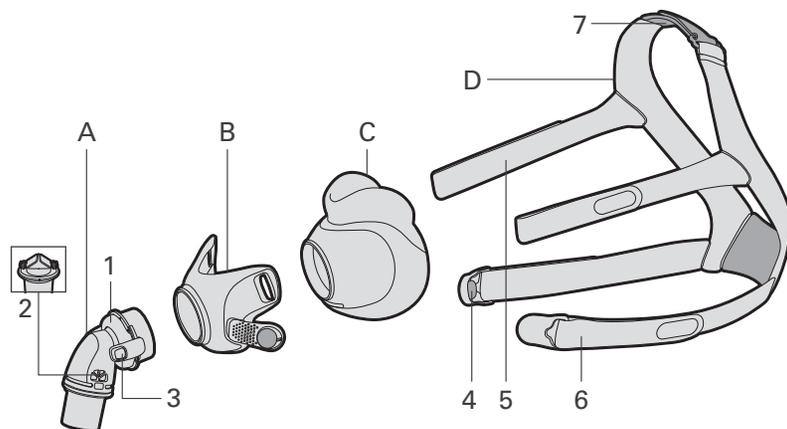

- A Патрубок
- B Корпус
- C Прослойка
- D Головное крепление
- 1 Вентиляционное отверстие
- 2 Анти-асфиксический клапан
- 3 Боковые кнопки
- 4 Магнитные защелки
- 5 Верхний ремешок головного крепления
- 6 Нижний ремешок головного крепления
- 7 Макушечный ремешок головного крепления

# Процедура тепловой дезинфекции

|   |   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|---|-------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|--|------------------------|----------|----------|--|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|----------|---|------------------------|----------|--|
| 1. Разборка                             | Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 2. Очистка                              | <p><b>Прослойка/корпус/головное крепление/стандартный патрубок (вручную):</b></p> <p>1. Ополосните корпус и стандартный патрубок под проточной водой<sup>1</sup>, как указано ниже.</p> <table border="1" data-bbox="432 264 1213 326"> <tr> <td>• Корпус</td> <td>20–25 °С</td> <td>Ополаскивание в течение 1 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Стандартный патрубок</td> <td>15–25 °С</td> <td>Ополаскивание в течение 1 минуты.</td> </tr> </table> <p>2. Погрузите компоненты маски, как указано ниже. Убедитесь, что при погружении нет пузырьков воздуха.</p> <table border="1" data-bbox="432 358 1791 483"> <tr> <td>• Прослойка</td> <td>1–2 % раствор Alconox</td> <td>20–25 °С</td> <td>Погружение на 1 минуту.</td> </tr> <tr> <td>• Корпус</td> <td>1–2 % раствор Alconox</td> <td>35–40 °С</td> <td>Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 5 минут.</td> </tr> <tr> <td>• Головное крепление</td> <td>1–2 % раствор Alconox</td> <td>20–30 °С</td> <td>Погружение на 3 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Стандартный патрубок</td> <td>1,5–2 % раствор Alconox</td> <td>40–50 °С</td> <td>Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 3 минут.</td> </tr> </table> <p>3. После погружения оставьте компоненты в растворе и очистите их внутреннюю и внешнюю поверхность с помощью щетки с мягкой щетиной, как указано ниже. Уделите особое внимание очистке зазоров и полостей.</p> <table border="1" data-bbox="432 508 1268 633"> <tr> <td>• Прослойка</td> <td>Очистка в течение 1 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Корпус</td> <td>Очистка в течение 1 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Головное крепление</td> <td>Очистка в течение 2 минут. Затем отожмите его, чтобы удалить избыток раствора.</td> </tr> <tr> <td>• Стандартный патрубок</td> <td>Очистка в течение 1 минуты.</td> </tr> </table> <p>4. Ополосните компоненты водой<sup>1</sup>, как указано ниже.</p> <table border="1" data-bbox="432 662 1734 756"> <tr> <td>• Прослойка</td> <td>5 литров</td> <td>13–18 °С</td> <td>Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты, затем повторите еще раз.</td> </tr> <tr> <td>• Корпус</td> <td>5 литров</td> <td>15–20 °С</td> <td>Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Стандартный патрубок</td> <td>5 литров</td> <td>15–25 °С</td> <td>Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.</td> </tr> </table> <p>5. Ополосните компоненты под проточной водой<sup>1</sup>, как указано ниже.</p> <table border="1" data-bbox="432 786 1514 880"> <tr> <td>• Корпус</td> <td>20–25 °С</td> <td>Ополаскивание в течение 1 минуты.</td> </tr> <tr> <td>• Головное крепление</td> <td>20–25 °С</td> <td>Отожмите несколько раз в течение 90 секунд.</td> </tr> <tr> <td>• Стандартный патрубок</td> <td>15–25 °С</td> <td>Ополаскивание в течение 1 минуты. Затем потрясите, чтобы удалить избыток воды.</td> </tr> </table> <p><b>Стандартный патрубок (ультразвуковая баня):</b></p> <p>1. Ополосните и очистите компонент с помощью щетки с мягкой щетиной под проточной водой<sup>1</sup> при 20–30 °С в течение 1 минуты. Уделите особое внимание очистке зазоров и полостей. Смените съемные части.</p> <p>2. Заполните устройство ультразвуковой очистки на две трети 1 % раствором Alconox при 20–30 °С и выполните 20-минутную ультразвуковую обработку. Убедитесь, что компонент полностью погружен в раствор. Чтобы не допускать соприкосновения компонента с резервуаром, используйте корзину или лоток.</p> <p>3. Ополосните компонент путем энергичного взбалтывания в 5 литрах воды<sup>1</sup> при 20–30 °С в течение 1 минуты. Повторите процедуру еще раз.</p> | • Корпус   | 20–25 °С  | Ополаскивание в течение 1 минуты. | • Стандартный патрубок | 15–25 °С | Ополаскивание в течение 1 минуты. | • Прослойка | 1–2 % раствор Alconox | 20–25 °С | Погружение на 1 минуту. | • Корпус | 1–2 % раствор Alconox | 35–40 °С | Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 5 минут. | • Головное крепление | 1–2 % раствор Alconox | 20–30 °С | Погружение на 3 минуты. | • Стандартный патрубок | 1,5–2 % раствор Alconox | 40–50 °С | Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 3 минут. | • Прослойка | Очистка в течение 1 минуты. | • Корпус | Очистка в течение 1 минуты. | • Головное крепление | Очистка в течение 2 минут. Затем отожмите его, чтобы удалить избыток раствора. | • Стандартный патрубок | Очистка в течение 1 минуты. | • Прослойка | 5 литров | 13–18 °С | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты, затем повторите еще раз. | • Корпус | 5 литров | 15–20 °С | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты. | • Стандартный патрубок | 5 литров | 15–25 °С | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты. | • Корпус | 20–25 °С | Ополаскивание в течение 1 минуты. | • Головное крепление | 20–25 °С | Отожмите несколько раз в течение 90 секунд. | • Стандартный патрубок | 15–25 °С | Ополаскивание в течение 1 минуты. Затем потрясите, чтобы удалить избыток воды. |
| • Корпус                                | 20–25 °С  | Ополаскивание в течение 1 минуты.  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Стандартный патрубок                  | 15–25 °С  | Ополаскивание в течение 1 минуты.  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Прослойка                             | 1–2 % раствор Alconox   | 20–25 °С   | Погружение на 1 минуту.   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Корпус                                | 1–2 % раствор Alconox   | 35–40 °С   | Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 5 минут. |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Головное крепление                    | 1–2 % раствор Alconox   | 20–30 °С   | Погружение на 3 минуты.   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Стандартный патрубок                  | 1,5–2 % раствор Alconox   | 40–50 °С   | Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 3 минут. |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Прослойка                             | Очистка в течение 1 минуты.   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Корпус                                | Очистка в течение 1 минуты.   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Головное крепление                    | Очистка в течение 2 минут. Затем отожмите его, чтобы удалить избыток раствора.  |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Стандартный патрубок                  | Очистка в течение 1 минуты.   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Прослойка                             | 5 литров  | 13–18 °С   | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты, затем повторите еще раз.         |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Корпус                                | 5 литров  | 15–20 °С   | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.                                  |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Стандартный патрубок                  | 5 литров  | 15–25 °С   | Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.                                  |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Корпус                                | 20–25 °С  | Ополаскивание в течение 1 минуты.  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Головное крепление                    | 20–25 °С  | Отожмите несколько раз в течение 90 секунд.                                    |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Стандартный патрубок                  | 15–25 °С  | Ополаскивание в течение 1 минуты. Затем потрясите, чтобы удалить избыток воды. |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 3. Осмотр и сушка                       | <p>1. Осмотрите устройство и при необходимости повторите мойку до визуального подтверждения чистоты.<sup>2</sup></p> <p>2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.</p> <p>3. Дайте компонентам маски высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.<sup>3</sup></p>  |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 4. Дезинфекция и сушка                  | <p>1. Погрузите компоненты маски в емкость с горячей водой<sup>1</sup>, используя следующие комбинации температуры и времени. Убедитесь, что при погружении нет пузырьков воздуха.</p> <table border="1" data-bbox="432 1162 1163 1224"> <tr> <td>• Прослойка/корпус/стандартный патрубок</td> <td>90 °С</td> <td>Погружение на 1 минуту</td> </tr> <tr> <td>• Головное крепление</td> <td>93 °С</td> <td>Погружение на 10 минут</td> </tr> </table> <p>2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.</p> <p>3. Дайте компонентам маски высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.</p>  | • Прослойка/корпус/стандартный патрубок  | 90 °С   | Погружение на 1 минуту            | • Головное крепление   | 93 °С    | Погружение на 10 минут            |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Прослойка/корпус/стандартный патрубок | 90 °С   | Погружение на 1 минуту   |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| • Головное крепление                    | 93 °С   | Погружение на 10 минут   |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 5. Осмотр                               | Осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компонентах маски (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденные компоненты необходимо утилизировать и заменить новыми. Возможно небольшое изменение цвета силиконовых компонентов, что является допустимым.  |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 6. Повторная сборка                     | Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.  |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |
| 7. Упаковка и хранение                  | Храните в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте. <b>Температура хранения:</b> от -20 °С до 60 °С   |  |   |                                   |                        |          |                                   |             |                       |          |                         |          |                       |          |   |                      |                       |          |                         |                        |                         |          |   |             |                             |          |                             |                      |  |                        |                             |             |          |          |   |          |          |          |  |                        |          |          |  |          |          |                                   |                      |          |   |                        |          |  |

<sup>1</sup> Для выполнения очистки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду.

<sup>2</sup> Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.

<sup>3</sup> При выполнении тепловой дезинфекции сразу же после очистки сушка не требуется.

## Процедура тепловой дезинфекции — WD

| 1. Разборка                 | Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.  |                  |   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
|-----------------------------|--|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|---|----------|---|-------|----|-------|---|---------------|---|-------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------|---|----------------------|------|-------|---|
| 2. WD <sup>1</sup>          | <p>1. Погрузите компоненты маски в промывочную емкость объемом 5 литров с холодной водопроводной водой<sup>1</sup> на 1 минуту. Убедитесь, что при погружении на компонентах нет пузырьков воздуха.</p> <p>2. Ополосните компоненты под холодной проточной водопроводной водой<sup>1</sup> в течение 30 секунд.</p> <p>3. Поместите компоненты в моечно-дезинфицирующее устройство, соответствующее серии стандартов ISO 15883.</p> <p>4. Настройте моечно-дезинфицирующее устройство, как указано ниже:</p> <table border="1" data-bbox="432 331 1388 602"> <thead> <tr> <th>Фаза/Этап</th> <th>Время рециркуляции (в минутах)</th> <th>Температура (°C)</th> <th>Моющее средство</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предварительная мойка</td> <td>4</td> <td>Холодная</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Мойка</td> <td>10</td> <td>43–60</td> <td>2–10 мл/л (0,2–1 %) Neodisher MediClean forte</td> </tr> <tr> <td>Нейтрализация</td> <td>6</td> <td>43–60</td> <td>1–2 мл/л (0,1–0,2 %) Neodisher Z</td> </tr> <tr> <td>Окончательное ополаскивание</td> <td>3</td> <td>43–60</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Тепловая дезинфекция</td> <td>5–10</td> <td>90–93</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Фаза/Этап        | Время рециркуляции (в минутах)                | Температура (°C) | Моющее средство | Предварительная мойка | 4 | Холодная | - | Мойка | 10 | 43–60 | 2–10 мл/л (0,2–1 %) Neodisher MediClean forte | Нейтрализация | 6 | 43–60 | 1–2 мл/л (0,1–0,2 %) Neodisher Z | Окончательное ополаскивание | 3 | 43–60 | - | Тепловая дезинфекция | 5–10 | 90–93 | - |
| Фаза/Этап                   | Время рециркуляции (в минутах)   | Температура (°C) | Моющее средство                               |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| Предварительная мойка       | 4  | Холодная         | -   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| Мойка                       | 10   | 43–60            | 2–10 мл/л (0,2–1 %) Neodisher MediClean forte |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| Нейтрализация               | 6  | 43–60            | 1–2 мл/л (0,1–0,2 %) Neodisher Z              |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| Окончательное ополаскивание | 3  | 43–60            | -   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| Тепловая дезинфекция        | 5–10   | 90–93            | -   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| 3. Осмотр/Сушка             | <p>1. Осмотрите устройство и при необходимости повторите очистку [2. WD] до визуального подтверждения чистоты.<sup>2</sup></p> <p>2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.</p> <p>3. Дайте компонентам высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.</p>   |                  |   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| 4. Осмотр                   | Визуально осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компонентах маски (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденные компоненты необходимо утилизировать и заменить новыми. Возможно небольшое изменение цвета силиконовых компонентов, что является допустимым.   |                  |   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| 5. Повторная сборка         | Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.   |                  |   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |
| 6. Упаковка и хранение      | Храните в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте. <b>Температура хранения:</b> от -20 °C до 60 °C.   |                  |   |                  |                 |                       |   |          |   |       |    |       |   |               |   |       |                                  |                             |   |       |   |                      |      |       |   |

<sup>1</sup> Для выполнения мойки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду. Если местным законодательством предусмотрены требования к качеству воды для утилизации и вторичной переработки медицинских устройств, такие требования должны соблюдаться.

<sup>2</sup> Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.



## ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В случае отклонения от процедур, описанных в данном руководстве (например, превышения количества циклов повторной обработки), компания ResMed не гарантирует, что эффективность или безопасность устройства останутся на приемлемом уровне.
- Компоненты маски не следует подвергать автоклавированию или стерилизации окисью этилена.
- При использовании моющих или дезинфицирующих средств обязательно следуйте инструкциям производителя. При обнаружении противоречий данное руководство имеет приоритет.
- Не утюжьте головное крепление, так как его материал чувствителен к нагреванию и может повредиться.