





Veillez à lire l'intégralité du guide d'utilisation Lumis avant d'utiliser l'appareil.

Configuration

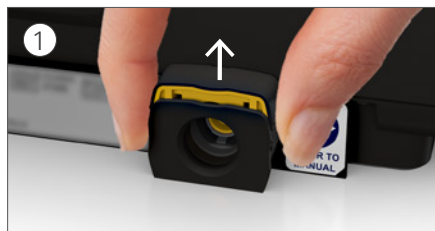


L'appareil étant posé sur une surface stable et de niveau, saisissez le clip de fixation à l'arrière de l'appareil et tirez vers le haut pour ouvrir. Remarque : Le clip de fixation est montré dans la position ouverte.

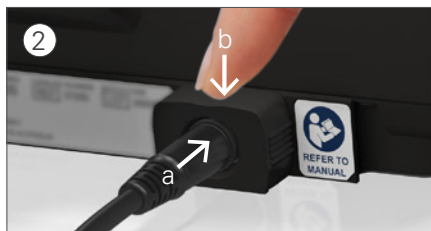

(a) Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'appareil, puis (b) appuyez sur le clip de fixation pour fixer en place. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et l'autre extrémité sur la prise de courant.



Raccordez fermement le circuit respiratoire à la sortie d'air à l'arrière de l'appareil.

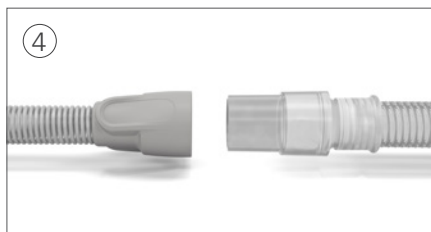

Raccordez l'extrémité libre du circuit respiratoire fermement sur le masque assemblé. Appuyez sur Marche/Arrêt pour commencer le traitement.

Lumis avec HumidAir

Si votre appareil Lumis comporte un humidificateur HumidAir™, remplissez l'humidificateur comme suit :



Ouvrez l'humidificateur et remplissez-le d'eau jusqu'au repère de niveau d'eau maximum.



Fermez l'humidificateur et insérez-le dans le côté de l'appareil.

L'humidificateur chauffant a été conçu pour prévenir la sécheresse et la congestion et rendre le traitement plus confortable.

Adaptation au traitement


Si vous utilisez ce système pour la première fois, vous pourrez avoir besoin d'un peu de temps pour vous habituer au traitement. Cela n'a rien d'inhabituel. En général il faut entre une et deux semaines pour s'habituer à la pression de l'air.

Modification des réglages de confort pour soulager les symptômes

Si vous rencontrez des difficultés pour vous habituer au traitement, vous pouvez utiliser les fonctions de confort de Lumis.

- **Difficultés pour s'endormir**—Si vous avez des difficultés pour vous endormir lorsque la pression est élevée, réglez sur Rampe ou augmentez Dur. rampe.
- **Sensation de ballonnement**—Si vous vous sentez légèrement gonflé après avoir avalé de l'air, réglez sur Rampe ou augmentez Dur. rampe.
- **Sensation de manque d'air**—Si vous avez l'impression de manquer d'air, mettez le réglage Dur. rampe sur Off.


Pour modifier la durée de rampe :

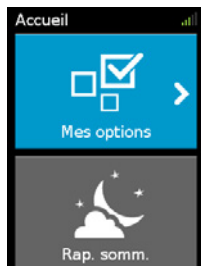

1. Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder à Mes options.



2. Tournez le bouton de réglage pour mettre Dur. rampe en surbrillance et appuyez pour la sélectionner.

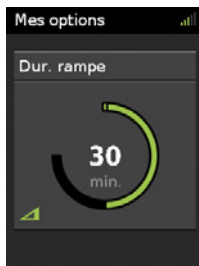

3. Tournez le bouton de réglage pour choisir le réglage qui vous convient.



4. Appuyez sur le bouton de réglage pour enregistrer la modification.

Si votre appareil Lumis comporte un HumidAir, vous disposez de plus fonctions de confort destinées à rendre votre traitement plus confortable.

- **Nez sec ou nez qui coule**—Si vous avez le nez sec ou le nez qui coule, augmentez le niveau d'humidité sur l'appareil.
- **Gouttelettes d'eau (condensation)**—Si vous avez des gouttelettes d'eau sur votre nez, votre masque ou votre circuit respiratoire, réduisez le niveau d'humidité sur l'appareil.



ResMed

Nettoyage

1. Nettoyez le circuit respiratoire à l'eau tiède avec un détergent doux. Ne le lavez pas dans une machine à laver ou un lave-vaisselle.
2. Rincez soigneusement le circuit respiratoire et laissez-le sécher à l'abri de la lumière directe du soleil et/ou de la chaleur.
3. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

Si votre appareil Lumis comporte un humidificateur HumidAir, nettoyez l'humidificateur comme décrit dans les étapes 1 et 2.

Consultez le guide d'utilisation du masque pour des instructions détaillées sur le nettoyage de votre masque.

Vérification et remplacement réguliers des pièces

Afin d'assurer un confort optimal et votre sécurité, il est important que vous procédiez régulièrement à la vérification et au remplacement des pièces et des consommables. Le remplacement régulier des pièces et des consommables contribue à garantir que votre traitement est optimisé et votre confort assuré.

Consultez le guide d'utilisation Lumis pour des instructions détaillées sur la vérification de votre appareil. Contactez votre médecin pour des informations sur la fréquence des remplacements.

Numéro de série	Numéro de l'appareil
Type et taille de masque	Date d'installation
Remarques	

 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australie

DISTRIBUÉ PAR :
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis.
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW R.U.

Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Lumis, ClimateLine et HumidAir sont des marques de commerce de ResMed Ltd. ClimateLine est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Pour en savoir plus sur les brevets, consultez www.resmed.com/ip.
© 2015 ResMed Ltd. 288332/1 2015-08

 0123
0682

ResMed.com



288332