

BRAEBON

MEDIByte JUNIOR

Tests de sommeil à domicile.

Autorisations et certificats

- ✓ U.S. FDA
- ✓ Health Canada
- ✓ European CE
- ✓ Australian TGA




Dimensions et poids

Hauteur: 71 mm
Largeur: 76 mm
Profondeur: 19 mm
Poids: 91 g



Connexions et éléments de commande

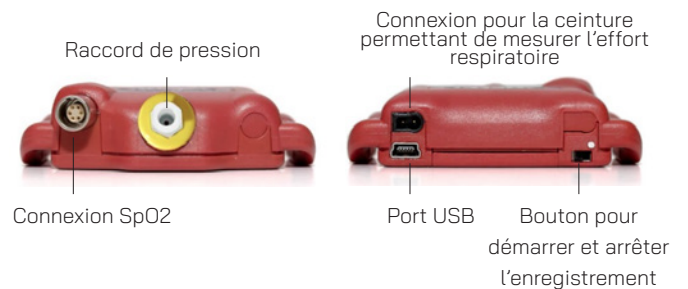

MediByte® Junior est un enregistreur de type 3.

Le MediByte Jr permet un dépistage simple, économique et fiable de l'apnée du sommeil. Le MediByte® Jr est fabriqué en nylon/plastique lisse avec un connecteur LEMO™ extra-robuste et a été conçu pour une longue durée de vie. Avec un poids de seulement 91 grammes, il est idéal pour les examens chez les adultes. L'appareil est fixé au patient à l'aide d'une sangle afin de mesurer l'effort respiratoire. Aucune autre fixation n'est donc nécessaire.

L'oxymétrie intégrée et un capteur de pression interne rendent superflus les capteurs externes. Les mesures sont enregistrées dans la mémoire interne et téléchargées sur l'ordinateur via une connexion USB.

MBJRK

Propriétés	
Système d'exploitation : Windows 10 et Windows 11 64 bits - Processeur i5 ou supérieur.	✓
Logiciel informatique requis : MS Office	✓
Modèles de rapport : Microsoft Word et OpenOffice	✓
Dimensions de l'appareil : 76 mm x 71 mm x 19 mm	✓
Poids de l'appareil : 91 g	91g
Mémoire interne : 256 Mo	✓
Durée d'enregistrement : jusqu'à 24 heures de données en continu ou deux enregistrements consécutifs de 9 heures.	✓
Source d'alimentation : pile au lithium rechargeable ou jetable 1/2 AA.	✓
Logiciel MediByte Jr en arabe, chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais, roumain, russe et espagnol	✓
Contenu du kit MediByte Junior :	
Enregistreur MediByte Jr. (modèle MBJR). Quantité: 1	✓
Sangle Q-RIP Effort (modèle 8572) avec câble. Quantité: 1	✓
Câble SpO2 pour MediByte (modèle 8900). Quantité: 1	✓
Kit patient (modèle 8110). Quantité: 1	✓
Sacoche de transport MediByte Jr. Quantité: 1	✓
Câble USB pour MediByte (modèle 8890). Quantité: 1	✓
Guide patient pour MediByte Jr. (modèle 8926). Quantité: 1	✓
Manuel d'utilisation MediByte (installé avec le logiciel)	✓
MediByte/MediByte Jr Instructions pour la configuration du premier patient. Quantité: 1	✓
Chargeur de batterie avec adaptateur secteur UE de type C et 2 piles lithium ½ AA. Quantité: 1	✓
Paramètres disponibles :	
Ronflement (canule nasale)	✓
Flux nasal	✓
Sangle RIP pour l'effort respiratoire	✓
SPO2	✓
Fréquence cardiaque	✓
Position du corps (interne)	✓
PPG (photopléthysmographie)	✓

Distribution par: ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40, 4051 Basel
MediByte® est une marque déposée de BRAEBON Medical Corporation.

Veillez lire le mode d'emploi (et, le cas échéant, le guide clinique) pour obtenir des informations pertinentes sur les contre-indications, les avertissements et les précautions à prendre avant et pendant l'utilisation des produits. Cette présentation ou ce contenu est destiné uniquement aux professionnels de santé. ResMed, le distributeur du MediByte Jr, a élaboré cette fiche d'information/ce contenu. Elle est destinée à faciliter la résolution des problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation et a été vérifiée par le fabricant Braebon Medical Corporation. Elle ne remplace pas le mode d'emploi du fabricant. Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation du produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation du MediByte Jr fourni avec le produit. © 2025. 10114559/1 2025-11