



Doppelwandige Nasenpolster

- dichten zuverlässig ab
- stabilisieren

AirFit P30i
AirFit P10


Flexibler Rahmen

- selbstanpassend
- weich gepolstert

Klickverschluss

- einfacher Kissenwechsel

AirFit N20
AirFit F20
AirFit F10

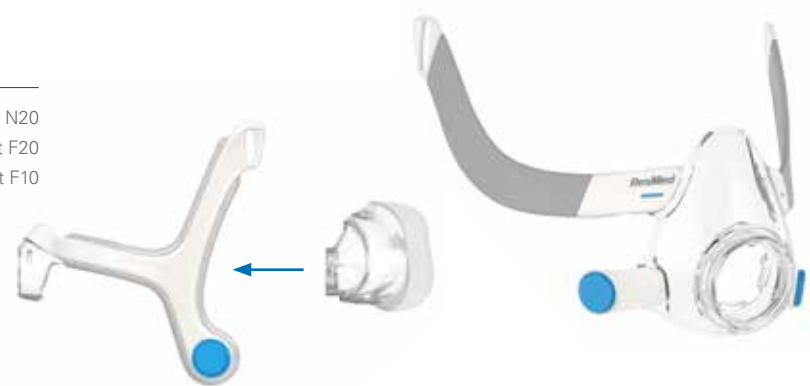

Magnet-Clips

- schnelles An-/Ablegen der Maske

AirFit F30i
AirFit F30
AirFit F20
AirFit N20



SpringFit-Rahmen

- Schlauchanschluss oben
- Schlafen in allen Lagen

AirFit P30i
AirFit N30i
AirFit F30i



Kniestück mit Schnellanschlussfunktion

- schnelles Anschließen/Lösen


AirFit P30i AirFit F20
AirFit N30i AirFit N20
AirFit F30i AirFit F10
AirFit F30



AirFit Kopfbänder

- weiches, atmungsaktives Material
- verschiedene Größen
- thermisch aufbereitbar

AirFit 20 Serie
AirFit 30 Serie

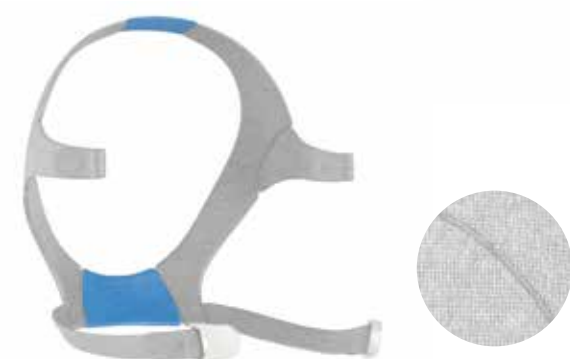

Maskenübersicht online
[Lead.me/Masken-Uebersicht](https://lead.me/Masken-Uebersicht)



Übersicht
Desinfektionsanleitungen
[Lead.me/Masken-Clean](https://lead.me/Masken-Clean)



Übersicht
Masken-Gerätekompatibilität
[Lead.me/Masken-Geraet](https://lead.me/Masken-Geraet)

Für ein Maskenschablonen-Set der **AirFit™ 20** - & **AirFit™ 30** -Serie kontaktieren Sie bitte Ihren ResMed Ansprechpartner.




AirFit™

Für jeden Anspruch die passende Maske

Die individuellen Anforderungen an CPAP-Masken können sehr vielfältig sein.

Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass moderne Masken komfortabel und bequem sitzen, gut abdichten, viel Bewegungsfreiheit bieten und einfach zu handhaben sind. Wie aber werden diese Anforderungen erfüllt, zumal darüber hinaus noch weitere individuelle Ansprüche eines jedes einzelnen Anwenders bestehen?


ResMed hat mit seinen Maskentechnologien schon immer Maßstäbe gesetzt. Mit der Vielfalt der sehr innovativen, aktuellen AirFit Maskenserien gehen wir erneut gezielt diesen Schritt und widmen uns den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen der Anwender. Lassen Sie sich überzeugen, wie die AirFit Masken dies ermöglichen.

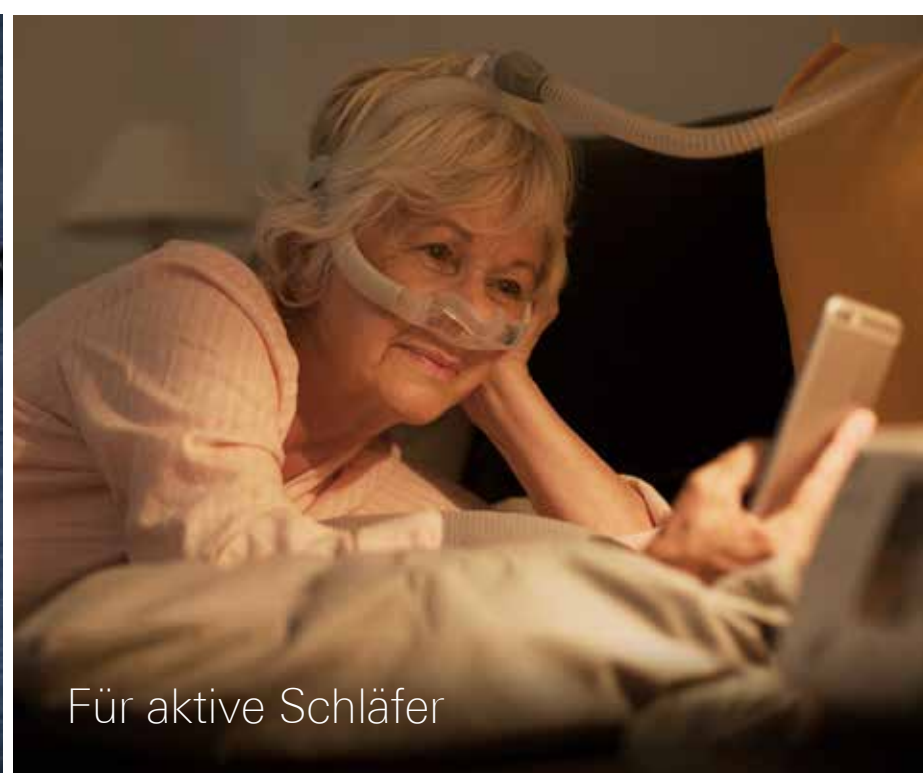

Maskentechnologien der AirFit™-Serien

- Stabilisierungs-Membran**
- sicherer Sitz
 - zuverlässige Abdichtung

AirFit N20
AirFit F20

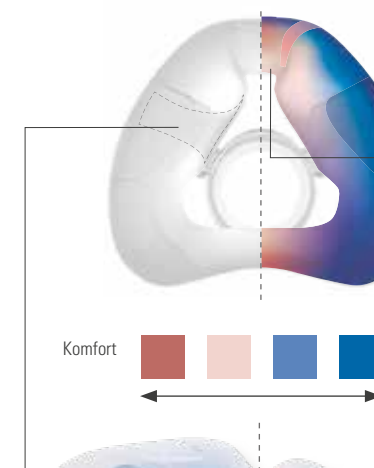

Multifunktionale Maskenkissen

- Flexibler Nasenrückbereich**
- passt sich an

- Variable Materialstärken**
- gleichmäßige Druckverteilung
 - bequemer Sitz

- Angepasste Oberflächenstrukturen**
- angenehmes Tragegefühl
 - sicherer Halt

AirFit 20 Serie
AirFit 30 Serie



AirFit N30i
AirFit N30
AirFit F30i
AirFit F30

- Nasenflügelkissen**
- schont den Nasenrücken
 - umfassende Freiheit

- Septum-Membran**
- korrekter Sitz
 - stabilisiert



AirFit™ – Maskenportfolio

Passende Lösungen für individuelle Therapieanforderungen

AirFit™ 30i Serie

FÜR AKTIVE SCHLÄFER

- Schlauchanschluss oben
- Mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit



AirFit P30i AirFit N30i AirFit F30i

AirFit™ 30 Serie

FÜR MINIMALISTEN

- Klein, leicht und einfach im Aufbau und in der Handhabung
- Nasenflügelkissen mit Sitz unterhalb der Nase



AirFit N30 AirFit N30 QuietAir AirFit F30

AirFit™ 20 Serie

FÜR SCHNELLEINSTEIGER

- Für viele Gesichtsformen und -größen passend
- Optional erhältlich: AirTouch™ und QuietAir™



AirFit N20 Classic AirFit N20 AirFit N20 for Her AirFit F20 AirFit F20 for Her

AirFit™ 10 Serie

FÜR RUHEBEDÜRFTIGE FÜR WEITERE OPTIONEN

- Klein, leicht und leise
- Vorgängermodell der AirFit F20



AirFit P10 AirFit P10 for Her AirFit F10 AirFit F10 for Her

Maskentyp	Nasenpolster	Nasal	Full Face
Artikel-Nr. Maskenset	63866 S 63865 STD (inkl. Polster S, M)	63816 S 63815 STD (inkl. Kissen S, M)	63310 S/Small 63312 M/STD 63313 W/STD (ohne Komfortpolster)
HMV Pos.-Nr.	keine Kassenleistung	14.24.16.2076	14.24.16.6061
Version vented	•	•	•
Ausatemsystem	QuietAir	Standard	Standard
Druckbereich (cm H ₂ O)	4 - 25	4 - 25	4 - 30
Verfügbare Größen	Rahmen: S, STD Polster: S, M, L	Rahmen: S, STD Kissen: S, M, SW, W	Rahmen: S, STD, L Kissen: S, M, SW, W
Kopfbandgrößen	eine Größe	eine Größe	eine Größe
Magnetclips ¹	–	–	•
Anzahl Hauptkomponenten ohne Clipse & Komfortpolster	4	4	4
Einstellung bei AirSense™/AirCurve™/S9™	Nasenpolster	Nasenpolster	Full Face
Gewicht ca.(g)	87	85	117
Lautstärke in dB(A) nach ISO 4871 / 3744 Schalleistungspegel	21	24	25
Kompatibel mit AirMini™	–	–	–
Optional verfügbares Zubehör (keine Kassenleistung)	–	–	–

Nasal	Nasal	Full Face
64205 STD (inkl. Kissen S, M)	64204 QuietAir (inkl. Kissen S, M)	64114 S 64115 M
14.24.16.2081	keine Kassenleistung	14.24.16.6012
•	•	•
Standard	QuietAir	Standard
4 - 20	4 - 20	3 - 30
Kissen: S, M, SW	Kissen: S, M, SW	Kissen: S, M
eine Größe	eine Größe	eine Größe
–	–	•
3	3	4
Nasenpolster	Nasenpolster	Full Face
44	45	95
28	25	31 bzw. 21 mit QuietAir
–	–	•
N30 QuietAir Rahmen (64219)	–	QuietAir für AirFit F20/F30 (63494)

Nasal	Nasal	Nasal	Full Face	Full Face
63710 S 63711 M 63712 L	63509 S 63511 M 63512 L	63510	63405 S 63406 M 63407 L	63408 S 63409 M
14.24.16.2074	14.24.16.3030	14.24.16.3030	14.24.16.6057	14.24.16.6057
•	•	•	•	•
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
4 - 30	4 - 30	4 - 30	3 - 40	3 - 40
Kissen: S, M, L	Kissen: S, M, L	Kissen: S	Kissen: S, M, L	Kissen: S, M
S im Set S, STD im Set M und L	M/STD im Set, S und L separat erhältlich	for Her im Set, S, M, L (blau) separat erhältlich	STD im Set, S und L separat erhältlich	for Her im Set, S, M, L (blau) separat erhältlich
–	•	•	•	•
4	4	4	4	4
Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Full Face	Full Face
62	78	78	114	114
26	24	24	31 bzw. 21 mit QuietAir	31 bzw. 21 mit QuietAir
•	•	•	•	•
–	AirTouch N20 Kissen 63950 S, 63951 M, 63952 L	AirTouch N20 Kissen 63950 S, 63951 M, 63952 L	AirTouch F20 Kissen 63028 S, 63029 M, 63030 L QuietAir für AirFit F20/F30 (63494)	AirTouch F20 Kissen 63028 S, 63029 M, 63030 L QuietAir für AirFit F20/F30 (63494)

Nasenpolster	Nasenpolster	Full Face	Full Face
62901 (inkl. Polster S, M, L)	62911 (inkl. Polster XS, S, M)	63105 S 63106 M 63107 L	63142 XS 63143 S 63144 M
14.24.16.3024	14.24.16.3024	14.24.16.6045	14.24.16.6045
•	•	•	•
QuietAir	QuietAir	Standard	Standard
4 - 20	4 - 20	3 - 40	3 - 40
Polster: XS, S, M, L	Polster: XS, S, M, L	Rahmen: XS/S, M/L Kissen: XS, S, M, L	Rahmen: XS/S, M/L Kissen: XS, S, M, L
STD im Set, S separat erhältlich	S im Set, STD separat erhältlich	STD im Set, S und L separat erhältlich	for Her im Set: S, STD, L (blau) separat erhältlich
–	–	–	–
3	3	4	4
Nasenpolster	Nasenpolster	Full Face	Full Face
45	45	92	92
21	21	28	28
•	•	–	–
–	–	–	–

Hinweise:
Alle Maskenkissen/Nasenpolster sind aus Silikon-Elastomer (weicher Anteil), außer die AirTouch Maskenkissen, diese sind aus Polyurethan-Memory-Schaum (weicher Anteil). Die Maskensysteme sind PVC-, DEHP- und Phthalat-frei und enthalten kein Latex aus Naturkautschuk.

¹ Zwischen Kopfband/Rahmen und aktiven medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher oder Defibrillatoren) muss ein Abstand von mindestens 50 mm eingehalten werden, um Beeinträchtigungen durch lokalisierte Magnetfelder auszuschließen. Die Magnetfeldstärke beträgt weniger als 400 mT. Beachten Sie hierzu die jeweilige Gebrauchsanweisung des Maskensystems.