

## Mirage Swift™ II

### ORRPÁRNA RENDSZER

#### Halkan javítja a maszk elfogadhatóságát

A Mirage Swift II egy hatékony, könnyű és halk megoldás az orrmaszkokkal összehasonlítva.

Ez a rendszer kevesebbet takar az arcból, ami elfogadhatóbbá teszi a terápiát és a hosszú távú használatot. A párnák lágyan ülnek az orrlyukak bejáratánál, így kevésbé érnek hozzá az archoz.

A Mirage Swift II rendszert halk terápiához tervezték, így a betegek és a környezetükben lévőek egész éjjel nyugodtan aludhatnak. Továbbá minimálisra csökkenti a holtteret és a szén-dioxid visszalélegzését, ami fontos a hatékony terápia szempontjából.

Mirage Swift II – a ResMedtől, a maszktechnológia világvezető cégétől.

**A biztonságos fejpánt** javítja a szigetelést és stabilitást anélkül, hogy túlságosan meg kellene húzni

**Az orrpárnák** rugalmasan és kényelmesen ülnek az orrlyukak bejáratán annak érdekében, hogy a terápia alatt biztosítsák a jó szigetelést

**A lágy és rugalmas párnatömlő** elősegíti azt, hogy az orrpárnák a helyükön maradjanak úgy, hogy minimális nyomást gyakorolnak az orra és az arcra

**A forgó könyökkel és csuklóval** ellátott cső több alvási pozíciót tesz lehetővé


**A ResMed embléma** segítségével a rendszer könnyen pozícionálható a megfelelő módon

**A könnyen leolvasható maszkméret** megkönnyíti az újrendelést

**A forgó párnatömlő-szerelvény** lehetővé teszi, hogy a beteg a legkényelmesebb pozíciót válassza az orrpárnák és az orrlyukak érintkezésénél



## AKTUÁLIS MÉRET

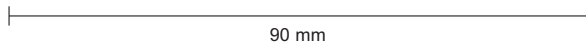

32 mm

## A TECHNOLÓGIA ELŐNYEI

### Egyedi levegőkifúvó nyílás a halk terápia érdekében

- A kifúvó nyílás a kereten található, nem a párnán, ezzel javítja a levegő eltávolításának módját
- Egyedi kifúvó nyílásokon gyengéden és halkán távozik a levegő, a betegtől és a környezetében lévőktől távol

## ELŐNYÖK A BETEGEK SZÁMÁRA

- Halk terápia – előnyös a betegek és a környezetükben lévők számára
- Kényelmesen illeszkedik és hatékonyan szigetel – a forgó pámatömlő-szerelvény lehetővé teszi a használója számára, hogy a számára legmegfelelőbb szögbe állítsa be az orrpárnát
- Hatékonyan illeszkedik a beteg arcformájához, és lehetővé teszi az orr vagy az arc mozgását – az orrpárnák, a tömlő, amelyen elhelyezkednek, valamint a kettőt összekötő "nyak" mind hajlékony és rugalmas
- Gyorsan és egyszerűen felhelyezhető otthon is – az első beállítás után (ha szükséges), a Mirage Swift II felhelyezhető csatok vagy Velcro™ nélkül is
- A maszkkal szabadon lehet olvasni vagy tévét nézni, és szemüveg is hordható a használata közben – könnyű és kompakt rendszer
- Sokféle alvási pozíció – a cső bármelyik oldalra csatlakoztatható úgy, hogy felfelé vagy lefelé nézzen

## SZAKMAI ELŐNYÖK

- Gyorsan felhelyezhető már az első alkalommal is – a rendszert úgy tervezték, hogy a beteg fejére könnyen és gyorsan felhelyezhető legyen, minimális beállítás mellett
- A rendszer sokféle orr és arcformára illeszkedik, a különféle faji jellegzetességeket is beleértve – a rendszer formáját kiterjedt antropometriai tanulmányok alapján alakították ki
- Csökkenti a szükséges készletet – mindegyik rendszer három különböző méretű párnaméretet tartalmaz, amelyből egy biztosan illeszkedik a betegre
- Nagyobb választék a betegek számára – hatékony megoldás az orrmszakkal összehasonlítva
- Átfogó betegtámogatás – a Mirage Swift II rendszert saját csomagolásában, használati útmutatóval, részletes utasításokkal és felhasználóbarát DVD-vel szállítjuk, amely felhelyezési és karbantartási információkat tartalmaz a betegek számára
- Javasolt új felhasználók, idősebb vagy fiatalabb, illetve kevésbé ügyes betegek számára – kivitele ergonomikus kivitel kevés alkatrészt tartalmaz és jól látható jelzésekkel látták el; összeszerelése, szétszerelése és tisztítása egyszerű

## TERMÉKKÓDOK

### Mirage Swift II orrpárna rendszer

(három orrpárna mérettel: S, M, L)

Európa **60513**

Egyesült Királyság **60516**

Franciaország **60518**

Ausztrália és Új-Zéland **60514**

Ázsia-csendes-óceáni térség **60515**

Kis (S) Közepes (M) Nagy (L)

