

Mirage™ SoftGel

MASQUE NASAL

Adaptation immédiate, confort durable

Pour ce qui est de la douceur et du confort, le masque nasal Mirage SoftGel est inégalé. Le confort de la bulle Duo Gel est assuré par la couche de gel transparente ; la couche de gel bleu garantit support et stabilité.

L'entourage rigide du masque est quant à lui compatible avec deux bulles interchangeables : celle du Mirage SoftGel et celle du Mirage Activa™ LT.

- **Adaptation immédiate**
- **Idéal pour les nouveaux patients**
- **Confort tout au long du traitement**
- **Qualité et fiabilité supérieures**

POUR LE PATIENT

Des bulles interchangeables pour plus de possibilités

- La possibilité de choisir sa bulle facilite l'observance sans avoir à remplacer tout le masque.

Le plaisir du confort, la sécurité de la stabilité

- La bulle Duo Gel associe douceur et stabilité.

Une bonne nuit de sommeil

- Plusieurs orifices intégrés diffusent l'air en silence, créant ainsi un environnement serein pour le patient et son conjoint.

Une mise en place facilitée

- La double jupe et la bulle Duo Gel du masque Mirage SoftGel facilitent la mise en place.
- La bulle s'adapte aux contours du visage de chaque utilisateur et garantit le confort du masque.

POUR LE PROFESSIONNEL

Satisfaction du client, observance accrue

- Acceptation accrue du traitement grâce à un ajustement immédiat – Confort durable.
- Kit d'information complet pour le patient.

Toujours plus d'efficacité

- Les bulles interchangeables et les composants communs améliorent la gestion des stocks, permettent de réduire les coûts et raccourcissent les durées de mise en place et de formation.
- Le Mirage SoftGel peut faire l'objet d'une désinfection haut niveau.
- Particulièrement fiable, le Mirage SoftGel est une garantie de performance constante et de réduction des plaintes et des rappels.



La molette de réglage MicroFit propose 24 positions pour un meilleur ajustement et confort et une étanchéité accrue


L'entourage rigide unique de ResMed est compatible avec la bulle du Mirage SoftGel et celle du Mirage Activa LT, ce qui se traduit par plus d'économies, plus de souplesse et plus de rentabilité

Grâce à sa capacité de rotation à 360 °, le coude permet de mettre le circuit dans la meilleure position pour le patient

L'orifice de ventilation silencieux diffuse l'air en douceur et silencieusement, loin du conjoint



La partition du coude aide au rinçage du CO₂ et réduit le niveau sonore

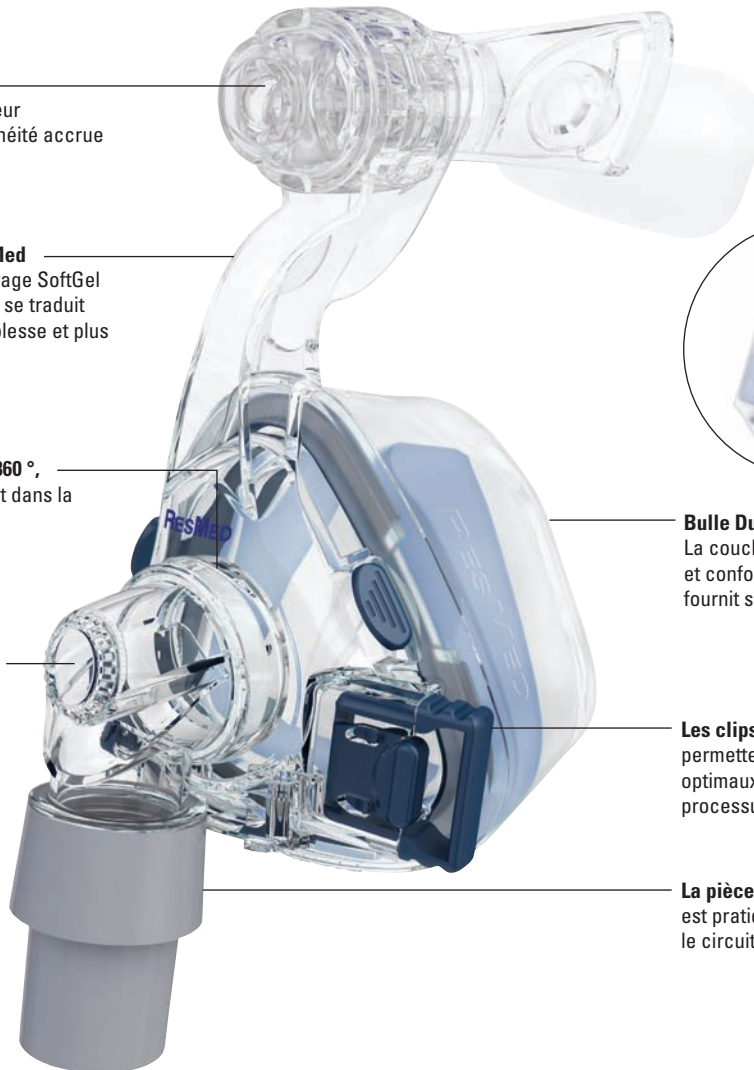

Bulle DuoGel
La couche de gel clair fournit douceur et confort ; la couche de gel bleu fournit support et stabilité

Les clips de harnais Set and forget permettent de conserver les réglages optimaux du harnais et facilitent le processus de pose et de retrait

La pièce pivotante est pratique pour brancher et débrancher le circuit respiratoire

CODES PRODUIT

Masque nasal Mirage SoftGel

| | |
|------------|--------------|
| Small | 61605 |
| Médium | 61606 |
| Large | 61607 |
| Large Wide | 61608 |