

RESMED


Mirage Swift™ II

NASENPOLSTERSYSTEM



Ihr perfekter Partner für die CPAP-Therapie

So leise, dass Patient und Partner ruhig schlafen können

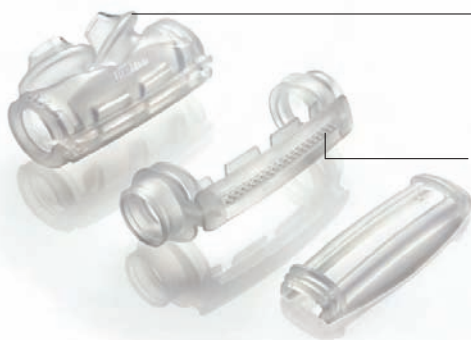

Wirksamer Verschluss reduziert unerwünschten Luftfluss und einhergehende Geräusche

Luftauslassöffnungen befinden sich auf dem Maskenhalter, nicht auf dem Nasenpolsterhalter, und sorgen somit für eine bessere Luftverteilung
Einzigartiges Design der Luftauslassöffnungen sorgt für sanfte und stille Luftverteilung weg vom Patienten und Partner

- Leise – angenehm für Patienten und Partner.
- Leise – dank des wertvollen Feedbacks unserer therapeutischen Experten.



Einzigartig wirksame Nasenpolstertechnologie

Die Mirage Swift II erfüllt drei wesentliche Kriterien für Wirksamkeit: Anpassung, Sitz und Komfort.

Die Einzigartigkeit der Nasenpolstertechnologie von ResMed liegt im mikroskopischen Detail. Sie ist nicht zu sehen und doch spürt der Patient den Unterschied.

Einstellbarer Winkel – perfektes Anlegen

- Drehbarer Nasenpolsterhalter erlaubt die individuelle Einstellung des Winkels, um einen optimalen Sitz und Komfort zu erreichen.

Einzigartige Form und Ausfertigung sorgen für optimale Anpassung, guten Sitz und Komfort

Der Winkel, in dem die Nasenpolster an den Nasenlöchern aufliegen, ist einstellbar und verbessert noch Anpassung, Sitz und Komfort


Die Nasenpolster und Nasenpolsterhalter sind flexibel. Dadurch kann sich die Maske an das Gesicht des Patienten anpassen

Form – jedes mikroskopische Detail zählt

- Die Form der Nasenpolster der Mirage Swift II ist das Ergebnis eingehender anthropometrischer Untersuchungen einer großen Auswahl verschiedener Gesichts- und Nasenformen.
- Jedes kleinste Element der Form und Ausfertigung trägt zum optimalen Verschluss, Sitz und Komfort bei einer großen Auswahl von Patienten bei.

Flexibilität ist wichtig

- Die Nasenpolster, der Nasenpolsterhalter, sowie die Verbindung sowie die Verbindung zwischen den beiden sind alle geschmeidig und flexibel.
- Dadurch kann sich die Mirage Swift II leicht an die Gesichtsform des Patienten anpassen und auf Bewegungen von Gesicht und Nase einstellen.

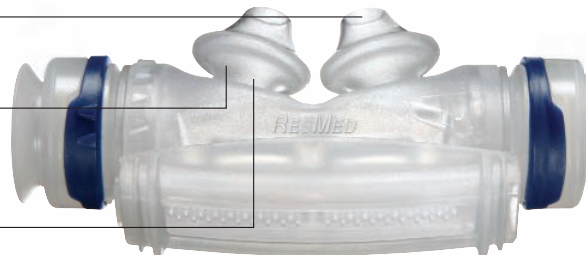

Wenn's wirklich drauf ankommt

- Neue Patienten, ältere Patienten, jüngere Patienten, weniger gewandte Patienten... die Mirage Swift II eignet sich für alle Patienten in allen Situationen.
- Die Anpassung der Mirage Swift II ist schnell und intuitiv. Nach der erstmaligen Anpassung kann die Mirage Swift II – ganz ohne Clips oder Klettverschlüsse – schnell und einfach angelegt werden.
- Aufgrund der wenigen und leicht abnehm- und anbringbaren Teile sowie der sichtbaren Markierungen und Vertiefungen ist die Maske leicht auseinander zu nehmen, zusammenzubauen und zu reinigen.
- Die Mirage Swift II ist leicht und kompakt und verschafft dem Patienten das Gefühl der Freiheit. Er kann seinen normalen Aktivitäten nachgehen und mit der Maske lesen, fernsehen und seine Brille tragen.
- Außerdem sind mit der Maske eine Reihe von Schlafpositionen möglich. Der Schlauch kann auf beiden Seiten angebracht und nach oben oder unten geführt werden.



Jedes Produkt wird mit Nasenpolsterhaltern in drei Größen geliefert, von denen eine ganz bestimmt passt.



So wirksam wie eine Nasenmaske

- Mirage Swift II – eine wirksame, leichte und leise Alternative zur Nasenmaske.
- Ein Produkt von ResMed – weltweit führender Anbieter von Masken.
- Bedeckt einen kleineren Teil des Gesichts – Patient fühlt sich wohl in seiner Maske, was für eine bessere Akzeptanz der Therapie und eine langfristige Compliance sorgt.
- Weniger Kontaktfläche – die Nasenpolster sitzen sanft an den Nasenlöchern auf.
- Minimaler Totraum und reduzierte Rückatmung von Kohlendioxid – wichtig für eine wirksame Therapie.

Weiches und stabiles Kopfbanddesign sorgt für optimalen Sitz und Stabilität, ohne dass das Kopfband fest angezogen werden muss

Nasenpolster sitzen flexibel und bequem vor der Nasenöffnung und sorgen für einen sicheren Verschluss während der Therapie

Weicher und flexibler Nasenpolsterhalter sorgt für sicheren Sitz der Nasenpolster ohne unangenehmen Druck auf Nase und Gesicht

Schlauch mit drehbarem Kniegelenk und Drehadapter bietet eine große Auswahl möglicher Schlafpositionen

ResMed-Logo erleichtert die richtige Positionierung des Systems

Gut leserliche Größenmarkierung erleichtert die Nachbestellung

Drehbarer Nasenpolsterhalter erlaubt individuelle Einstellung der Nasenpolster, um einen möglichst bequemen Winkel der Nasenpolster zu den Nasenlöchern zu erreichen



Fortschritte bei der Nasenpolstertechnologie – Vorteile für Ihren Betrieb bzw. Ihren Service

- Schnelle Anpassung
- Reduziertes Inventar (Nasenpolster in drei Größen in jeder Packung)
- Mehr Auswahl für Ihre Patienten
- Umfangreiche Patienteninformationen



PRODUKTCODE

Europa	60513
GB	60516
Frankreich	60518
ANZ	60514
Asien-Pazifik	60515

Mirage Swift II wird zusammen mit einer Aufbewahrungs- und Reisetasche, einer Kurzanleitung zur Anpassung, einer detaillierten Bedienungsanleitung sowie einer DVD mit Patienteninformationen zum Anlegen und zur Pflege des Systems geliefert.